



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE **ORTOPEDIA**






Conjunto de Cânulas

para Cifoplastia Smart Kit Allevo

Informações técnicas:

Indicado para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas, no procedimento de Cifoplastia com balão. Balão disponível nos tamanhos 16x16mm e 16x22mm.

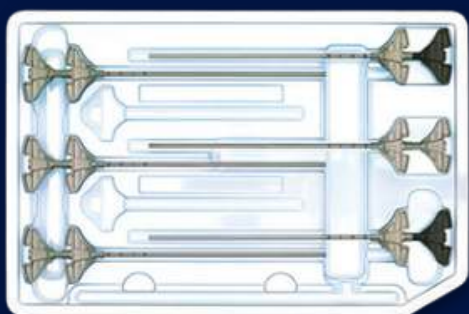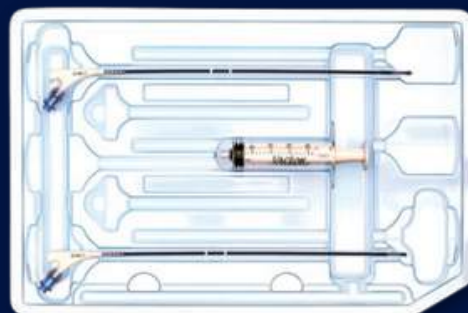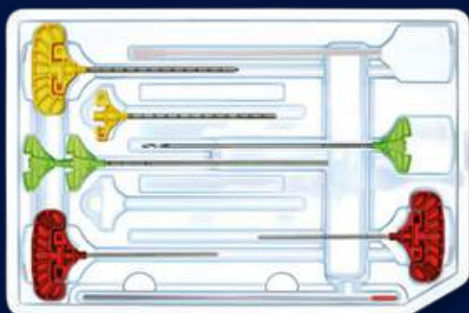

Conjunto de Cânulas

para Cifoplastia Smart Kit Allevo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
S1005	02 cânulas para acesso vertebral, em aço inoxidável, 11G x 11cm; 02 pinos guia com ponta cega com 26 cm de comprimento em aço inoxidável; 02 cânulas tampão; 01 cânula de introdução vertebral, 08G x 12 cm, graduada, em aço inoxidável; 01 dispositivo de introdução vertebral 08G x 12 cm, graduado, em aço inoxidável; 01 cânula de biópsia óssea 08G x 12 cm, ponta cônica, em aço inoxidável; 01 cânula com broca óssea 10 Fr, em aço inoxidável; 04 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal; 02 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal flexplunger; 02 cateteres balão com 2,7 mm de diâmetro x 332 mm de comprimento, com 16 mm de diâmetro externo do balão x 16 mm de comprimento do balão; 01 seringa de vácuo de 20 ml (a seringa destina-se à criar um vácuo, não sendo de uso hipodérmico); 02 dispositivos de insuflação do balão do cateter.
S1006	02 cânulas para acesso vertebral, em aço inoxidável, 11G x 11cm; 02 pinos guia com ponta cega com 26 cm de comprimento em aço inoxidável; 02 cânulas tampão; 01 cânula de introdução vertebral, 08G x 12 cm, graduada, em aço inoxidável; 01 dispositivo de introdução vertebral 08G x 12 cm, graduado, em aço inoxidável; 01 cânula de biópsia óssea 08G x 12 cm, ponta cônica, em aço inoxidável; 01 cânula com broca óssea 10 Fr, em aço inoxidável; 04 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal; 02 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal flexplunger; 02 cateteres balão com 2,7 mm de diâmetro x 332 mm de comprimento, com 16 mm de diâmetro externo do balão x 22 mm de comprimento do balão; 01 seringa de vácuo de 20 ml (a seringa destina-se à criar um vácuo, não sendo de uso hipodérmico); 02 dispositivos de insuflação do balão do cateter.






Conjunto de Cânulas

para Cifoplastia Stop'n Go Speed Track Short Kit Allevo

Informações técnicas:

Indicado para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas, no procedimento de Cifoplastia com balão.

- Os cateteres com balões duplos permitem a criação de uma cavidade maior para injeção de cimento ósseo e assim, melhor preenchimento e reestabilização da altura vertebral;
- Melhora a mobilidade e qualidade de vida do paciente;
- O uso do balão duplo permite que o profissional trabalhe com até quatro balões em uma única vértebra, oferecendo a vantagem de inflar cada balão individualmente, conforme a necessidade;
- Com o ajuste de pressão e volume para cada balão, a cavidade vertebral pode ser elevada de maneira específica, e os balões podem ser controlados separadamente, para estabilizar e recuperar a vértebra.

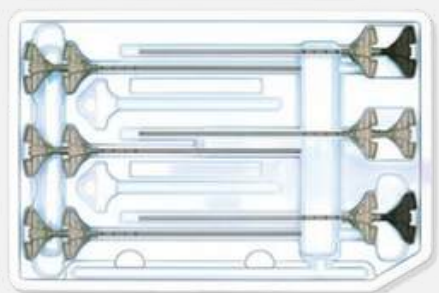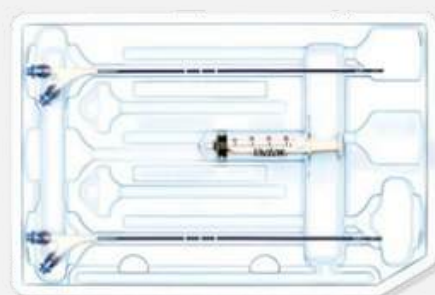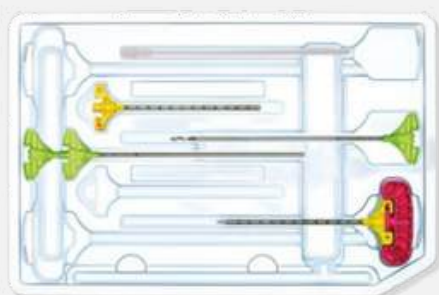

Conjunto de Cânulas

para Cifoplastia Stop'n Go Speed Track Short Kit Allevo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
S1117	01 cânula para introdução vertebral Speed Track em aço inoxidável AISI 304 com 4,1 mm de diâmetro externo x 123 mm com estilete com ponta perfurante em aço inoxidável com 3,6 mm de diâmetro interno x 178 mm de comprimento; 02 cânulas tampão; 01 cânula de introdução vertebral, 08 G x 12 cm, graduada, em aço inoxidável com dispositivo de introdução vertebral 08G x 12 cm, graduado, em aço inoxidável; 01 cânula de biópsia óssea 08G x 12 cm, ponta cônica, em aço inoxidável; 01 estilete em formato de broca óssea 10 Fr, em aço inoxidável; 04 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal; 02 cânulas para preenchimento vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10G x 18,5cm, com abertura frontal flexplunger; 02 cateteres balão duplo com 2,7 mm de diâmetro x 332 mm de comprimento; 02 balões com 16 mm de diâmetro externo do balão x 08 mm de comprimento do balão, volume de 03 ml cada balão; 01 seringa de vácuo de 20 ml (a seringa destina-se à criar um vácuo, não sendo de uso hipodérmico); 02 dispositivos para insuflação do balão com capacidade de 25 ml e taxa de pressão de 0 a 30 Atm; 02 adaptadores com 02 extensões para o cateter, com 15 e 17,5 cm, em poliuretano.

Conjunto de Cânulas

para Acesso Vertebral Allevó - S4002


Informações técnicas:

Indicado para acesso vertebral no procedimento de cifoplastia, para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas.

A cifoplastia é um método minimamente invasivo para o tratamento de fraturas e/ou para a criação de cavidades em ossos esponjosos na coluna vertebral. As cavidades podem ser preenchidas com um cimento apropriado.

Todos os itens que compõem o conjunto são fabricados em aço inoxidável AISI 304, os itens incluídos são: 2 cânulas para acesso vertebral, de 11G x 11cm, 2 pinos guia com ponta cega com 26 cm de comprimento, 2 pinos guia com ponta cortante com 26 cm de comprimento, 1 cânula de introdução vertebral graduada, 08 G x 12 cm, 1 dispositivo de introdução vertebral graduado 08G x 12 cm, 1 cânula de biópsia óssea ponta cônica 08G x 12 cm, 1 cânula com broca óssea 10 Fr.

Esses itens são inseridos na vértebra fraturada, para inserção dos dois cateteres balão Allevó.
(Vendido Separadamente)

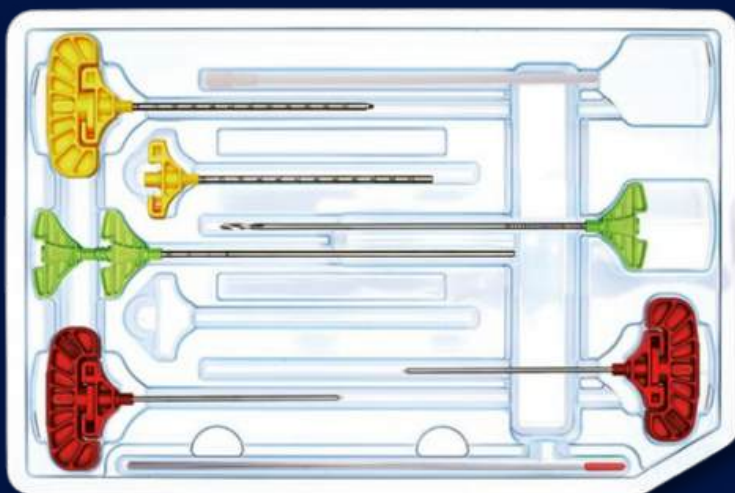

Cateter Balão Duplo

Stop'n Go Allevo S9420

Informações técnicas:

Indicado para restauração, estabilização e levantamento de vértebras fraturadas e comprimidas.

Disponível no tamanho 2.7 mm de diâmetro externo x 332 mm de comprimento, possui duplo balão de alta resistência em sua extremidade distal com dois balões de semi complacência, onde o diâmetro é regulado pelo volume, 03 ml cada, fabricado em pelletane (marca registrada), revestido em silicone, com 16 mm de diâmetro externo por 10 mm de comprimento, dois marcadores em platina nas extremidades distal e proximal do balão, conector com válvula no cateter. Vem acompanhado de 01 seringa de vácuo de 20 ml e 01 adaptador com 02 extensões para o cateter, com 15 e 17,5 cm, em poliuretano.



Dispositivo para Insuflação

QL

Informações técnicas:

Indicado para execução de procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de insuflar o balão, monitorizar a pressão no interior do balão e desinsuflar o balão.

O Dispositivo de insuflação descartável, constituído por uma peça única de plástico, com um manipulador de bloqueio concebido para controlar o êmbolo, um manómetro e um tubo conector de alta pressão com um adaptador rotativo macho. Uma torneira de passagem de 3 vias pode ser utilizada durante a preparação do dispositivo. O manómetro mede pressões que vão desde o vácuo até à capacidade indicada no manómetro; a escala do manómetro está dividida em secções de 1 atm. O manómetro tem uma segunda escala, interna, com os valores PSI equivalentes. A exatidão do manómetro foi verificada como correspondendo a 1 atm na amplitude total da escala.



Dispositivo para Insuflação

QL

CÓDIGO	CAPACIDADE DA SERINGA	TAXA DE PRESSÃO
QL1015	10 mL	15 atm
QL1030	10 mL	30 atm
QL1430	14 mL	30 atm
QL1455	14 mL	55 atm
QL2015	20 mL	15 atm
QL2020	20 mL	20 atm
QL2030	20 mL	30 atm
QL2525	25 mL	25 atm
QL2530	25 mL	30 atm
QL2540	25 mL	40 atm
QL4015	40 mL	15 atm
QL6015	60 mL	15 atm



Cureta

Allevo - S9410

Informações técnicas:

A cureta Allevo é indicada para raspagem dos ossos da coluna vertebral no procedimento de cifoplastia com balão. Ela é introduzida através da cânula de introdução vertebral Allevo, contida no conjunto de cânulas para acesso vertebral Allevo (vendido separadamente).

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, com 3,5 mm de diâmetro x 19 cm de comprimento. A cabeça de corte da cureta tem 8 mm de comprimento, a empunhadura anatômica com botão giratório para o ajuste do ângulo da cabeça de corte e indicador de segurança que mostra a rotação da cabeça de corte após exceder o torque ou limitador de força após exceder a força de tração.





www.medika.com.br