


Introdutor Percutâneo

Biomedical

Informações técnicas:

Indicado para acesso vascular central ou periférico, acesso subcutâneo e acesso a cavidades, onde por meio do introdutor, pode-se passar cateteres vasculares, cateteres diagnósticos, cateteres terapêuticos, sondas, fio guia, fio de marca passo, pinças de biópsia, instrumentos de cirurgia por endoscopia, entre outros. Também é indicado para infundir drogas, soluções, sangue e retirada de amostras para exames laboratoriais.

Os introdutores percutâneos são fabricados em poliuretano termoplástico, radiopaco, disponível nos tamanhos de 5Fr e 6Fr por 10cm de comprimento, possui conector luer lock em sua extremidade e está acoplada a uma válvula hemostática, que impedirá o refluxo sanguíneo ou a entrada de ar, conectada a ela existe um tubo de PVC conectado a uma torneira. Acompanha introdutor com válvula, manga protetora, fio guia de aço inoxidável flexível, agulha hipodérmica e agulha introdutora.

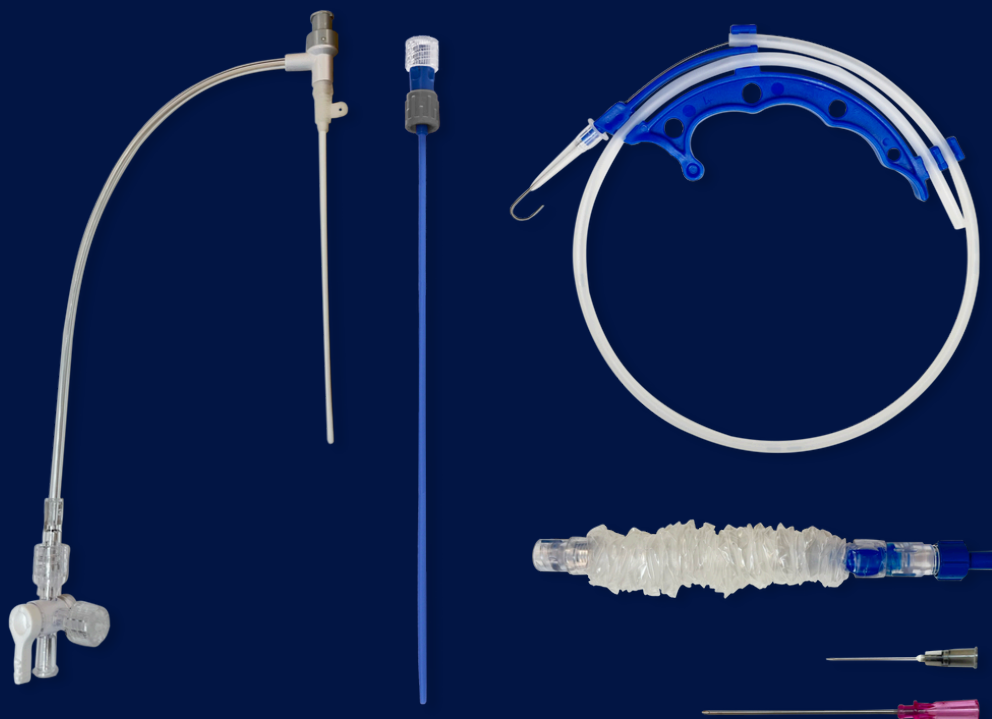



Introdutor Percutâneo

Biomedical

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
I5V10M110	01 Introdutor 5Fr x 10cm com válvula hemostática, torneirinha com luers e manga protetora; 01 Fio guia 035" x 50cm com dispensador; 01 dilatador de vaso; 01 agulha hipodérmica 0,7 X 30mm; 01 agulha 18ga x 7cm para introdução de fio guia.
I6V10M110	01 Introdutor 6Fr x 10cm com válvula hemostática, torneirinha com luers e manga protetora; 01 Fio guia 035" x 50cm com dispensador; 01 dilatador de vaso; 01 agulha hipodérmica 0,7 X 30mm; 01 agulha 18ga x 7cm para introdução de fio guia.

