

Sonda com Sistema Fechado

para Aspiração Traqueal Trifanz


Informações técnicas:

Indicada para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes em terapia intensiva ou qualquer situação onde há a necessidade de ventilação mecânica, permitindo a aspiração e ventilação concomitantes.

Fabricada em PVC de grau médico, graduada com manga em poliuretano, com sistema fechado para aspiração traqueal. Acompanha conector para fonte de vácuo, conector para ventilador, conector para sonda endotraqueal, via de administração de medicamentos, via de irrigação, válvula de isolamento e clipe.

Minimiza a exposição das vias aéreas e do profissional de saúde aos agentes infecciosos presentes nas secreções respiratórias. O produto vem acompanhado por adesivos coloridos para identificação do dia da semana em que o produto foi implantado.

É recomendado o uso por um curto período, até 72 horas.

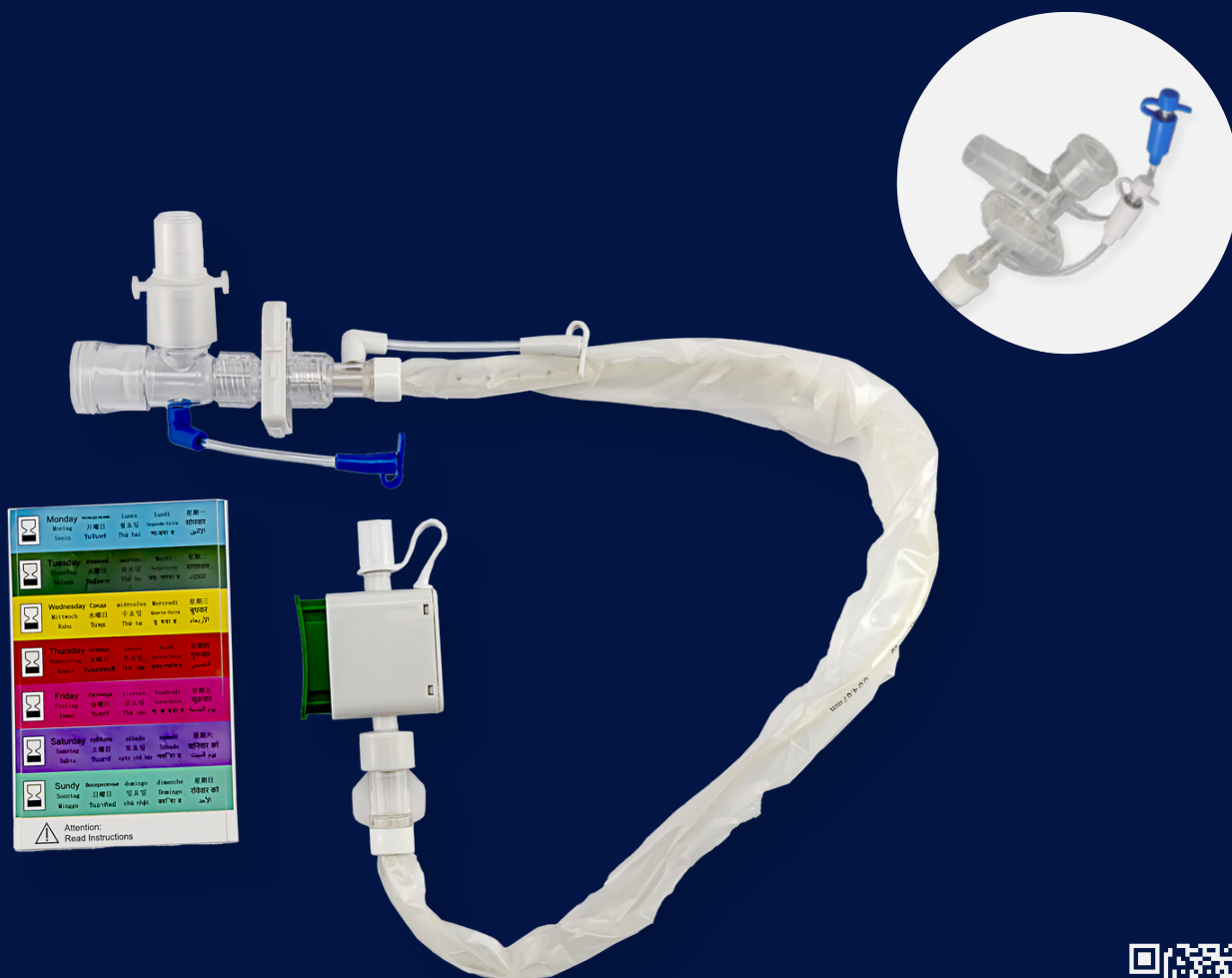

Sonda com Sistema Fechado

para Aspiração Traqueal Trifanz

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
98.09.040	Sonda 6 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.043	Sonda 8 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.046	Sonda 10 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.049	Sonda 12 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.052	Sonda 14 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.
98.09.055	Sonda 16 Fr com sistema fechado para aspiração traqueal.

