

# Sistema de Aspiração Traqueal


72h Medika

## Informações técnicas:

Indicado para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes em terapia intensiva ou qualquer situação em que há a necessidade de ventilação mecânica.

A sonda de aspiração traqueal está disponível nos diâmetros 10, 12, 14 e 16Fr x 300 e 600mm de comprimento, com marcas de graduação numéricas em sua extensão, translúcida, inserida em uma manga fina e resistente fabricada em poliuretano, evitando o contato direto do profissional ao sistema de aspiração. Possui via de administração de medicamento aerossóis (MDI), via de irrigação, trava antirefluxo, conexão dupla para ventilador e sonda endotraqueal ou de traqueostomia, botão controlador de vácuo, conector para fonte de vácuo e cunha para desconexão.

A utilização do sistema de aspiração traqueal é de curto prazo, até 72 horas.

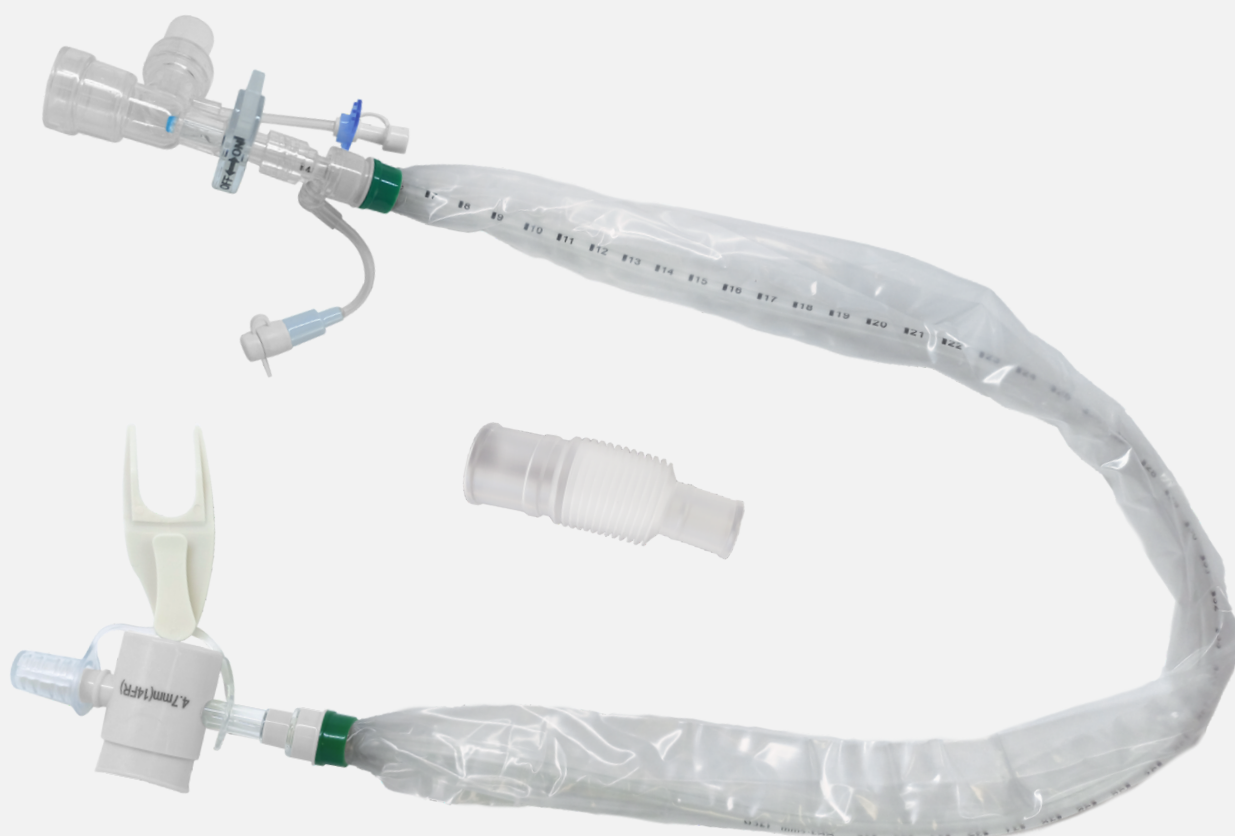

# Sistema de Aspiração Traqueal

72h Medika

## MODELO: TRAQUEOSTOMIA

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC-07240 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 10 Fr (3.35 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível. |
| MC-07241 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 12 Fr (4.05 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível. |
| MC-07242 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 14 Fr (4.75 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível. |
| MC-07243 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 16 Fr (5.45 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento e traquéia expansível. |

## MODELO: ENDOTRAQUEAL

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC-07250 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 10 Fr (3.35 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível. |
| MC-07251 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 12 Fr (4.05 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível. |
| MC-07252 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 14 Fr (4.75 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível. |
| MC-07253 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 16 Fr (5.45 mm) de diâmetro externo x 600 mm de comprimento e traquéia expansível. |





# Sistema de Aspiração Traqueal


Pediátrico 72h Medika

## Informações técnicas:

Indicado para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes pediátricos em terapia intensiva ou qualquer situação em que há a necessidade de ventilação mecânica.

A sonda de aspiração traqueal está disponível nos diâmetros 05, 06, 07 e 08Fr x 300mm de comprimento, possui marcas de graduação numéricas coloridas em sua extensão, translúcida, inserida em uma manga fina e resistente fabricada em poliuretano, evitando o contato direto do profissional ao sistema de aspiração. Possui via de irrigação, trava antirefluxo, conexões em Y nos tamanhos 3.5, 4.0 e 4.5mm dupla para ventilador e sonda endotraqueal, botão controlador de vácuo, conector para fonte de vácuo e cunha para desconexão.

A utilização do sistema de aspiração traqueal é de curto prazo, até 72 horas.

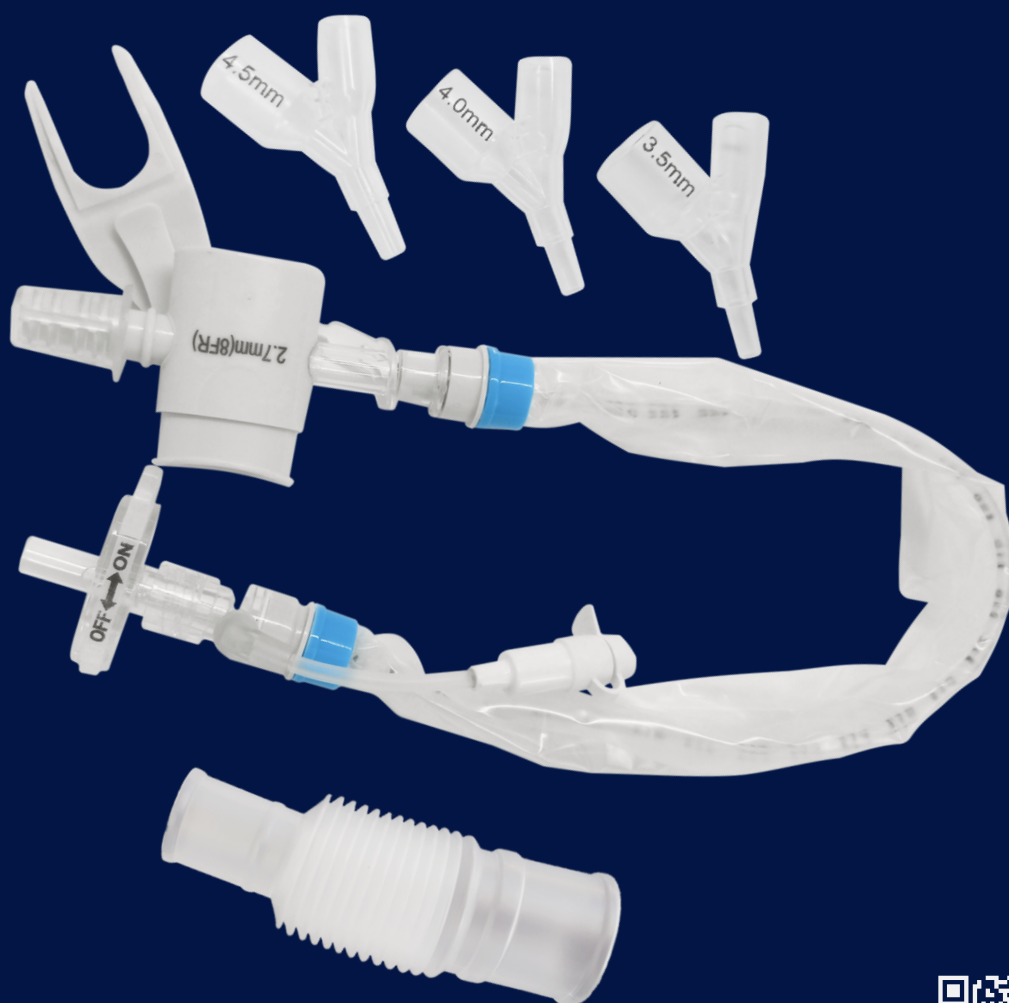

# Sistema de Aspiração Traqueal

Pediátrico 72h Medika

## Informações técnicas:

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC-02446 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 05 Fr (1.7 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento.<br><br>Conector Y 2.5 mm<br>Conector Y 3.0 mm<br>Conector Y 3.5 mm  |
| MC-02447 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 06 Fr (1.95 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento.<br><br>Conector Y 3.0 mm<br>Conector Y 3.5 mm<br>Conector Y 4.0 mm |
| MC-02448 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 07 Fr (2.3 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento.<br><br>Conector Y 3.5 mm<br>Conector Y 4.0 mm<br>Conector Y 4.5 mm  |
| MC-02449 | Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 08 Fr (2.7 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento.<br><br>Conector Y 3.5 mm<br>Conector Y 4.0 mm<br>Conector Y 4.5 mm  |

