

Sistema de Aspiração Traqueal


72h Pediátrico Medika

Informações técnicas:

Indicado para realizar aspirações de secreções traqueais em pacientes pediátricos em terapia intensiva ou qualquer situação em que há a necessidade de ventilação mecânica.

A sonda de aspiração traqueal está disponível nos diâmetros 05, 06, 07 e 08 Fr x 300 mm de comprimento, possui marcas de graduação numéricas coloridas em sua extensão, translúcida, inserida em uma manga fina e resistente fabricada em poliuretano, evitando o contato direto do profissional ao sistema de aspiração. Possui via de irrigação, trava antirrefluxo, conexões em Y nos tamanhos 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 e 4.5mm dupla para ventilador e sonda endotraqueal, botão controlador de vácuo, conector para fonte de vácuo e cunha para desconexão.

A utilização do sistema de aspiração traqueal é de curto prazo, até 72 horas.

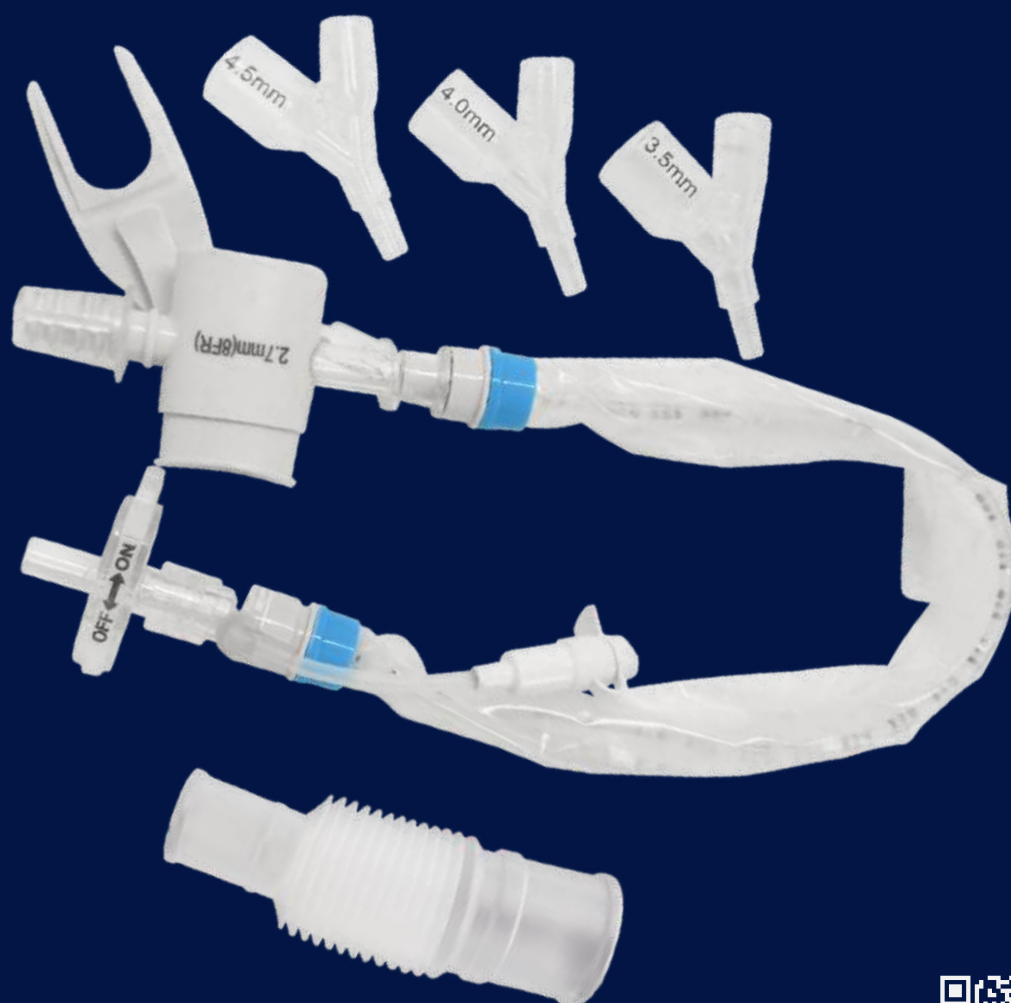

Sistema de Aspiração Traqueal

Pediátrico 72h Medika

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MC-02446	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 05 Fr (1.7 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 2.5 mm Conector Y 3.0 mm Conector Y 3.5 mm
MC-02447	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 06 Fr (1.95 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 2.5 mm Conector Y 3.0 mm Conector Y 3.5 mm
MC-02448	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 07 Fr (2.3 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 3.0 mm Conector Y 3.5 mm Conector Y 4.0 mm
MC-02449	Sistema fechado para aspiração traqueal 72 horas, com sonda 08 Fr (2.7 mm) de diâmetro externo x 300 mm de comprimento. Conector Y 3.5 mm Conector Y 4.0 mm Conector Y 4.5 mm

