

Cateter para punção periférica


Mini Midline Andemed

Informações técnicas:

O Mini Midline é um cateter de inserção periférica de posicionamento intermediário, cuja extremidade distal localiza-se no terço proximal do braço, permanecendo em território não central (sem atingir a veia cava superior).

Desenvolvido para terapias intravenosas de média duração – até 30 dias –, o Mini Midline é indicado como acesso venoso periférico para a administração de fluidos e/ou medicações intravenosas, além de permitir a coleta de amostras de sangue, apresentando-se como uma nova opção terapêutica no manejo do acesso venoso.


- Cateter destinado à implantação em rede venosa periférica, proporcionando acesso seguro e confiável para terapias intravenosas de média duração;
- Fabricado em poliuretano macio e radiopaco, o cateter está disponível nos calibres 3 Fr e 4 Fr, com comprimentos de 8 cm e 10 cm;
- O conjunto é pré-montado sobre agulha de punção (18G ou 20G x 3,6 cm), podendo ser fornecido com ou sem dispositivo de segurança, em conformidade com a NR-32;
- As veias recomendadas para inserção incluem: basilica, cefálica e cubital média.

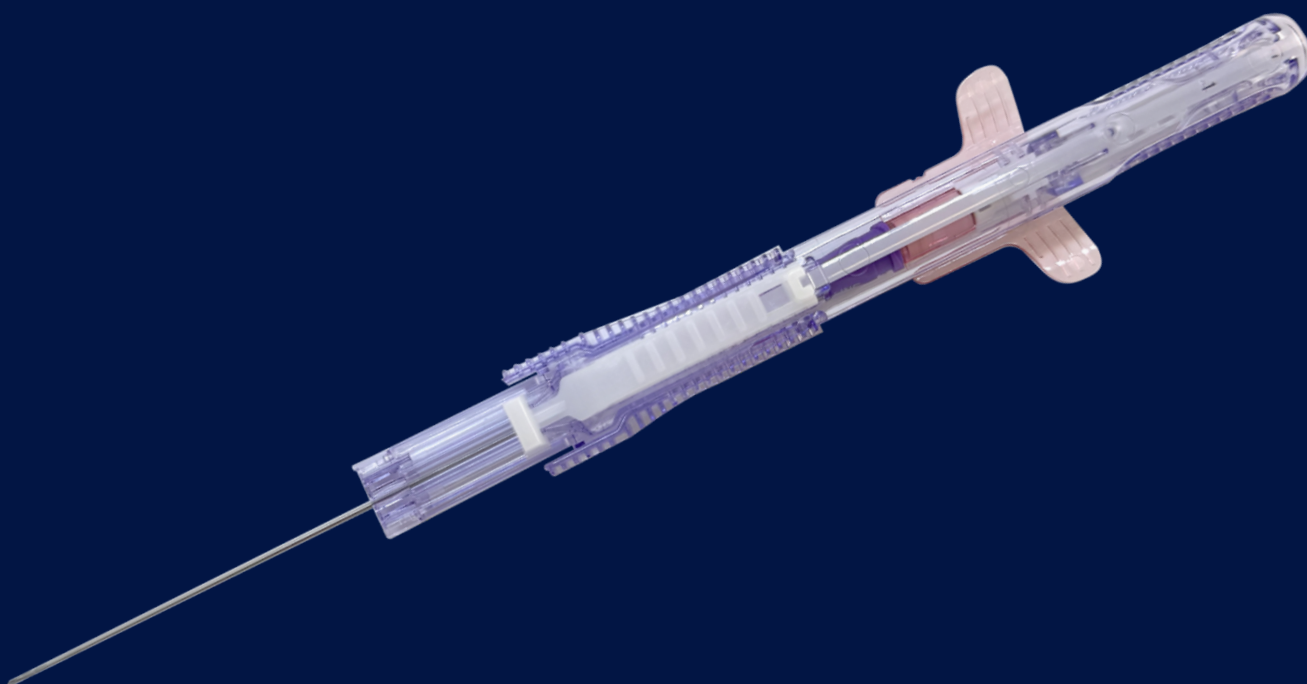



Cateter para punção periférica

Mini Midline Andemed

Informações técnicas:

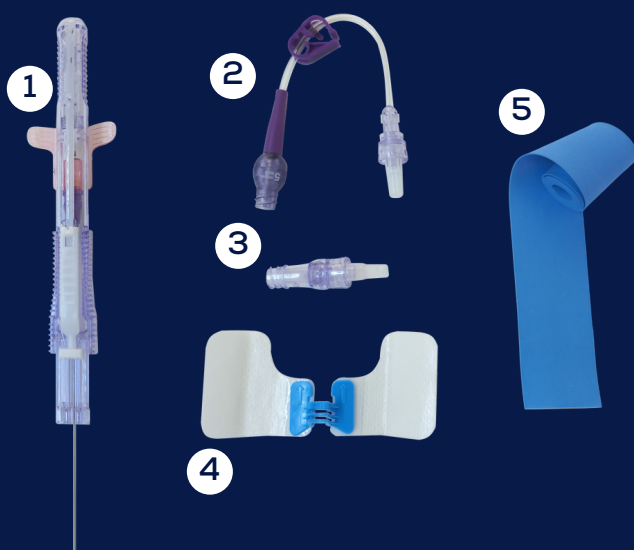

- 1 Cateter fabricado em poliuretano previamente montado sobre agulha de punção com empurrador e empunhadura peel away ou com empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm;
- 2 Extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima;
- 3 Conector valvulado;
- 4 Dispositivo adesivo para fixação do cateter;
- 5 Torniquete.

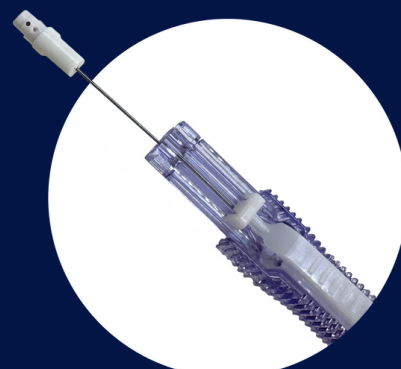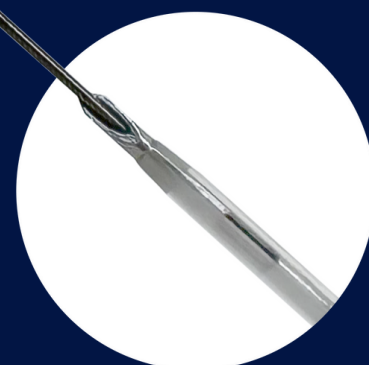

Cateter para punção periférica

Mini Midline Andemed

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
B300802	01 cateter fabricado em poliuretano 03 Fr x 08 cm; previamente montado sobre agulha de punção 20 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm; 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.
B301002	01 cateter fabricado em poliuretano 03 Fr x 10 cm; previamente montado sobre agulha de punção 20 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm; 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.
B400802	01 cateter fabricado em poliuretano 04 Fr x 08 cm; previamente montado sobre agulha de punção 18 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm. 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.
B401002	01 cateter fabricado em poliuretano 04 Fr x 10 cm; previamente montado sobre agulha de punção 18 G com empurrador e empunhadura desconectável com dispositivo de segurança 3,5 cm; 01 extensão com conectores luer lock, 5 ml/s de infusão máxima; 01 conector valvulado; 01 dispositivo adesivo para fixação do cateter; 01 torniquete.

