



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE **UROLOGIA**

Clearpetra | Introduutor sem Válvula

para Acesso Ureteral, Cistoscopia ou por Nefrostomia Percutânea

Informações técnicas:

Indicado para estabelecer um acesso via ureteral, bexiga ou renal para a passagem de ureteroscópios, cistoscópios, nefroscópios e outros dispositivos urológicos para o tratamento de cálculos urinários durante procedimentos urológicos endoscópicos.

Composto por uma bainha de aspiração fabricada em polietileno, graduado, com duas vias: uma para o obturador (já inserido no introduutor) e outra via oblíqua para a passagem de fragmentos do cálculo. Disponível para acesso ureteral, bexiga ou renal. Para utilizar a bainha de aspiração é necessário Tubo para Frasco Coletor de Cálculos Well Lead e Frasco Coletor de Cálculos Well Lead (vendidos separadamente).

- O sistema ClearPetra oferece vários benefícios, incluindo redução da pressão intraluminal, diminuição da retropulsão do cálculo, melhoria do campo visual e economia de tempo durante a operação;
- A redução no uso de acessórios adicionais de remoção de cálculos pode reduzir significativamente os custos gerais e proporcionar resultados eficientes nos procedimentos.

Para conhecer mais detalhes sobre este produto acesse nosso site exclusivo por meio do nosso QR Code ou acesse www.clearpetra.com.br



Clearpetra | Introduutor sem Válvula

para Acesso Ureteral, Cistoscopia ou por Nefrostomia Percutânea

INTRODUTOR SEM VÁLVULA PARA ACESSO URETERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U04A021013	01 Introduutor para acesso de ureteroscópio com 12 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 Obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021026	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 12 Fr de diâmetro externo x 26 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 26,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021036	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 12 Fr de diâmetro externo x 36 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 36,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021040	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 12 Fr de diâmetro externo x 40 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 40,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021046	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 12 Fr de diâmetro externo x 46 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 46,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021055	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 12 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 55,5 cm de comprimento.
U04A021113	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 13 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 11 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021126	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 13 Fr de diâmetro externo x 26 cm de comprimento; 01 obturador com 11 Fr de diâmetro externo x 26,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021136	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 13 Fr de diâmetro externo x 36 cm de comprimento; 01 obturador com 11 Fr de diâmetro externo x 36,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021140	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 13 Fr de diâmetro externo x 40 cm de comprimento; 01 obturador com 11 Fr de diâmetro externo x 40,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021146	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 13 Fr de diâmetro externo x 46 cm de comprimento; 01 obturador com 11 Fr de diâmetro externo x 46,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021155	01 introduutor para acesso de ureteroscópio com 13 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento; 01 obturador com 11 Fr de diâmetro externo x 55,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.



Clearpetra | Introduutor sem Válvula

para Acesso Ureteral, Cistoscopia ou por Nefrostomia Percutânea

INTRODUTOR SEM VÁLVULA PARA ACESSO URETERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U04A021213	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 14 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021226	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 14 Fr de diâmetro externo x 26 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 26,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021236	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 14 Fr de diâmetro externo x 36 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 36,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021240	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 14 Fr de diâmetro externo x 40 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 40,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021246	01 Introdutor para acesso de ureteroscópio com 14 Fr de diâmetro externo x 46 cm de comprimento; 01 Obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 46,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021255	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 14 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 55,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021313	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 15 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 13 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021326	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 15 Fr de diâmetro externo x 26 cm de comprimento; 01 obturador com 13 Fr de diâmetro externo x 26,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021336	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 15 Fr de diâmetro externo x 36 cm de comprimento; 01 obturador com 13 Fr de diâmetro externo x 36,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021340	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 15 Fr de diâmetro externo x 40 cm de comprimento; 01 obturador com 13 Fr de diâmetro externo x 40,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021346	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 15 Fr de diâmetro externo x 46 cm de comprimento; 01 obturador com 13 Fr de diâmetro externo x 46,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021355	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 15 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento; 01 obturador com 13 Fr de diâmetro externo x 55,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.



Clearpetra | Introduutor sem Válvula

para Acesso Ureteral, Cistoscopia ou por Nefrostomia Percutânea

INTRODUTOR SEM VÁLVULA PARA ACESSO URETERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U04A021413	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 16 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021426	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 16 Fr de diâmetro externo x 26 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 26,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021436	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 16 Fr de diâmetro externo x 36 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 36,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021440	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 16 Fr de diâmetro externo x 40 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 40,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021446	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 16 Fr de diâmetro externo x 46 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 46,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A021455	01 introdutor para acesso de ureteroscópio com 16 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 55,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.



Clearpetra | Introduutor sem Válvula

para Acesso Ureteral, Cistoscopia ou por Nefrostomia Percutânea

INTRODUTOR SEM VÁLVULA PARA ACESSO POR NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U04A011013	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 12 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011017	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 12 Fr de diâmetro externo x 17 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 17,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011021	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 12 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 10 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011213	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 14 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011217	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 14 Fr de diâmetro externo x 17 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 17,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011221	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 14 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 12 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011413	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 16 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011417	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 16 Fr de diâmetro externo x 17 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 17,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011421	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 16 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 14 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento.
U04A011613	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 18 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 16 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.



Clearpetra | Introduutor sem Válvula

para Acesso Ureteral, Cistoscopia ou por Nefrostomia Percutânea

INTRODUTOR SEM VÁLVULA PARA ACESSO POR NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U04A011617	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 18 Fr de diâmetro externo x 17 cm de comprimento; 01 obturador com 16 Fr de diâmetro externo x 17,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011621	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 18 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 16 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011813	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 20 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 18 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011817	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 20 Fr de diâmetro externo x 17 cm de comprimento; 01 obturador com 18 Fr de diâmetro externo x 17,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A011821	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 20 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 18 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A012013	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 22 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 20 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A012017	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 22 Fr de diâmetro externo x 17 cm de comprimento; 01 obturador com 20 Fr de diâmetro externo x 17,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A012021	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 22 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 20 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A012213	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 24 Fr de diâmetro externo x 13 cm de comprimento; 01 obturador com 22 Fr de diâmetro externo x 13,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A012217	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 24 Fr de diâmetro externo x 17 cm de comprimento; 01 obturador com 22 Fr de diâmetro externo x 17,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.
U04A012221	01 introdutor para acesso por nefrostomia percutânea com 24 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 22 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento; 01 tampa em silicone.



Clearpetra | Introdutor sem Válvula

para Acesso Ureteral, Cistoscopia ou por Nefrostomia Percutânea

INTRODUTOR SEM VÁLVULA PARA ACESSO POR CISTOSCOPIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U04A031821	01 introdutor para acesso por cistoscopia com 20 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 18 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento, ponta atraumática; 01 tampa em silicone.
U04A031824	01 introdutor para acesso por cistoscopia com 20 Fr de diâmetro externo x 24 cm de comprimento; 01 obturador com 18 Fr de diâmetro externo x 24,5 cm de comprimento, ponta atraumática; 01 tampa em silicone.
U04A032021	01 introdutor para acesso por cistoscopia com 22 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 20 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento, ponta atraumática; 01 tampa em silicone.
U04A032024	01 introdutor para acesso por cistoscopia com 22 Fr de diâmetro externo x 24 cm de comprimento; 01 obturador com 20 Fr de diâmetro externo x 24,5 cm de comprimento, ponta atraumática; 01 tampa em silicone.
U04A032221	01 introdutor para acesso por cistoscopia com 24 Fr de diâmetro externo x 21 cm de comprimento; 01 obturador com 22 Fr de diâmetro externo x 21,5 cm de comprimento, ponta atraumática; 01 tampa em silicone.
U04A032224	01 introdutor para acesso por cistoscopia com 24 Fr de diâmetro externo x 24 cm de comprimento; 01 obturador com 22 Fr de diâmetro externo x 24,5 cm de comprimento, ponta atraumática; 01 tampa em silicone.






Clearpetra

Tubo para Frasco Coletor de Cálculos Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para conectar-se ao Frasco Coletor de Cálculos Urinários Well Lead (vendido separadamente) em uma extremidade e à via oblíqua do introdutor ClearPetra (vendido separadamente) na outra extremidade. Fabricado em PVC, possui diâmetro externo de 13 ou 14 mm e comprimento de 70 cm.

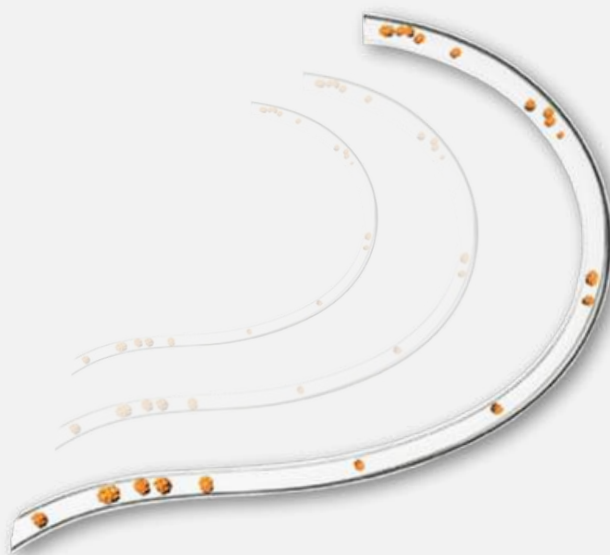

Para conhecer mais detalhes sobre este produto acesse nosso site exclusivo por meio do nosso QR Code ou acesse www.clearpetra.com.br



Clearpetra

Tubo para Frasco Coletor de Cálculos Well Lead

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
99379900	Tubo para conexão em frasco coletor de cálculos 13 mm x 70 cm
99379901	Tubo para conexão em frasco coletor de cálculos 14 mm x 70 cm



Clearpetra

Frasco Coletor de Cálculos Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para armazenar cálculos urinários aspirados por meio do introdutor ClearPetra (vendido separadamente). Fabricado em polipropileno, possui uma tampa com entrada para conexão ao aspirador e uma entrada com chave azul, para o Tubo Para Frasco Coletor De Cálculos Well Lead.

Para conhecer mais detalhes sobre este produto acesse nosso site exclusivo por meio do nosso QR Code ou acesse www.clearpetra.com.br



Clearpetra

Frasco Coletor de Cálculos Well Lead

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U04C010110	200ml x 10-22Fr
U04C010110	140ml x 10-22Fr
U04C010110	140ml x 24 e 26Fr






Sistema de Dilatadores Renais

Amplatz

Informações técnicas:

Indicado para uso em dilatação progressiva do trato urinário na nefrostomia percutânea. É utilizado para estabelecer um canal durante os procedimentos endoscópicos urológicos para facilitar a passagem dos endoscópios e outros instrumentos.

O sistema é composto por 12 tubos dilatadores, projetados com elementos radiopacos para fornecer uma visualização melhor durante o processo de inserção, sendo 6 dilatadores faciais e 6 dilatadores renais, um cateter introdutor e 4 bainhas Amplatz.

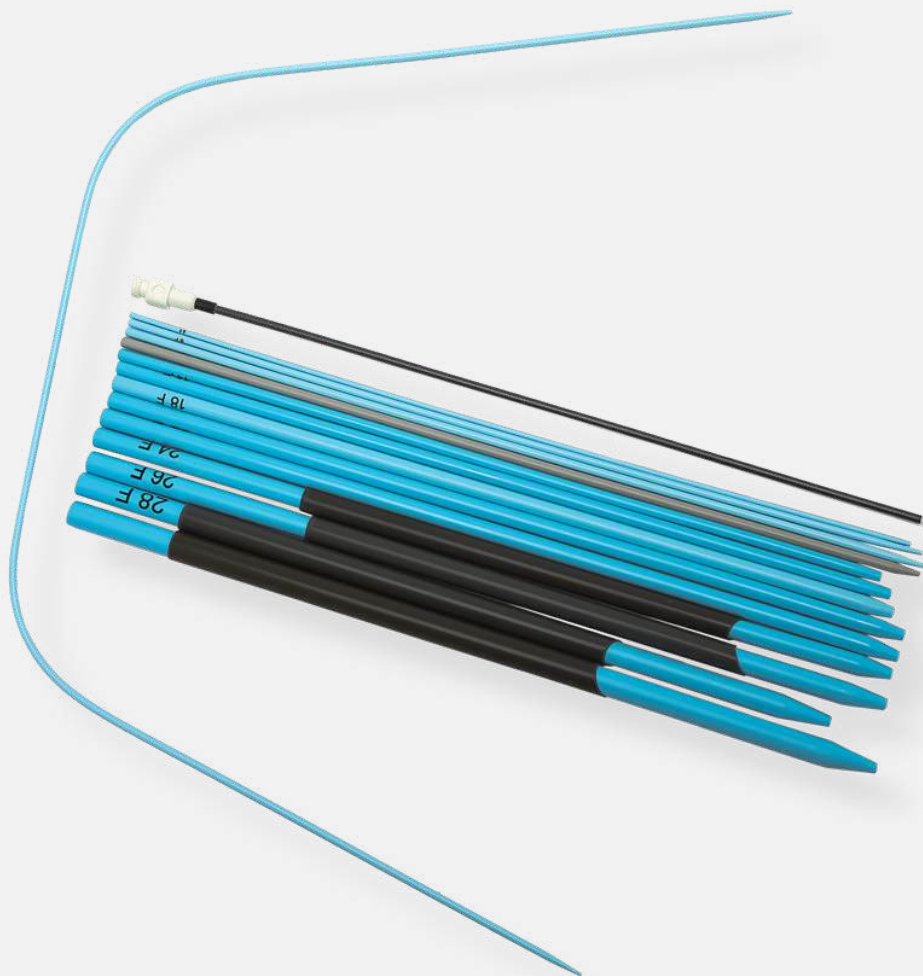

Sistema de Dilatadores Renais

Amplatz

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SDRAP	Dilatadores Faciais, de 8, 10, 12, 14, 16 e 18 Fr com 20cm de comprimento; Dilatadores Renais, de 20, 24, 26, 28 e 30 Fr com 30 cm de comprimento; 01 Cateter introdutor para dilatadores, de 8 FR x 70 cm; Bainha Amplatz de 17 cm de comprimento para dilatarores de 24, 26, 28 e 30 Fr.



Conjunto de Dilatadores

para Cateter Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para a dilatação na nefrostomia percutânea.

O sistema é composto por 6 dilatadores, fabricados em Polietileno, radiopacos para fornecer uma visualização melhor durante o processo de inserção. Ponta afunilada, utilizando uma sequência de dilatadores que variam em tamanho, começando pelo dilatador de diâmetro menor e progredindo gradualmente até o de diâmetro maior, buscando expandir o lúmen da nefrostomia. Além disso, o sistema também inclui dois introdutores do tipo Peel away.



Conjunto de Dilatadores

para Cateter Well Lead

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U03A020110	06 Dilatadores, sendo: 08, 10, 12, 14, 16, 18Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 16, 18Fr x 18,5 cm.
U03A020210	06 Dilatadores, sendo: 10, 12, 14, 16, 18, 20Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 18, 20Fr x 18,5 cm.
U03A020310	06 Dilatadores, sendo: 12, 14, 16, 18, 20, 22Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 20, 22Fr x 18,5 cm.
U03A020410	06 Dilatadores, sendo: 14, 16, 18, 20, 22, 24Fr x 20,5 cm; 02 Introdutores Peel away, sendo: 22, 24Fr x 18,5 cm.




Introdutor Ureteral

sem Válvula Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para acessar o trato urinário em procedimentos endoscópicos urológicos, facilitando a passagem de endoscópios e outros instrumento. Além de proporcionar dilatação ureteral e um canal de trabalho contínuo.

Fabricado em mola de aço inoxidável, radiopaco, revestido externamente em poliamida e hidrofílico internamente. Com obturador e ponta afunilada para facilitar a introdução. Com conector disponível em três tamanhos diferentes, 10, 12 e 14 Fr, com comprimentos de 20, 28, 35, 45 e 55 cm.

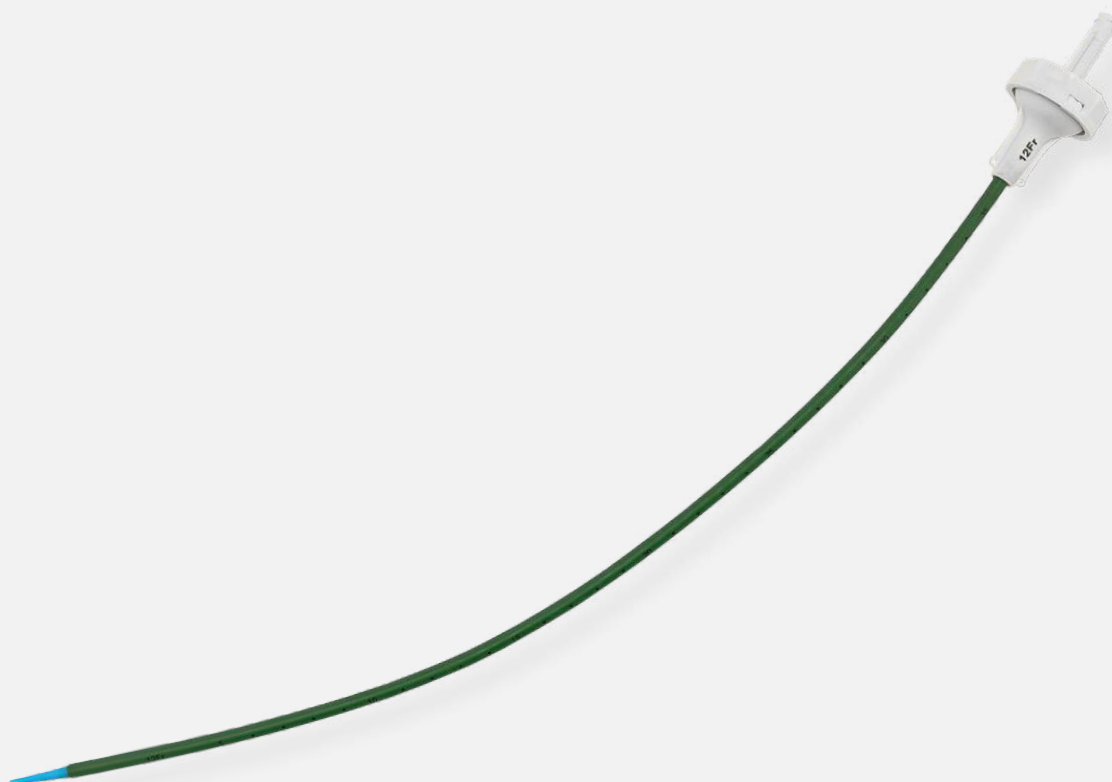

Introdutor Ureteral

sem Válvula Well Lead

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U03B011020	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 20 cm de comprimento; 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 25 cm de comprimento, ponta afunilada.
U03B011028	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 28 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 33 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011035	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 35 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 40 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011045	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 45 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 50 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011055	01 introdutor ureteral 10 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento 01 obturador 3,3 mm de diâmetro externo x 60 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011220	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 20 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 25 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011228	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 28 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 33 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011235	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 35 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 40 de comprimento, ponta afunilada
U03B011245	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 45 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 50 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011255	01 introdutor ureteral 12 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento 01 obturador 4,0 mm de diâmetro externo x 60 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011420	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 20 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 25 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011428	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 28 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 33 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011435	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 35 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 40 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011445	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 45 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 50 cm de comprimento, ponta afunilada
U03B011455	01 introdutor ureteral 14 Fr de diâmetro externo x 55 cm de comprimento 01 obturador 4,7 mm de diâmetro externo x 60 cm de comprimento, ponta afunilada



Introdutor Ureteral

sem Válvula para Cateter Medika

Informações técnicas:

Indicado para acessar o trato urinário em procedimentos endoscópicos urológicos, facilitando a passagem de endoscópios e outros instrumentos. Além de proporcionar dilatação ureteral e um canal de trabalho contínuo.

Fabricado em mola de aço inoxidável, radiopaco, revestido externamente em PEBAX e PTFE internamente. Com obturador e ponta afunilada para facilitar a introdução. Com conector disponível nos tamanhos: 8, 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 Fr de diâmetro interno, com comprimentos de 130, 200, 280, 350, 450 e 550 mm.



Introdutor Ureteral

sem Válvula para Cateter Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
UAS23	3,65mm (11Fr)	4,30	450

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO DO INTRODUTOR (Fr)	DIÂMETRO EXTERNO DO INTRODUTOR (Fr)	COMPRIMENTO DO INTRODUTOR (cm)
UA-8Fr/130	8	10	13
UA-8Fr/200	8	10	20
UA-8Fr/280	8	10	28
UA-8Fr/350	8	10	35
UA-8Fr/450	8	10	45
UA-8Fr/550	8	10	55
UA-8.5Fr/130	8.5	10.5	13
UA-8.5Fr/200	8.5	10.5	20
UA-8.5Fr/280	8.5	10.5	28
UA-8.5Fr/350	8.5	10.5	35
UA-8.5Fr/450	8.5	10.5	45
UA-8.5Fr/550	8.5	10.5	55
UA-9Fr/130	9	11	13
UA-9Fr/200	9	11	20
UA-9Fr/280	9	11	28
UA-9Fr/350	9	11	35
UA-9Fr/450	9	11	45
UA-9Fr/550	9	11	55
UA-9.5Fr/130	9.5	11.5	13
UA-9.5Fr/200	9.5	11.5	20
UA-9.5Fr/280	9.5	11.5	28
UA-9.5Fr/350	9.5	11.5	35
UA-9.5Fr/450	9.5	11.5	45



Introdutor Ureteral

sem Válvula para Cateter Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO DO INTRODUTOR (Fr)	DIÂMETRO EXTERNO DO INTRODUTOR (Fr)	COMPRIMENTO DO INTRODUTOR (cm)
UA-9.5Fr/550	9.5	11.5	55
UA-10Fr/130	10	12	13
UA-10Fr/200	10	12	20
UA-10Fr/280	10	12	28
UA-10Fr/350	10	12	35
UA-10Fr/450	10	12	45
UA-10Fr/550	10	12	55
UA-10.7Fr/130	10.7	12.7	13
UA-10.7Fr/200	10.7	12.7	20
UA-10.7Fr/280	10.7	12.7	28
UA-10.7Fr/350	10.7	12.7	35
UA-10.7Fr/450	10.7	12.7	45
UA-10.7Fr/550	10.7	12.7	55
UA-11Fr/130	11	13	13
UA-11Fr/200	11	13	20
UA-11Fr/280	11	13	28
UA-11Fr/350	11	13	35
UA-11Fr/450	11	13	45
UA-11Fr/550	11	13	55
UA-12Fr/130	12	14	13
UA-12Fr/200	12	14	20
UA-12Fr/280	12	14	28
UA-12Fr/350	12	14	35



Introdutor Ureteral

sem Válvula para Cateter Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO DO INTRODUTOR (Fr)	DIÂMETRO EXTERNO DO INTRODUTOR (Fr)	COMPRIMENTO DO INTRODUTOR (cm)
UA-12Fr/450	12	14	45
UA-12Fr/550	12	14	55
UA-13Fr/130	13	15	13
UA-13Fr/200	13	15	20
UA-13Fr/280	13	15	28
UA-13Fr/350	13	15	35
UA-13Fr/450	13	15	45
UA-13Fr/550	13	15	55
UA-14Fr/130	14	16	13
UA-14Fr/200	14	16	20
UA-14Fr/280	14	16	28
UA-14Fr/350	14	16	35
UA-14Fr/450	14	16	45
UA-14Fr/550	14	16	55



Fio Guia Hidrofílico

Tianck Medical

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos e gastroenterológicos.

Possui haste em Nitinol, um material que contém a capacidade de recuperar a forma original mesmo após sofrer deformações, tubo externo em poliuretano termoplástico, revestido em PVP, substância que proporciona a característica hidrofílica ao fio, permitindo-o deslizar com facilidade através de instrumentos e cateteres de uso não vascular. Possui ponta radiopaca disponível nos modelos reta ou em jota.



Fio Guia Hidrofílico

Tianck Medical

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL RETA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155024	0.025	150
155026	0.025	180
156024	0.028	150
156026	0.028	180
157024	0.032	150
157026	0.032	180
158024	0.035	150
158026	0.035	180
159024	0.038	150
159026	0.038	180

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL EM JOTA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155023	0.025	150
155025	0.025	180
156023	0.028	150
156025	0.028	180
157023	0.032	150
157025	0.032	180
158023	0.035	150
158025	0.035	180
159023	0.038	150
159025	0.038	180




Fio Guia Teflonado

Tianck Medical

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos e gastroenterológicos.

Fabricado em aço inoxidável e revestido em PTFE, uma substância que oferece uma passagem suave do fio pelo canal de trabalho ou cateter. Possui ponta radiopaca disponível nos modelos reta ou em joga.

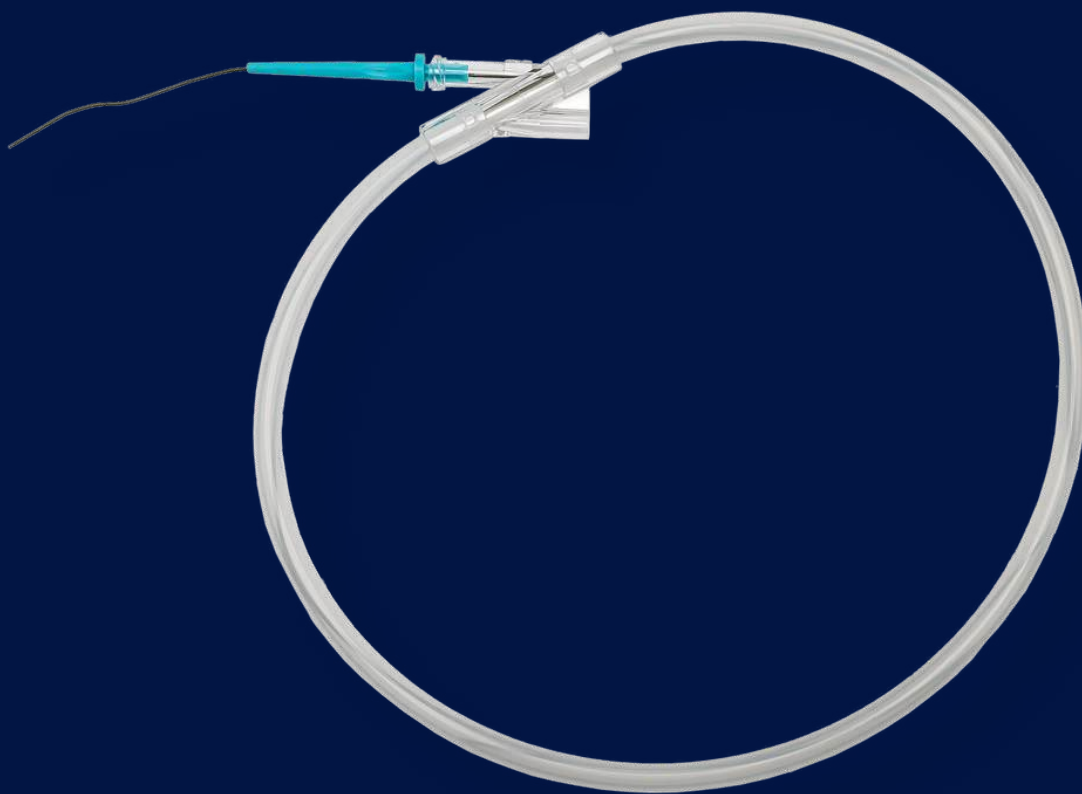

Fio Guia Teflonado

Tianck Medical

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL RETA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155038	0.025	150
155040	0.025	180
155042	0.025	260
157038	0.032	150
157040	0.032	180
157042	0.032	260
158038	0.035	150
158040	0.035	180
158042	0.035	260
159038	0.038	150
159040	0.038	180
159042	0.038	260

MODELO: EXTREMIDADE DISTAL EM JOTA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
155037	0.025	150
155039	0.025	180
155041	0.025	260
157037	0.032	150
157039	0.032	180
157041	0.032	260
158037	0.035	150
158039	0.035	180
158041	0.035	260
159037	0.038	150
159039	0.025	180
159041	0.025	260




Guia Metálico

para Introdução de Cateteres Multiflex

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos.

Fabricado em aço inoxidável AISI 304, com revestimento em PTFE, substância que proporciona suavidade do fio ao passar pelo canal de trabalho ou cateter. Extremidade distal fabricada em Nitinol com revestimento em polímero hidrofílico. Disponível nos modelos com ponta reta ou em jota.

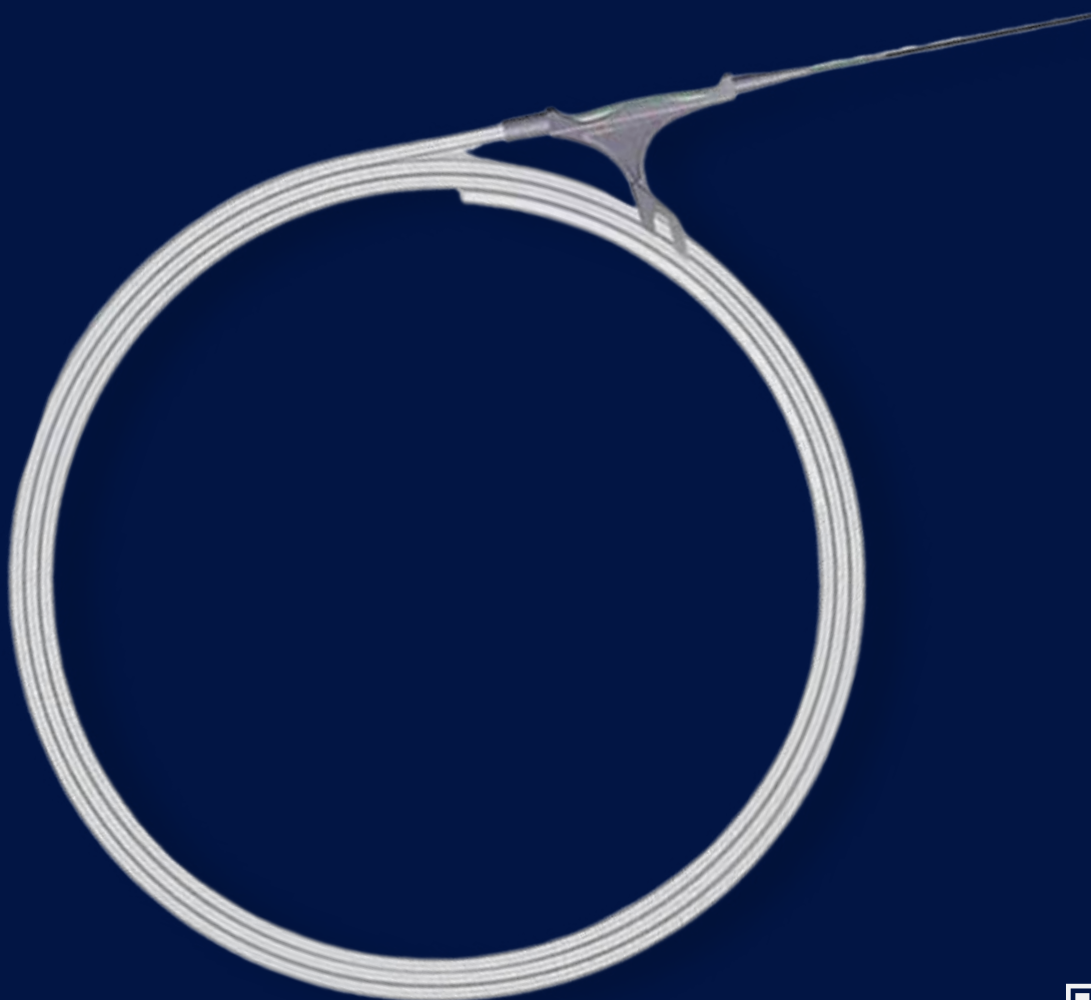

Guia Metálico

para Introdução de Cateteres Multiflex

PONTA RETA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2714	Guia metálico para introdução de cateteres, fabricado em aço inoxidável AISI 304 e revestido em PTFE, 0.035"x 150 cm, com extremidade distal reta com 05 cm de comprimento fabricada em Nitinol e revestimento hidrofílico.

PONTA EM JOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2716	Guia metálico para introdução de cateteres, fabricado em aço inoxidável AISI 304 e revestido em PTFE, 0.035"x 150 cm, com extremidade distal em jota com 05 cm de comprimento fabricada em Nitinol e revestimento hidrofílico.



Cateter para Drenagem Externa

com Acessórios Tianck

Informações técnicas:

Indicado para drenar derrames, exsudato ou gás do corpo humano.

Fabricado em poliuretano, possui extremidade distal em formato pigtail, com quatro orifícios e um fio para auxiliar na formação do pigtail. Além disso, é acompanhado por uma variedade de acessórios essenciais para a realização do procedimento com segurança e precisão.





Cateter para Drenagem Externa

com Acessórios Tianck

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
215001	01 cateter em poliuretano 08 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 06 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 08 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 10 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.
215002	01 cateter em poliuretano 10 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 08 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 10 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 12 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.



Cateter para Drenagem Externa

com Acessórios Tianck

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
215003	01 cateter em poliuretano 12 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 10 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 12 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 14 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.
215004	01 cateter em poliuretano 14 Fr x 30 cm com extremidade distal pigtail; 01 guia metálico 0.035" x 80 cm com extremidade distal em jota; 01 agulha introdutora 18G x 20 cm com mandril; 01 agulha introdutora Chiba 22G x 20 cm; 01 obturador 1,3 mm; 01 dilatador percutâneo 12 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 14 Fr x 20 cm; 01 dilatador percutâneo 16 Fr x 20 cm; 01 tubo de extensão para drenagem 30 cm; 01 cabo de bisturi com lâmina; 01 torneira de três vias; 01 disco de fixação do cateter com presilha.




Cateter para Drenagem Renal

Uromed

Informações técnicas:

Indicado para uso percutâneo nos tratamentos da hidronefrose, estenose ureteral, obstrução por cálculo renal, carcinoma ureteral, carcinoma de bexiga, obstrução ureteral e outras anomalias do trato urinário.

Fabricado em silicone puro macio, radiopaco, o cateter é graduado e possui um balão em silicone. A extremidade distal é aberta, sem orifícios laterais. Acompanha guia metálico, quatro dilatadores, introdutor Peel away e uma cânula de punção.

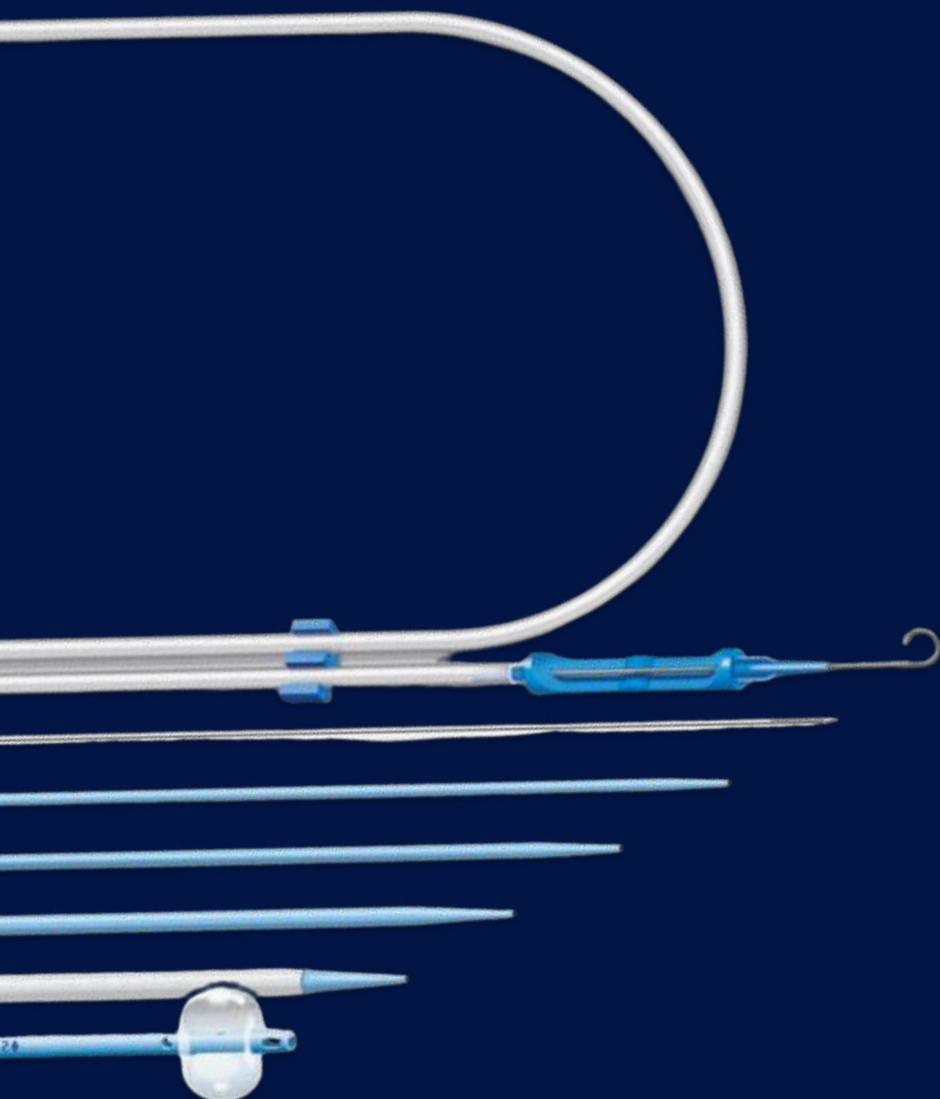

Cateter para Drenagem Renal

Uromed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
2608	01 cateter para drenagem renal	10 Fr	43 cm
	01 guia metálico	0.035"	90 cm
	01 cânula de punção	17,5 G	18 cm
	03 dilatadores percutâneos	08, 09 e 10 Fr	20 cm
	01 introdutor Peel away	11 Fr	15 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
2603	01 cateter para drenagem renal	12 Fr	43 cm
	01 guia metálico	0.035"	90 cm
	01 cânula de punção	17,5 G	18 cm
	03 dilatadores percutâneos	07, 09 e 11 Fr	20 cm
	01 introdutor Peel away	13 Fr	15 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
2604	01 cateter para drenagem renal	14 Fr	43 cm
	01 guia metálico	0.035"	90 cm
	01 cânula de punção	17,5 G	18 cm
	03 dilatadores percutâneos	07, 09 e 11 Fr	20 cm
	01 introdutor Peel away	15 Fr	15 cm



Sonda Uretral para Drenagem

Externa Duas Vias com Balão Fortune

Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostra urinária, medição de volume residual, instilação de contraste, alívio de obstrução infravesical, drenagem da bexiga em pós-operatório, monitoramento preciso do volume urinário, auxiliar no tratamento de disfunção vesical neurogênica e incontinência urinária.

Fabricada em silicone médico transparente, radiopaca, com balão em sua extremidade distal. Ponta fechada ou Tiemann, em silicone, graduada, flexível e confortável para o paciente. Acompanha tampa protetora exclusiva para esta sonda.



Sonda Uretral para Drenagem

Externa Duas Vias com Balão Fortune

MODELO: SONDA COM DUAS VIAS PONTA FECHADA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	VOLUME DO BALÃO
1821-0506	06 Fr	330 mm	1 a 1,5 ml
1821-0508	08 Fr	330 mm	2 a 3 ml
1821-0510	10 Fr	330 mm	3 a 5 ml
1822-0512	12 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1822-0514	14 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1822-0516	16 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1822-0518	18 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1822-0520	20 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1822-0522	22 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1822-0524	24 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1822-0526	26 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1823-0514	14 Fr	420 mm	20 a 30 ml
1823-0516	16 Fr	420 mm	20 a 30 ml
1823-0518	18 Fr	420 mm	20 a 30 ml
1823-0520	20 Fr	420 mm	20 a 30 ml
1823-0522	22 Fr	420 mm	20 a 30 ml
1823-0524	24 Fr	420 mm	20 a 30 ml
1823-0526	26 Fr	420 mm	20 a 30 ml
1824-0512	12 Fr	220 mm	5 a 10 ml
1824-0514	14 Fr	220 mm	5 a 10 ml
1824-0516	16 Fr	220 mm	5 a 10 ml
1824-0518	18 Fr	220 mm	5 a 10 ml
1824-0520	20 Fr	220 mm	5 a 10 ml
1824-0520	22 Fr	220 mm	5 a 10 ml
1824-0524	24 Fr	220 mm	5 a 10 ml
1824-0526	26 Fr	220 mm	5 a 10 ml



Sonda Uretral para Drenagem

Externa Duas Vias com Balão Fortune

MODELO: Sonda com Duas Vias Ponta Tiemann

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	VOLUME DO BALÃO
1856-0210	10 Fr	420 mm	3 a 5 ml
1856-0212	12 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1856-0214	14 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1856-0216	16 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1856-0218	18 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1856-0220	20 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1856-0522	22 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1856-0524	24 Fr	420 mm	5 a 10 ml
1856-0526	26 Fr	420 mm	5 a 10 ml




Válvula de Drenagem Externa

Uromed

Informações técnicas:

Indicada para controle do fluxo de drenagem urinária.

Fabricada em ABS Lustran, possui uma conexão universal para sistemas de drenagem em silicone. Formato ergonômico, é móvel, leve, macia. Além disso, possui um dispositivo de controle do fluxo de drenagem, que pode ser manipulado facilmente com apenas uma das mãos.

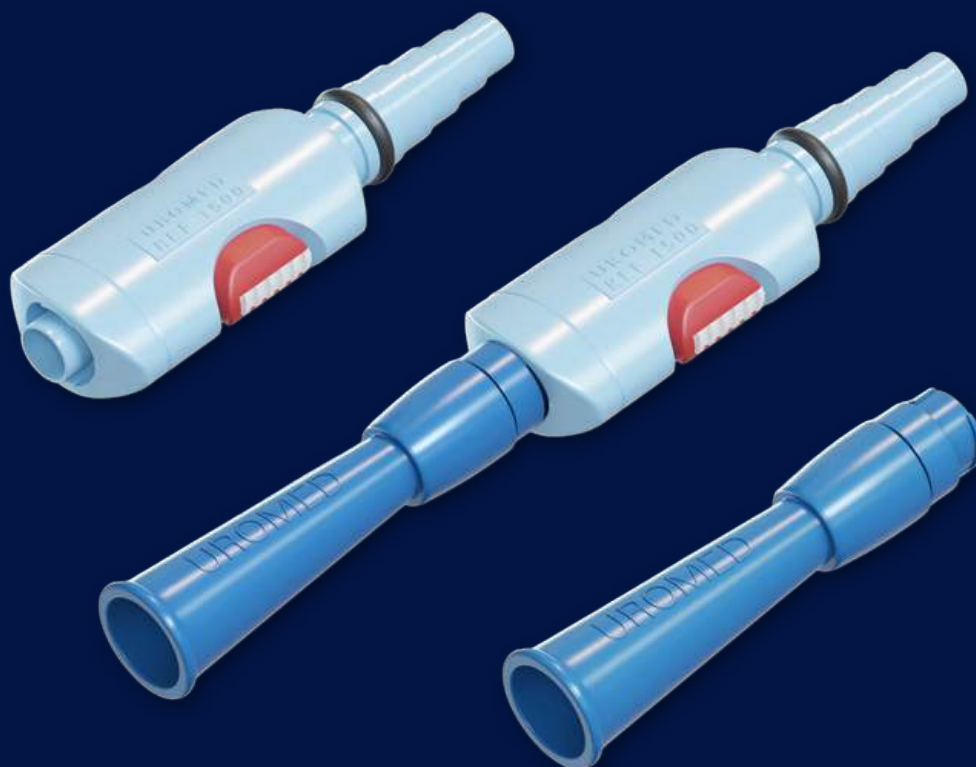

Válvula de Drenagem Externa

Uromed

CÓDIGO	MODELO
1501.	Válvula para drenagem externa Uromed

Cânula para Punção Percutânea

Uromed

Informações técnicas:

Indicada para aspiração e ou infusão percutânea em órgãos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, trefilado, a cânula apresenta extremidade distal ecogênica, permitindo o acompanhamento da punção por meio de ultrassom e conexão luer lock na extremidade proximal.



Cânula para Punção Percutânea

Uromed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2610	01 Cânula de punção percutânea em aço inoxidável 17G de diâmetro externo x 19,5 cm de comprimento.

Cateter Ureteral Duplo

Rabo de Porco Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para drenagem urinária interna temporária da junção ureteropélvica para a bexiga. Com permanência de até 29 dias.

Fabricado em poliuretano, atraumático, radiopaco, graduado, em suas extremidades com ponta aberta-aberta ou aberta-fechada, com perfurações em sua extensão, fácil de manusear e possui baixo índice de incrustação. Acompanha um empurrador de 40 cm e uma pinça plástica.



Cateter Ureteral Duplo

Rabo de Porco Well Lead

MODELO COM AS DUAS EXTREMIDADES ABERTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U05A302426	01 cateter em poliuretano 4 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A303126	01 cateter em poliuretano 4,6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302526	01 cateter em poliuretano 5 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302626	01 cateter em poliuretano 6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302726	01 cateter em poliuretano 7 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302826	01 cateter em poliuretano 8 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.

MODELO COM UMA EXTREMIDADE ABERTA E UMA FECHADA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
U05A300426	01 cateter em poliuretano 4 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A301126	01 cateter em poliuretano 4,6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A300526	01 cateter em poliuretano 5 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A300626	01 cateter em poliuretano 6 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A302026	01 cateter em poliuretano 7 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
U05A300826	01 cateter em poliuretano 8 Fr x 26 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.



Cateter com Cesto

para Remoção de Cálculos KFF MED

Informações técnicas:

Indicado para captura e eliminação de cálculos presentes nas vias urinárias ou biliares por meio de um canal de um endoscópio rígido ou flexível.

Fabricado em ABS, a empunhadura ergonômica é projetada para permitir que o profissional utilize apenas uma mão durante o procedimento. Além disso, possui um mecanismo que limita a força de tensão, garantindo a integridade do cateter e segurança na extração do cálculo. Ao girar a empunhadura, é possível ajustar o cesto com precisão, controlando sua rotação. A haste do cateter é fabricada em poliamida, macia, flexível e resistente a dobras. O cesto é radiopaco, composto por quatro fios em Nitinol, projetado sem bordas afiadas. Sua composição proporciona resistência e assegura uma excelente estabilidade de pressão ao capturar o cálculo. Disponível nos formatos sem ponta, com ponta e helicoidal com ponta.



Cateter com Cesto

para Remoção de Cálculos KFF MED

MODELO: CESTO RETO COM PONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
NT-24F90R-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 2,4 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios retos de Nitinol, com ponta.
NT-24F120R-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 2,4 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios retos de Nitinol, com ponta.
NT-3F90R-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios retos de Nitinol, com ponta.
NT-3F120R-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios retos de Nitinol, com ponta.
NT-4F90R-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 4,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios retos de Nitinol, com ponta.
NT-4F120R-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 4,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios retos de Nitinol, com ponta.

MODELO: CESTO HELICOIDAL COM PONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
NT-24F90H-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 2,4 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol, com ponta.
NT-24F120H-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 2,4 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol, com ponta.
NT-3F90H-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol, com ponta.
NT-3F120H-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol, com ponta.
NT-4F90H-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 4,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol, com ponta.
NT-4F120H-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 4,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol, com ponta.



Cateter com Cesto

para Remoção de Cálculos KFF MED

MODELO: CESTO SEM PONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SP-19120H-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 1,9 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol, sem ponta.
SP-24F90R-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 2,4 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol, sem ponta.
SP-3F90H-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol, sem ponta.
SP-3F120H-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol, sem ponta.
SP-4F90H-PI	Cateter em poliamida, 90 cm de comprimento x 4,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol, sem ponta.
SP-4F120H-PI	Cateter em poliamida, 120 cm de comprimento x 4,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol, sem ponta.



Cateter Ureteral com Cesto

para Remoção de Cálculos New Stonizer

Informações técnicas:

Indicado para captura e eliminação de cálculos presentes nas vias urinárias, por meio de um canal de um ureterorrenoscópio.

Fabricado em polioximetileno, a empunhadura ergonômica é projetada para permitir que o profissional utilize apenas uma mão durante o procedimento. Além disso, possui um mecanismo que limita a força de tensão, garantindo a integridade do cateter e segurança na extração do cálculo. Ao girar a empunhadura, é possível ajustar o cesto com precisão, controlando sua rotação. A haste do cateter é fabricada em aço inoxidável, revestido em Teflon, radiopaco e macio.

O cesto fabricado com 04 fios em Nitinol, que se estendem da empunhadura até o cesto, proporcionando uma estrutura contínua, sem qualquer risco de separação entre a haste e o cesto. Além disso, não apresenta bordas afiadas, garantindo total segurança durante o procedimento. Flexível, permitindo manobras precisas, enquanto a sua radiopacidade facilita a visualização durante os exames de imagem. Resistente e com grande estabilidade de pressão na apreensão do cálculo. Disponível nos formatos com ponta e helicoidal com ponta, ambos com diâmetro de 15 mm.



Cateter Ureteral com Cesto

para Remoção de Cálculos New Stonizer

MODELO: CESTO COM PONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
74259015	Cateter ureteral em aço inoxidável, revestido em PTFE, 90 cm de comprimento x 2,5 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol com ponta e 15 mm de diâmetro.
74309015	Cateter ureteral em aço inoxidável, revestido em PTFE, 90 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios de Nitinol com ponta e 15 mm de diâmetro.

MODELO: CESTO HELICOIDAL COM PONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
75309015	Cateter ureteral em aço inoxidável, revestido em PTFE, 90 cm de comprimento x 3,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol com ponta e 15 mm de diâmetro.
75409015	Cateter ureteral em aço inoxidável, revestido em PTFE, 90 cm de comprimento x 4,0 Fr de diâmetro, com cesto de 04 fios helicoidais de Nitinol com ponta e 15 mm de diâmetro.




Cateter Ureteral Duplo

Rabo de Porco com Guia Hidrofílico Tianck

Informações técnicas:

Indicado para drenagem urinária interna temporária da junção ureteropélvica para a bexiga. Com permanência de até 29 dias.

Fabricado em poliuretano, atraumático, radiopaco, graduado, com perfurações em sua extensão. Fácil de manipular e com baixo índice de incrustação. Acompanha 1 empurrador de 45 cm de comprimento, 1 pinça plástica e 1 fio guia metálico em nitinol, hidrofílico, ponta reta, 0.032"x 120 cm.

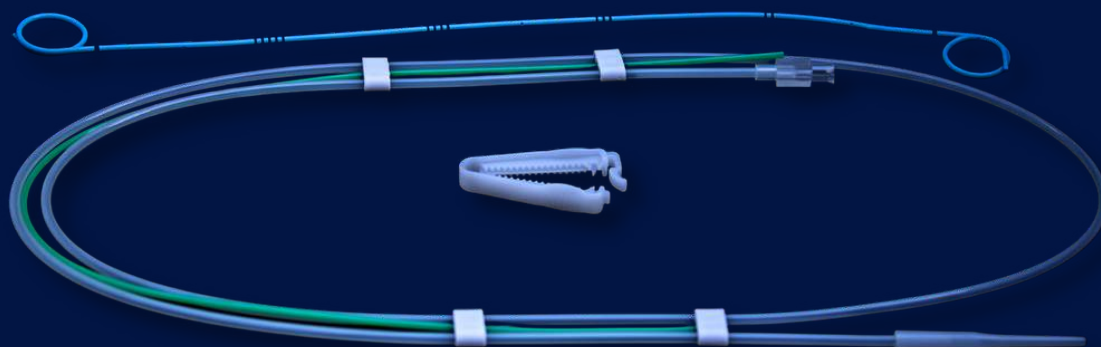

Cateter Ureteral Duplo

Rabo de Porco com Guia Hidrofílico Tianck

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
092002-3-B	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 4,5 Fr x 26 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092002-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 4,5 Fr x 28 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092003-3-B	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 4,7 Fr x 26 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092003-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 4,7 Fr x 28 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092004-3-B	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 4,8 Fr x 26 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092004-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 4,8 Fr x 28 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092005-3-B	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 5 Fr x 26 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092005-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 5 Fr x 28 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092006-3-B	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 6 Fr x 26 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.



Cateter Ureteral Duplo

Rabo de Porco com Guia Hidrofílico Tianck

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
092006-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 6 Fr x 28 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092007-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 7 Fr x 26 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092007-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 7 Fr x 28 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092008-3-B	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 8 Fr x 26 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.
092008-3	01 cateter em poliuretano duplo rabo de porco 8 Fr x 28 cm; 01 guia metálico hidrofílico 0.032"x 120 cm; 01 empurrador; 01 pinça plástica.

Cateter Ureteral

Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para a drenagem de urina no ureter, para a instilação de contraste em técnicas radiológicas intervencionistas para diagnósticos por imagem do trato urinário.

Fabricado em PVC, graduado, radiopaco, com conector, disponível nos tamanhos 4.0, 4.8, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 e 10 Fr, com comprimento de 70 cm. Possui extremidade distal aberta, aberta flexível, afunilada com um orifício lateral e cônica.



Cateter Ureteral

Well Lead

PONTA ABERTA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U06A040411	04 Fr x 70 cm
U06A040511	05 Fr x 70 cm
U06A040611	06 Fr x 70 cm
U06A040711	07 Fr x 70 cm
U06A040811	08 Fr x 70 cm

PONTA AFUNILADA E UM ORIFÍCIO LATERAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U06A070411	04 Fr x 70 cm
U06A070511	05 Fr x 70 cm
U06A070611	06 Fr x 70 cm
U06A070711	07 Fr x 70 cm
U06A070811	08 Fr x 70 cm

PONTA ABERTA FLEXÍVEL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U06A050411	04 Fr 70 cm
U06A050511	05 Fr 70 cm
U06A050611	06 Fr 70 cm
U06A050711	07 Fr 70 cm
U06A050811	08 Fr 70 cm

PONTA CÔNICA

CÓDIGO	TAMANHO
U06A080111	04.8/8 Fr x 70 cm
U06A080211	06/10 Fr x 70 cm



Cateter Duplo

Rabo de Porco Towers

Informações técnicas:

Indicado para drenagem urinária interna temporária da junção ureteropélvica para a bexiga. Com permanência de até 29 dias.

Fabricado em poliuretano termoplástico, fino, flexível, radiopaco, graduado a cada 5 cm, com um formato especial triangulado que permite a drenagem tanto por dentro do cateter quanto por fora, com extremidade aberta-aberta e aberta-fechada.



Cateter Duplo

Rabo de Porco Towers

MODELO COM AS DUAS EXTREMIDADES ABERTAS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U05A042726	7 Fr x 26 cm
U05A042728	7 Fr x 28 cm

MODELO COM UMA EXTREMIDADE ABERTA E UMA FECHADA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U05A040726	7 Fr x 26 cm
U05A040728	7 Fr x 28 cm



Cateter Balão de Dilatação

Ureteral Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para a dilatação transluminal na estenose ureteral e na dilatação ureteral anterior à ureteroscopia ou manipulação de cálculos. O balão é capaz de suportar uma pressão de ruptura de até 20 Atm.

Fabricado em nylon com conexão luer lock em duas vias, 6 Fr x 85 cm de comprimento, com balão em nylon. Para facilitar a visualização de sua posição, o balão possui marcadores em platina tanto na extremidade distal quanto na proximal. Disponível nos diâmetros do balão, 4,0, 5,0, 6,0; 7,0, 8,0 e 10 mm por 40, 60 e 100 mm.



Cateter Balão de Dilatação

Ureteral Well Lead

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO DO CATETER	COMPRIMENTO DO CATETER	DIÂMETRO EXTERNO DO BALÃO	COMPRIMENTO DO BALÃO
U02C014110	06 Fr	85 cm	40 mm	4 mm
U02C014210	06 Fr	85 cm	60 mm	4 mm
U02C014310	06 Fr	85 cm	100 mm	4 mm
U02C015110	06 Fr	85 cm	40 mm	5 mm
U02C015210	06 Fr	85 cm	60 mm	5 mm
U02C015310	06 Fr	85 cm	100 mm	5 mm
U02C016110	06 Fr	85 cm	40 mm	6 mm
U02C016210	06 Fr	85 cm	60 mm	6 mm
U02C016310	06 Fr	85 cm	100 mm	6 mm
U02C017110	06 Fr	85 cm	40 mm	7 mm
U02C017210	06 Fr	85 cm	60 mm	7 mm
U02C017310	06 Fr	85 cm	100 mm	7 mm
U02C018110	06 Fr	85 cm	40 mm	8 mm
U02C018210	06 Fr	85 cm	60 mm	8 mm
U02C018310	06 Fr	85 cm	100 mm	8 mm
U02C011110	06 Fr	85 cm	40 mm	10 mm
U02C011210	06 Fr	85 cm	60 mm	10 mm
U02C011310	06 Fr	85 cm	100 mm	10 mm



Cânula Flexível

para Injeção Uroject

Informações técnicas:

Indicada para realizar uma injeção de toxina botulínica na parede da bexiga em pacientes com bexiga hiperativa idiopática e hiperatividade neurogênica do detrusor.

Fabricada em poliamida, ela apresenta diâmetro externo de 5 Fr e comprimento de 650 mm. A extremidade proximal possui conexão luer lock e a extremidade distal é equipada com 1 agulha de 27 G, com 5 mm de comprimento externo. Além disso, possui um priming de 0,64 ml. Essa cânula é adequada para ser utilizada tanto em cistoscópios flexíveis quanto rígidos, servindo como canal de trabalho eficiente.



Cateter Duplo Lúmen

para Urodinâmica Well Lead

Informações técnicas:

Indicado para cistometria, perfilometria uretral, teste de pressão-fluxo e urofluxometria.

O estudo urodinâmico baseia-se nos princípios da mecânica dos fluidos, utilizando sensores para investigar a fisiologia do processamento e liberação de urina, bem como doenças relacionadas a esse processo.

Fabricado em poliuretano, fino, flexível, radiopaco, graduado a cada centímetro, com diâmetro externo de 6, 7 e 8 Fr e comprimento de 40 e 43 cm. Possui extremidade distal atraumática fechada, além de dois orifícios laterais, podendo ser reta ou em formato de Pigtail.

Uma via do cateter é conectada ao sensor de pressão e outra via é conectada a um dispositivo de irrigação.



Cateter Duplo Lúmen

para Urodinâmica Well Lead

PONTA PIGTAIL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U08A020610	6Fr x 43cm
U08A020810	8Fr x 43cm

PONTA RETA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
U08A010610	6Fr x 40cm
U08A010710	7Fr x 40cm
U08A010810	8Fr x 40cm



Cateter para Cistometria

Uromed

Informações técnicas:

Indicado para a avaliação da função vesical e do canal uretral quanto à capacidade, sensibilidade, acomodação, contratilidade, controle vesical e resposta vesical às drogas.

Fabricado em poliuretano, radiopaco, graduado, a versão pode ser de duplo lúmen para medição transuretral da pressão na bexiga ou triplo lúmen para medição transuretral da pressão na bexiga e no canal uretral. Possui extremidade distal cilíndrica com ponta reta ou Pigtail, além de orifícios externos.



Cateter para Cistometria

Uromed

PONTA RETA	
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
2922	Duplo lúmen, 7 e 9 Fr x 40 cm.
2923	Duplo lúmen, 7 e 9 Fr x 20 cm.
2932	Triplo lúmen, 7 e 9 Fr x 40 cm.
2933	Triplo lúmen, 7 e 9 Fr x 20 cm.

PONTA PIGTAIL	
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
292201	Duplo lúmen, 7 x 40 cm.


Cateter para Cistostomia

Uromed Cyst

Informações técnicas:

Indicado para o tratamento da obstrução da bexiga, distúrbios neurológicos da micção, cirurgia de bexiga ou de uretra, controle específico da micção, inflamação e/ou distúrbios da próstata /uretra, priapismo.

Fabricado em silicone puro, macio, radiopaco, com balão em silicone de 5 ml, extremidade distal aberta reta, atraumática, com orifícios laterais. Acompanha cânula de punção Peel away em aço inoxidável, para a implantação percutânea e conector para bolsa de drenagem.

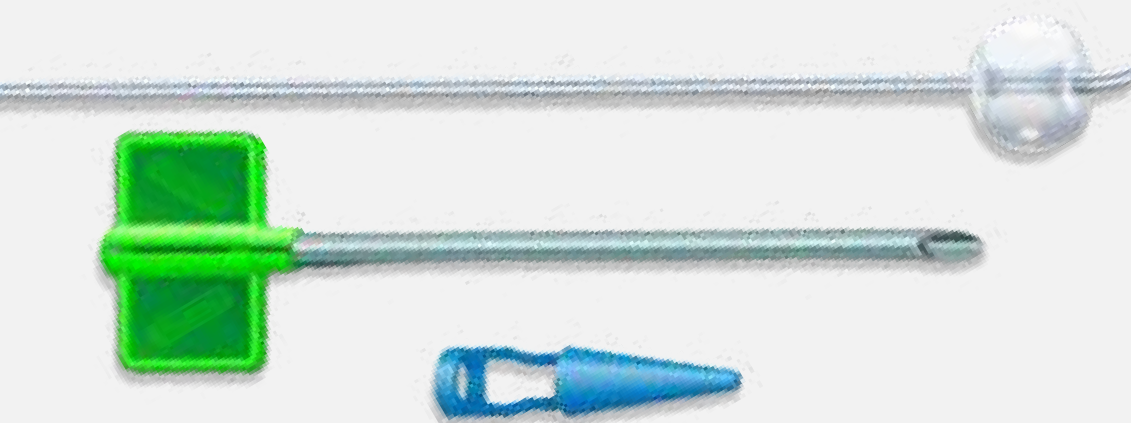

Cateter para Cistostomia

Uromed Cyst

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
3020	01 cateter para cistostomia em silicone, com balão de 05 ml, 12 Fr x 43 cm; 01 cânula de punção Peel away 13,8 Fr x 12 cm; 01 conector para bolsa de drenagem.
3025	01 cateter cistostomia em silicone, com balão de 05 ml, 14 Fr x 43 cm; 01 cânula de punção Peel away 16,8 Fr x 12 cm; 01 conector para bolsa de drenagem.



Sistema de Cateter

para Cistostomia Fortune

Informações técnicas:

Indicado para o tratamento da obstrução da bexiga, distúrbios neurológicos da micção, cirurgia de bexiga ou de uretra, controle específico da micção, inflamação e/ou distúrbios da próstata /uretra, priapismo.

Fabricado em silicone puro macio, radiopaco, com balão integrado em sua extremidade distal, extremidade distal aberta reta, com orifícios laterais. Acompanha tampa protetora, cânula de punção Peel away, para a implantação percutânea e uma pinça. O balão integrado cria uma superfície lisa, completa e macia, reduzindo a fricção na cânula de punção, o trauma, o desconforto na introdução/retirada da sonda e o acúmulo de sedimento ao redor do balão.

O produto é livre de DEHP (di(2-etilhexil) ftalato) e BPA(Bisfenol A).



Sistema de Cateter

para Cistostomia Fortune

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
4890-9212	01 cateter para cistostomia em silicone 12 Fr x 420 mm de comprimento; 01 balão de 05 a 10ml com ponta reta, com cânula de punção Peel away de 13 Fr; 01 pinça; 01 tampa protetora de cateter.
4890-9214	01 cateter para cistostomia em silicone 14 Fr x 420 mm de comprimento; 01 balão de 05 a 10ml com ponta reta, com cânula de punção Peel away de 15 Fr; 01 pinça; 01 tampa protetora de cateter.





www.medika.com.br