


Cateter para Drenagem Renal

Uromed

Informações técnicas:

Indicado para uso percutâneo nos tratamentos da hidronefrose, estenose ureteral, obstrução por cálculo renal, carcinoma ureteral, carcinoma de bexiga, obstrução ureteral e outras anomalias do trato urinário.

Fabricado em silicone puro macio, radiopaco, o cateter é graduado e possui um balão em silicone. A extremidade distal é aberta, sem orifícios laterais. Acompanha guia metálico, quatro dilatadores, introdutor Peel away e uma cânula de punção.

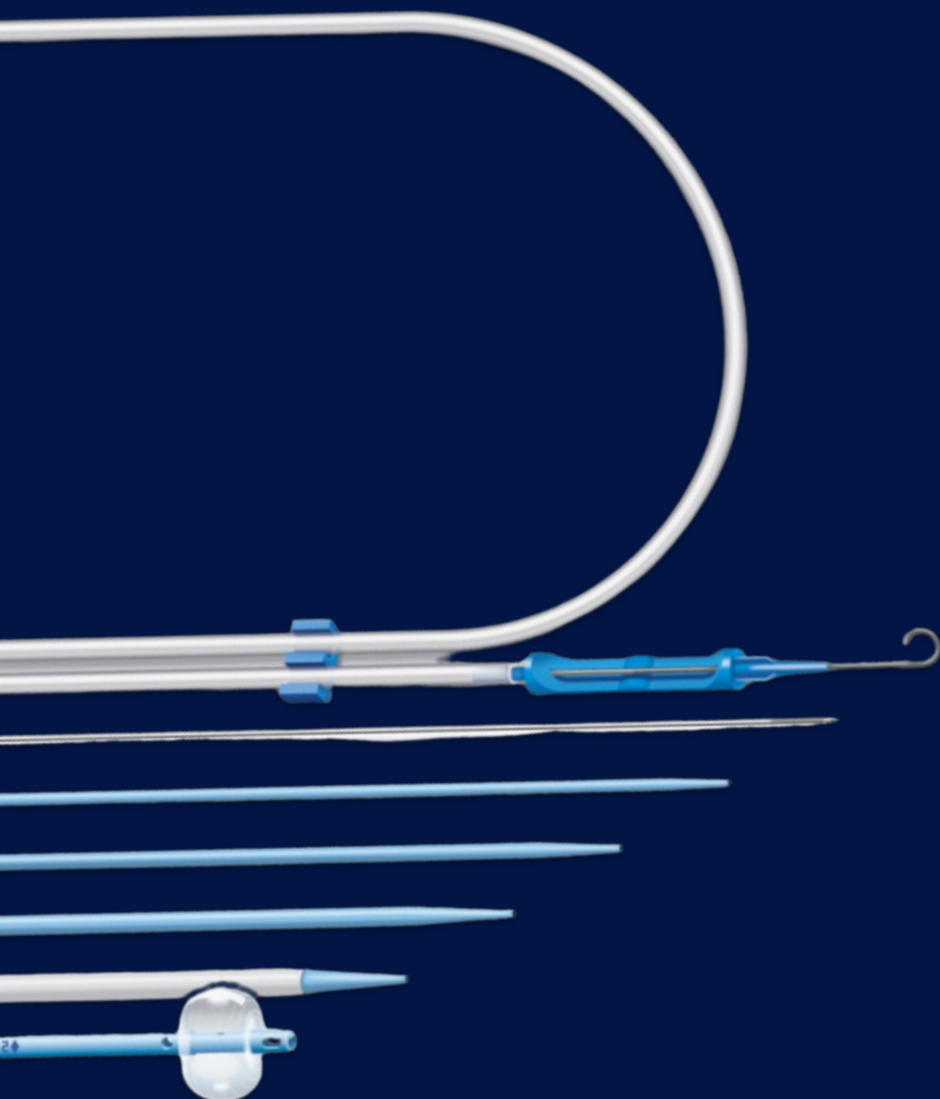

Cateter para Drenagem Renal

Uromed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
2608	01 cateter para drenagem renal	10 Fr	43 cm
	01 guia metálico	0.035"	90 cm
	01 cânula de punção	17,5 G	18 cm
	03 dilatadores percutâneos	08, 09 e 10 Fr	20 cm
	01 introdutor Peel away	11 Fr	15 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
2603	01 cateter para drenagem renal	12 Fr	43 cm
	01 guia metálico	0.035"	90 cm
	01 cânula de punção	17,5 G	18 cm
	03 dilatadores percutâneos	07, 09 e 11 Fr	20 cm
	01 introdutor Peel away	13 Fr	15 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
2604	01 cateter para drenagem renal	14 Fr	43 cm
	01 guia metálico	0.035"	90 cm
	01 cânula de punção	17,5 G	18 cm
	03 dilatadores percutâneos	07, 09 e 11 Fr	20 cm
	01 introdutor Peel away	15 Fr	15 cm

