




Cânula para Irrigação e Sucção

com Mangueira Lagis

Informações técnicas:

Indicada para lavar os tecidos e aspirar resíduos em procedimentos endoscópicos, como a cirurgia laparoscópica.

A cânula é fabricada em aço inoxidável com 5 mm de diâmetro, contendo 8 orifícios em sua extremidade distal. Conecta-se a uma empunhadura feita de policarbonato através de rosqueamento. A empunhadura possui uma válvula acionada por uma mola e um tampão (pistão). Além disso, a empunhadura é conectada a uma mangueira dupla de PVC, com 2,72 metros de comprimento, que possui uma conexão universal para sistemas de drenagem e também permite a conexão a duas bolsas de infusão.

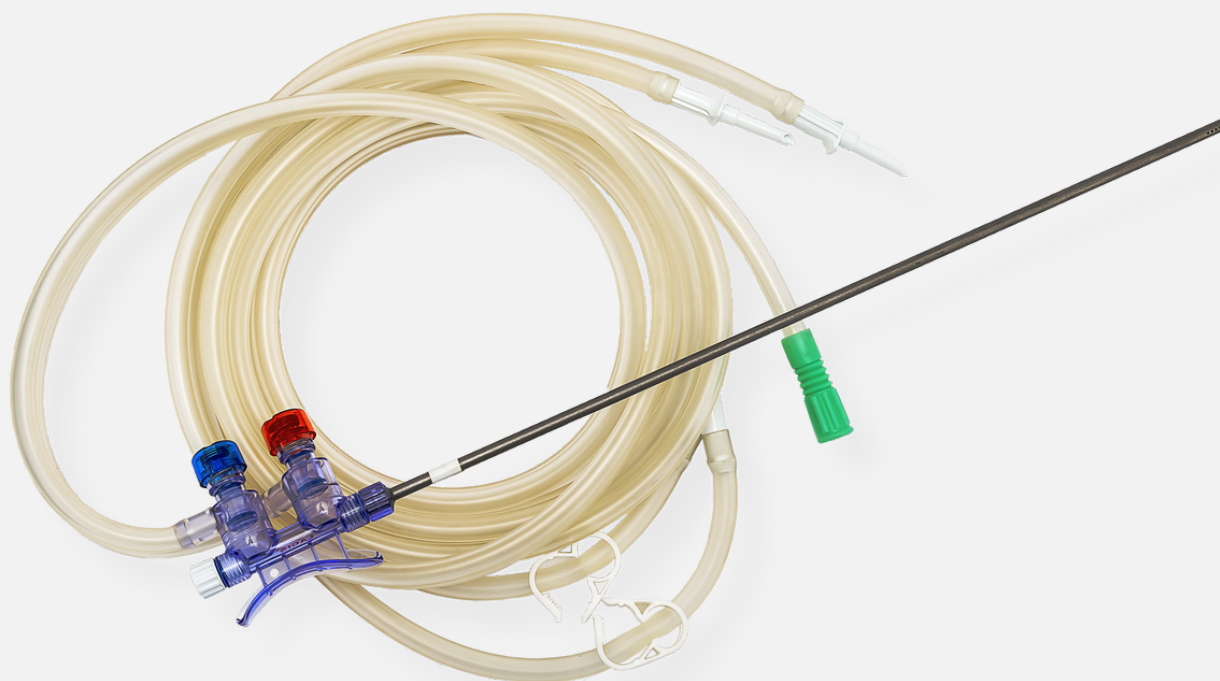



Cânula para Irrigação e Sucção

com Mangueira Lagis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SI320CT	Cânula para irrigação e sucção 05 mm de diâmetro x 320 mm de comprimento Lagis, com mangueira em PVC para conexão em 02 bolsas.
SI360CT	Cânula para irrigação e sucção 05 mm de diâmetro x 360 mm de comprimento Lagis, com mangueira em PVC para conexão em 02 bolsas.

