




Manipulador Uterino

Clearview Total

Informações técnicas:

Indicado para procedimentos laparoscópicos nos quais é necessário delinear o fórnix vaginal, para remover ou obter acesso ao tecido intraperitoneal, através da vagina, por uma colpotomia ou culdotomia. Também é útil na manipulação uterina durante a histerectomia vaginal laparoscopicamente assistida, histerectomias laparoscópicas totais e na histerectomia laparoscópica supracervical, ao mesmo tempo em que é mantido pneumoperitônio através do bloqueio da vagina durante a realização da colpotomia.

- Fabricado em polibutileno tereftalato (PTB), descartável, consiste em uma única estrutura com um botão de controle que permite a rotação da ponta proporcionando até 120° de anteversão e 90° de retroversão. Além disso, possui um balão macio em silicone para fixar o manipulador na cavidade uterina e um balão de oclusão em poliuretano, que é responsável pela manutenção do pneumoperitônio;
- Válvula de insuflação e uma extensão com conexão luer lock para infusão de contraste;
- Ponta distal atraumática com 2 orifícios laterais e um central;
- Sonda dilatadora fabricada em policarbonato, graduada e com duas extremidades 3,0 e 5,5 mm de diâmetro;
- Espaçador fabricado em policarbonato, utilizado de acordo com a necessidade, para otimizar a adaptação do Clearview em anatomias uterinas menores;
- Acompanha 3 copos de colpotomia, que são utilizados para delinear o fórnix vaginal e melhorar a visibilidade durante a colpotomia, permitindo que o profissional escolha o tamanho mais adequado. Podem ser utilizados na presença de bisturis eletrocirúrgicos e harmônicos;
- Acompanha duas seringas de 60ml e de 12ml não destinadas para uso hipodérmico.

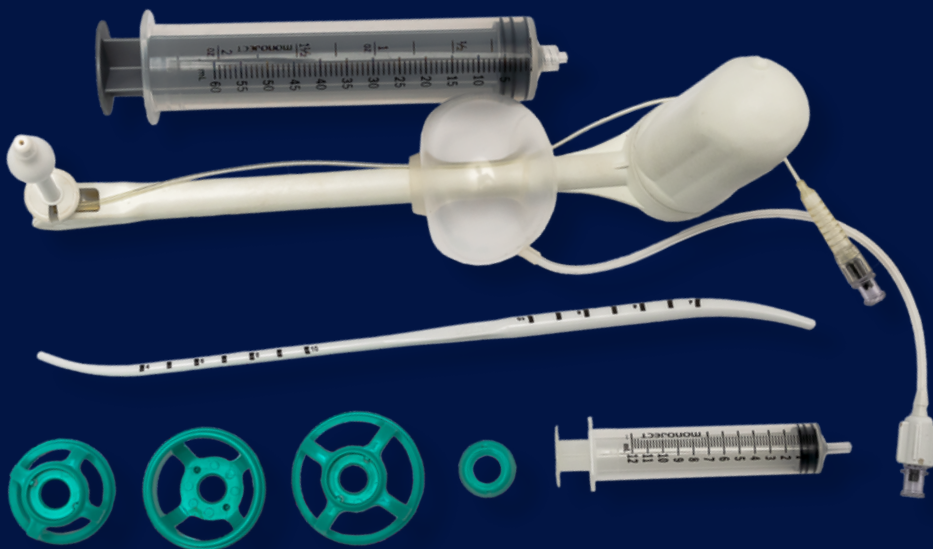



Manipulador Uterino

Clearview Total

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UM750	01 Manipulador uterino descartável, extremidade distal com 07 cm de comprimento e 10 ml de volume do balão da ponta; 01 Sonda dilatadora; 01 Seringa para insuflação do balão de 60 ml; 03 Copos para colpotomia com 3,0; 3,5 e 4,0 cm respectivamente; 01 Espaçador; 01 Seringa para insuflação do balão da ponta de 12 ml.
UM950	01 Manipulador uterino descartável, extremidade distal com 09 cm de comprimento e 10 ml de volume do balão da ponta; 01 Sonda dilatadora; 01 Seringa para insuflação do balão de 60 ml; 03 Copos para colpotomia com 3,0; 3,5 e 4,0 cm respectivamente; 01 Espaçador; 01 Seringa para insuflação do balão da ponta de 12 ml.

