





Manipulador Uterino

Clearview

Informações técnicas:

Indicado para a manipulação uterina durante a laparoscopia diagnóstica e cirúrgica, minilaparotomia, LAVH, salpingoplastia, avaliação da fertilidade, adesiólise e tratamento da endometriose.

- Fabricado em Valox descartável, composto de uma única estrutura com um botão de controle que permite a rotação da ponta, proporcionando até 120° de anteversão e 90° de retroversão. Além disso, possui um balão macio em silicone para fixar o manipulador na cavidade uterina;
- Válvula de insuflação e uma extensão com conexão luer lock para infusão de contraste;
- Ponta distal atraumática com 2 orifícios laterais e um central;
- Sonda dilatadora fabricada em policarbonato, graduada e com duas extremidades, 3,0 e 5,5 mm de diâmetro;
- Acompanha uma seringa de 12 ml não destinada para uso hipodérmico.

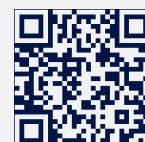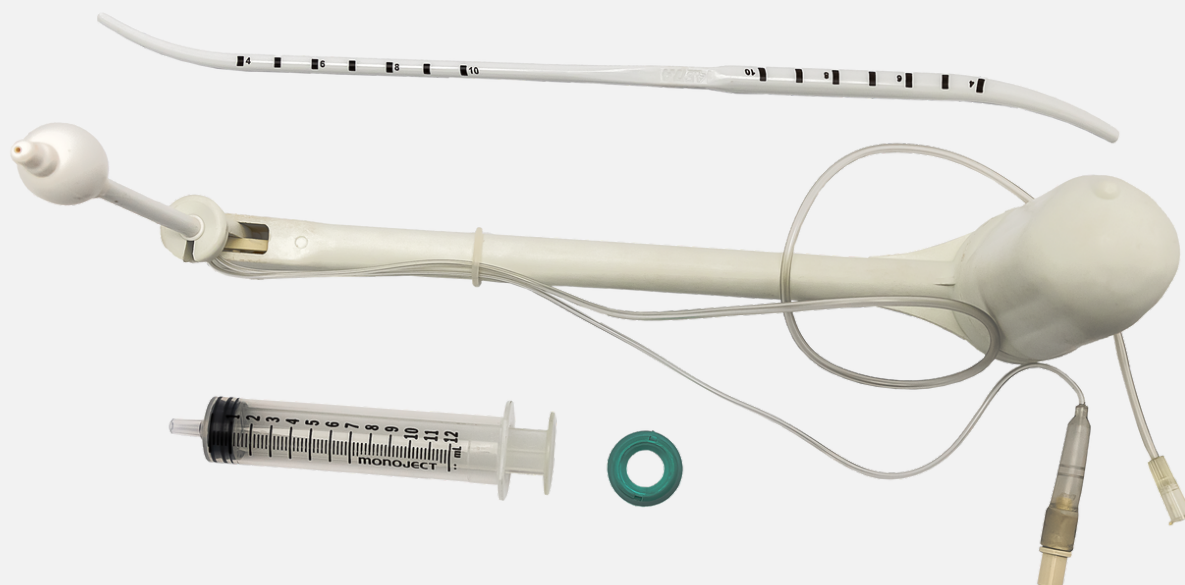



Manipulador Uterino

Clearview

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UM700	01 Manipulador uterino descartável, 5,1 mm de diâmetro, extremidade distal com 07 cm de comprimento e 10 ml de volume do balão; 01 Sonda dilatadora; 01 Seringa para insuflação do balão de 12 ml.
UM900	01 Manipulador uterino descartável, 5,1 mm de diâmetro, extremidade distal com 09 cm de comprimento e 10 ml de volume do balão. 01 Sonda dilatadora; 01 Seringa para insuflação do balão de 12 ml.

