



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE **QUIMIOTERAPIA**



Cânula para Punção

de Reservatório com Dispositivo de Segurança Medika

Informações técnicas:

Indicada para a punção do reservatório do cateter totalmente implantável, para infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue, a técnica preserva a rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocar regularmente os cateteres periféricos.

A cânula é fabricada em aço inoxidável AISI 304, com um ângulo tangencial, disponível nos tamanhos 19, 20 e 22G x 19, 25 e 38 mm. A extensão de 20 cm, conectada à cânula, é fabricada em PVC transparente, livre de DEHP e PHT, a pinça é fabricada em polioximetileno acetal (POM).

A cânula possui dispositivo de segurança em conformidade com a NR 32. Após o uso da cânula, esse dispositivo é ativado, levantando a base da fixação e retraindo a própria cânula. Isso garante a proteção do operador contra traumas causados pela ponta perfurante da cânula.





Cânula para Punção

de Reservatório com Dispositivo de Segurança Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO (GAUGE)	COMPRIMENTO
95000	19G	15 mm
95001	19G	25 mm
95002	19G	19 mm
95009	20G	15 mm
95003	20G	25 mm
95004	20G	19 mm
95005	20G	38 mm
95010	22G	15 mm
95006	22G	25 mm
95007	22G	19 mm
95008	22G	38 mm





Cânula para Punção

de Reservatório Mekon

Informações técnicas:

Indicada para punção do reservatório do cateter totalmente implantável, permitindo a infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue. Seu uso contribui para a preservação da rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocas frequentes de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, em ângulo tangencial, possui asas fabricadas em PVC, que permitem uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A extensão, com 20 cm de comprimento, é fabricada em PVC transparente e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada de polipropileno de alta densidade.



Cânula para Punção

de Reservatório Mekon

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
HN1915	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
HN1920	Cânula para punção de reservatório	19G	20 mm
HN1925	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
HN2015	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
HN2020	Cânula para punção de reservatório	20G	20 mm
HN2025	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
HN2215	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
HN2220	Cânula para punção de reservatório	22G	20 mm
HN2225	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm





Cânula para Punção

de Reservatório Oncogrip

Informações técnicas:

Indicada para punção do reservatório do cateter totalmente implantável, permitindo a infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue. Seu uso contribui para a preservação da rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocas frequentes de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, em ângulo tangencial, possui asas removíveis fabricadas em PVC, que permitem uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A extensão, com 20 cm de comprimento, é fabricada em poliuretano e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada de polipropileno de alta densidade.

Asa removível





Cânula para Punção

de Reservatório Oncogrip

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
GN1915	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
GN1920	Cânula para punção de reservatório	19G	20 mm
GN1925	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
GN2015	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
GN2020	Cânula para punção de reservatório	20G	20 mm
GN2025	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
GN2215	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
GN2220	Cânula para punção de reservatório	22G	20 mm
GN2225	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm





Cânula para Punção

de Reservatório com Extensão em PU Isomed

Informações técnicas:

Indicada para punção do reservatório do cateter totalmente implantável, permitindo a infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue. Seu uso contribui para a preservação da rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocas frequentes de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, em ângulo tangencial, possui asas para possibilitar uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A extensão, com 18 cm de comprimento, é fabricada em Poliuretano (PU) e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada em poliacetal.



Cânula para Punção

de Reservatório com Extensão em PU Isomed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
LR1915PU	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
LR1920PU	Cânula para punção de reservatório	19G	20 mm
LR1925PU	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
LR1932PU	Cânula para punção de reservatório	19G	32 mm
LR1938PU	Cânula para punção de reservatório	19G	38 mm
LR2015PU	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
LR2020PU	Cânula para punção de reservatório	20G	20 mm
LR2025PU	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
LR2032PU	Cânula para punção de reservatório	20G	32 mm
LR2038PU	Cânula para punção de reservatório	20G	38 mm
LR2215PU	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
LR2220PU	Cânula para punção de reservatório	22G	20 mm
LR2225PU	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm
LR2232PU	Cânula para punção de reservatório	22G	32 mm
LR2238PU	Cânula para punção de reservatório	22G	38 mm





Cânula para Punção

de Reservatório com extensão em PU Medika

Informações técnicas:

Indicada para punção do reservatório do cateter totalmente implantável, permitindo a infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue. Seu uso contribui para a preservação da rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocas frequentes de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, em ângulo tangencial, possui asas fabricadas em PVC, que permitem uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A extensão, com 20 cm de comprimento, é fabricada em poliuretano e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada de polipropileno de alta densidade.





Cânula para Punção

de Reservatório com extensão em PU Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO (G)	COMPRIMENTO (mm)
HN1915-PU	Cânula para punção de reservatório	19G	15
HN1920-PU	Cânula para punção de reservatório	19G	20
HN1925-PU	Cânula para punção de reservatório	19G	25
HN2015-PU	Cânula para punção de reservatório	20G	15
HN2020-PU	Cânula para punção de reservatório	20G	20
HN2025-PU	Cânula para punção de reservatório	20G	25
HN2215-PU	Cânula para punção de reservatório	22G	15
HN2220-PU	Cânula para punção de reservatório	22G	20
HN2225-PU	Cânula para punção de reservatório	22G	25



Cânula para Punção

de Reservatório com Extensão em PU e Dispositivo de Segurança Medika

Informações técnicas:

Indicada para a punção do reservatório do cateter totalmente implantável, para infusão de quimioterapia, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue, a técnica preserva a rede venosa periférica e reduz a necessidade de trocar regularmente os cateteres periféricos.

A cânula é fabricada em aço inoxidável AISI 304, com um ângulo tangencial, disponível nos tamanhos 19, 20 e 22G x 15, 19 e 25 mm. A extensão de 20 cm, conectada à cânula, é fabricada em poliuretano, a pinça é fabricada em polioximetileno acetal (POM).

A cânula possui dispositivo de segurança em conformidade com a NR 32. Após o uso da cânula, esse dispositivo é ativado, levantando a base da fixação e retraindo a própria cânula. Isso garante a proteção do operador contra traumas causados pela ponta perfurante da cânula.





Cânula para Punção

de Reservatório com Extensão em PU e Dispositivo de Segurança Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO (GAUGE)	COMPRIMENTO
SHN1915-PU	19G	15 mm
SHN1919-PU	19G	19 mm
SHN1925-PU	19G	25 mm
SHN2015-PU	20G	15 mm
SHN2019-PU	20G	19 mm
SHN2025-PU	20G	25 mm
SHN2215-PU	22G	15 mm
SHN2219-PU	22G	19 mm
SHN2225-PU	22G	25 mm





Cânula para Punção

de Reservatório com dispositivo de segurança, extensão em PU e conector valvulado Andemed

Informações técnicas:

Indicada para punção de reservatório do cateter totalmente implantável para infusão de quimioterápicos, nutrição parenteral, tratamento da dor, coleta ou perfusão de sangue, preservando assim a rede venosa periférica e reduzindo a troca regular de cateteres periféricos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304 em um ângulo tangencial, disponível nos tamanhos 19, 20 e 22G x 12, 15, 19, 25, 30, 38 mm. A extensão, conectada a cânula, é fabricada em poliuretano e a pinça é fabricada em POM. A extremidade proximal da extensão possui um conector valvulado, livre de agulha, que protege o paciente e o profissional de saúde de acidentes com perfurocortantes durante a terapia intravenosa ao eliminar o uso de agulhas. Possui dois modelos, com ou sem extensão lateral, também fabricada em poliuretano.

A cânula possui dispositivo de segurança em conformidade à NR 32. Após a utilização da cânula, o dispositivo é ativado levantando a base de fixação, a cânula é retraída, protegendo o operador de traumas com a ponta perfurante da cânula. A base possui asas, que facilitam o manuseio pelo profissional de saúde.



Modelo: HN-01-A - com extensão lateral



Modelo: HN-02-A - sem extensão lateral



Cânula para Punção

de Reservatório com dispositivo de segurança, extensão em PU e conector valvulado Andemed

MODELO: HN-01-A - COM EXTENSÃO LATERAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
11112212	Cânula para punção de reservatório	22G	12 mm
11112215	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
11112219	Cânula para punção de reservatório	22G	19 mm
11112225	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm
11112230	Cânula para punção de reservatório	22G	30 mm
11112238	Cânula para punção de reservatório	22G	38 mm
11112012	Cânula para punção de reservatório	20G	12 mm
11112015	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
11112019	Cânula para punção de reservatório	20G	19 mm
11112025	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
11112030	Cânula para punção de reservatório	20G	30 mm
11112038	Cânula para punção de reservatório	20G	38 mm
11111912	Cânula para punção de reservatório	19G	12 mm
11111915	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
11111919	Cânula para punção de reservatório	19G	19 mm
11111925	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
11111930	Cânula para punção de reservatório	19G	30 mm
11111938	Cânula para punção de reservatório	19G	38 mm



Cânula para Punção

de Reservatório com dispositivo de segurança, extensão em PU e conector valvulado Andemed

MODELO: HN-02-A - SEM EXTENSÃO LATERAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
10112212	Cânula para punção de reservatório	22G	12 mm
10112215	Cânula para punção de reservatório	22G	15 mm
10112219	Cânula para punção de reservatório	22G	19 mm
10112225	Cânula para punção de reservatório	22G	25 mm
10112230	Cânula para punção de reservatório	22G	30 mm
10112238	Cânula para punção de reservatório	22G	38 mm
10112012	Cânula para punção de reservatório	20G	12 mm
10112015	Cânula para punção de reservatório	20G	15 mm
10112019	Cânula para punção de reservatório	20G	19 mm
10112025	Cânula para punção de reservatório	20G	25 mm
10112030	Cânula para punção de reservatório	20G	30 mm
10112038	Cânula para punção de reservatório	20G	38 mm
10111912	Cânula para punção de reservatório	19G	12 mm
10111915	Cânula para punção de reservatório	19G	15 mm
10111919	Cânula para punção de reservatório	19G	19 mm
10111925	Cânula para punção de reservatório	19G	25 mm
10111930	Cânula para punção de reservatório	19G	30 mm
10111938	Cânula para punção de reservatório	19G	38 mm





Cânula para Punção

de Reservatório e Infusor Elastomérico com Seletor de Fluxo Tuoren

Informações técnicas:

Indicados para administração precisa de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos, com uma taxa de fluxo constante após a seleção do fluxo e baixa pressão.

A cânula é fabricada em aço inoxidável AISI 304, com um ângulo tangencial, disponível nos tamanhos 20 G x 20 e 25 mm de comprimento. Possui asas, fabricadas em PVC, para proporcionar uma melhor fixação e posicionamento da cânula. A extensão, com 18 cm de comprimento, é fabricada em PVC e está conectada à cânula por meio de uma junção em ABS Lustran que impede a rotação. A pinça é fabricada em polipropileno de alta densidade.

O infusor elastomérico projetado para uso ambulatorial, descartável, possui um reservatório com o balão em silicone e um compartimento de policarbonato que reveste o balão, além de uma extensão que se conecta à cânula de Huber.

A taxa de fluxo pode ser selecionada por meio de um seletor de fluxo com diversas taxas nominais em ml/h, que podem ser ajustadas usando uma chave. Possui uma válvula irreversível que impede o refluxo da solução durante o enchimento do infusor e um filtro de ar. Os volumes disponíveis são, 60, 100, 150, 200, 275 e 300ml.





Cânula para Punção

de Reservatório e Infusor Elastomérico com Seletor de Fluxo Tuoren

CÓDIGO	COMPONENTES DO KIT
IMCBI50602-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 60 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/ 7.5 ml/h.
IMCBI50601-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 60 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h.
IMCBI51002-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 100 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.
IMCBI51001-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 100 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h.
IMCBI51502-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 150 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/ 7.5 ml/h.
IMCBI51501-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 150 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h.
IMCBI52001-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 200ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h.
IMCBI52002-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 200ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0,5/1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/ 7/7,5 ml/h.
IMCBI52752-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 275 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.





Cânula para Punção

de Reservatório e Infusor Elastomérico com Seletor de Fluxo Tuoren

CÓDIGO	COMPONENTES DO KIT
IMCBI52751-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 275 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ 14/15 ml/h.
IMCBI53002-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 300 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/ 7/7.5 ml/h.
IMCBI53001-HN2020	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 20 mm/ 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 300 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h.
MCBI50602-HN2025 01	Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 60 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.
IMCBI50601-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 60 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h.
IMCBI51002-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 100 ml de volume total, revestida por Compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.
IMCBI51001-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 100 ml de volume total, revestida por Compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.
IMCBI51502-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 150 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.
IMCBI51501-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 150 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h.





Cânula para Punção

de Reservatório e Infusor Elastomérico com Seletor de Fluxo Tuoren

CÓDIGO	COMPONENTES DO KIT
IMCBI52002-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 200 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.
IMCBI52001-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 200 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h
IMCBI52752-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 275 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo 0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5 ml/h.
IMCBI52751-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 275 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h
IMCBI530022-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 300 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h
IMCBI53001-HN2025	01 Cânula para punção de reservatório 20G x 25 mm 01 bomba de infusão com reservatório de balão em silicone 300 ml de volume total, revestida por compartimento em PC, com extensão, filtro de ar, pinça e conexão para infusão de solução no balão e seletor de fluxo /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 ml/h





Bomba de Infusão Intravenosa

Soft Fert Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos com uma taxa de fluxo constante e baixa pressão.

Projetada para uso ambulatorial descartável, fabricada com revestimento em PVC, apresenta um reservatório em formato de balão fabricado em silicone, conectado a uma extensão que se liga ao cateter. A taxa de fluxo pode ser fixa em 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 20 ml/h ou selecionada através de um seletor de fluxo com diversas taxas de fluxo nominal em ml/h, tais como, 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7; 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 e 5/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 35 ml/h, que é selecionado a partir de uma chave hexagonal, parte integrante deste produto.

A bomba de infusão possui uma válvula de fluxo único que impede o refluxo da solução quando o balão da bomba de infusão é preenchido e um filtro de partículas de 5 μ .

Os volumes da bomba são 50, 60, 100, 150, 200, 250 e 275 ml.



Modelo: com seletor de fluxo



Modelo: sem seletor de fluxo



Bomba de Infusão Intravenosa

Soft Fert Medical

MODELO COM SELETOR DE FLUXO

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ml)	FLUXO A SER SELECIONADO (ml/h)
RS84442	60 ml	1/2/3/4/5/6/7
RS80442	100 ml	1/2/3/4/5/6/7
RS81442	150 ml	1/2/3/4/5/6/7
RS82442	200 ml	1/2/3/4/5/6/7
RS85442	250 ml	1/2/3/4/5/6/7
RS83442	275 ml	1/2/3/4/5/6/7
RS84552	60 ml	2/4/6/8/10/12/14
RS80852	100 ml	2/4/6/8/10/12/14
RS818525	150 ml	2/4/6/8/10/12/14
RS828522	200 ml	2/4/6/8/10/12/14
RS85852	250 ml	2/4/6/8/10/12/14
RS838527	275 ml	2/4/6/8/10/12/14
RS84852	60 ml	10/05/15/20/25/30/35
RS808526	100 ml	5/10/15/20/25/30/35
RS81852	150 ml	5/10/15/20/25/30/35
RS82852	250 ml	5/10/15/20/25/30/35
RS83852	275ml	5/10/15/20/25/30/35
RS848524	400ml	5/10/15/20/25/30/35
RS85852	500ml	5/10/15/20/25/30/35
RS86852	600ml	5/10/15/20/25/30/35



Bomba de Infusão Intravenosa

Soft Fert Medical

MODELO SEM SELETOR DE FLUXO

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ml)	FLUXO (ml/h)
E050002002	50	2
E050003002	50	3
E050004002	50	4
E050005002	50	5
E050006002	50	6
E050008002	50	8
E050010002	50	10
E050020002	50	20
E060002002	60	2
E060003002	60	3
E060004002	60	4
E060005002	60	5
E060006002	60	6
E060008002	60	8
E060010002	60	10
E060020002	60	20
E100002002	100	2
E100003002	100	3
E100004002	100	4
E100005002	100	5





Bomba de Infusão Intravenosa

Soft Fert Medical

MODELO SEM SELETOR DE FLUXO

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ml)	FLUXO (ml/h)
E100006002	100	6
E100008002	100	8
E100010002	100	10
E100020002	100	20
E150002002	150	2
E150003002	150	3
E150004002	150	4
E150005002	150	5
E150006002	150	6
E150008002	150	8
E150010002	150	10
E150020002	150	20
E200002002	200	2
E200003002	200	3
E200004002	200	4
E200005002	200	5
E200006002	200	6
E200008002	200	8
E200010002	200	10
E200020002	200	20



Bomba de Infusão Intravenosa

Soft Fert Medical

MODELO SEM SELETOR DE FLUXO

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ml)	FLUXO (ml/h)
E250002002	250	2
E250003002	250	3
E250004002	250	4
E250005002	250	5
E250006002	250	6
E250008002	250	8
E250010002	250	10
E250020002	250	20
E275002002	275	2
E275003002	275	3
E275004002	275	4
E275005002	275	5
E275006002	275	6
E275008002	275	8





Bomba de Infusão Intravenosa

Elastomérica CS Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos com uma taxa de fluxo constante e baixa pressão.

Projetada para uso ambulatorial, descartável, com um reservatório balão em silicone e uma extensão que se liga a um cateter. O infusor possui conexão Luer Lock, taxa de fluxo pré-determinada pelo fabricante, pinça, filtro de ar e uma válvula irreversível que previne o refluxo da solução quando o balão da bomba de infusão é preenchido. Os volumes da bomba são 100, 200 e 275 ml e o fluxo da solução de 2, 3, 4 e 5 ml/h.





Bomba de Infusão Intravenosa

Elastomérica CS Medical

CÓDIGO	VOLUME	TAXA DE FLUXO NOMINAL
CBI-M100-2	100 ml	2 ml/h
CBI-M100-3	100 ml	3 ml/h
CBI-M100-4	100 ml	4 ml/h
CBI-M100-5	100 ml	5 ml/h
CBI-M200-2	200 ml	2 ml/h
CBI-M200-3	200 ml	3 ml/h
CBI-M200-4	200 ml	4 ml/h
CBI-M200-5	200 ml	5 ml/h
CBI-M275-2	275ml	2 ml/h
CBI-M275-3	275ml	3 ml/h
CBI-M275-4	275ml	4 ml/h
CBI-M275-5	275ml	5 ml/h





Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos com uma taxa de fluxo constante de baixa pressão. Projetada para uso ambulatorial, descartável, intravenosa, com um reservatório balão em silicone, uma capa protetora amarela ou âmbar, com proteção UV fotossensível, que reveste o balão e uma extensão com conexão luer lock com proteção UV fotossensível que se liga a um cateter. A taxa de fluxo é pré-determinada pelo fabricante, possui uma válvula de fluxo único que impede o refluxo da solução quando o balão da bomba de infusão é preenchido e filtro de partículas de e 5 μ . Os volumes da bomba são 50, 60, 100, 150, 200, 250 e 275 ml e o fluxo de infusão da solução de 2,3,4, 5, 6, 8, 10 e 20 ml/h.



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

MODELO COM CAPA PROTETORA AMBAR

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F060002001	60	2
F060003001	60	3
F060004001	60	4
F060005001	60	5
F060006001	60	6
F060008001	60	8
F060010001	60	10
F060020001	60	20
F100002001	100	2
F100003001	100	3
F100004001	100	4
F100005001	100	5
F100006001	100	6
F100008001	100	8
F100010001	100	10
F100020001	100	20
F150002001	150	2
F150003001	150	3
F150004001	150	4
F150005001	150	5
F150006001	150	6



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F150008001	150	8
F150010001	150	10
F150020001	150	20
F200002001	200	2
F200003001	200	3
F200004001	200	4
F200005001	200	5
F200006001	200	6
F200008001	200	8
F200010001	200	10
F200020001	200	20
F250002001	250	2
F250003001	250	3
F250004001	250	4
F250005001	250	5
F250006001	250	6
F250008001	250	8
F250010001	250	10
F250020001	250	20
F275002001	275	2
F275003001	275	3
F275004001	275	4



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F275005001	275	5
F275006001	275	6
F275008001	275	8
F275010001	275	10
F275020001	275	20

MODELO COM CAPA PROTETORA AMARELA

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F060002001Y	60	2
F060003001Y	60	3
F060004001Y	60	4
F060005001Y	60	5
F060006001Y	60	6
F060008001Y	60	8
F060010001Y	60	10
F060020001Y	60	20
F100002001Y	100	2
F100003001Y	100	3
F100004001Y	100	4
F100005001Y	100	5
F100006001Y	100	6



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F100008001Y	100	8
F100010001Y	100	10
F100020001Y	100	20
F150002001Y	150	2
F150003001Y	150	3
F150004001Y	150	4
F150005001Y	150	5
F150006001Y	150	6
F150008001Y	150	8
F150010001Y	150	10
F150020001Y	150	20
F200002001Y	200	2
F200003001Y	200	3
F200004001Y	200	4
F200005001Y	200	5
F200006001Y	200	6
F200008001Y	200	8
F200010001Y	200	10
F200020001Y	200	20
F250002001Y	250	2
F250003001Y	250	3



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F250004001Y	250	4
F250005001Y	250	5
F250006001Y	250	6
F250008001Y	250	8
F250010001Y	250	10
F250020001Y	250	20
F275002001Y	275	2
F275003001Y	275	3
F275004001Y	275	4
F275005001Y	275	5
F275006001Y	275	6
F275008001Y	275	8
F275010001Y	275	10
F275020001Y	275	20





Bomba de Infusão Intravenosa

Fert Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos com uma taxa de fluxo constante e baixa pressão.

Projetada para uso ambulatorial, descartável, com um reservatório balão em silicone e uma extensão que se liga a um cateter. O infusor possui conexão Luer Lock, taxa de fluxo pré-determinada pelo fabricante, pinça, filtro de ar e uma válvula irreversível que previne o refluxo da solução quando o balão da bomba de infusão é preenchido. Os volumes da bomba são 100, 150, 200 e 275 ml e o fluxo da solução de 2, 3, 4 e 5 ml/h.





Bomba de Infusão Intravenosa

Fert Medical

MODELO COM CAPA PROTETORA TRANSPARENTE

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
E050002001	50	2
E050003001	50	3
E050004001	50	4
E050005001	50	5
E050006001	50	6
E050008001	50	8
E050010001	50	10
E050020001	50	20
E060002001	60	2
E060003001	60	3
E060004001	60	4
E060005001	60	5
E060006001	60	6
E060008001	60	8
E060010001	60	10
E060020001	60	20
E100002001	100	2
E100003001	100	3
E100004001	100	4
E100005001	100	5



medika
www.medika.com.br



Bomba de Infusão Intravenosa

Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
E100006001	100	6
E100008001	100	8
E100010001	100	10
E100020001	100	20
E150002001	150	2
E150003001	150	3
E150004001	150	4
E150005001	150	5
E150006001	150	6
E150008001	150	8
E150010001	150	10
E150020001	150	20
E200002001	200	2
E200003001	200	3
E200004001	200	4
E200005001	200	5
E200006001	200	6
E200008001	200	8
E200010001	200	10
E200020001	200	20
E250002001	250	2





Bomba de Infusão Intravenosa

Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
E250003001	250	3
E250004001	250	4
E250005001	250	5
E250006001	250	6
E250008001	250	8
E250010001	250	10
E250020001	250	20
E275002001	275	2
E275003001	275	3
E275004001	275	4
E275005001	275	5
E275006001	275	6
E275008001	275	8
E275010001	275	10
E275020001	275	20





Bomba de Infusão Intravenosa

Fert Medical

MODELO COM CAPA PROTETORA BRANCA E VERDE

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
E050002001G	50	2
E050003001G	50	3
E050004001G	50	4
E050005001G	50	5
E050006001G	50	6
E050008001G	50	8
E050010001G	50	10
E050020001G	50	20
E060002001G	60	2
E060003001G	60	3
E060004001G	60	4
E060005001G	60	5
E060006001G	60	6
E060008001G	60	8
E060010001G	60	10
E060020001G	60	20
E100002001G	100	2
E100003001G	100	3
E100004001G	100	4
E100005001G	100	5





Bomba de Infusão Intravenosa

Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
E100006001G	100	6
E100008001G	100	8
E100010001G	100	10
E100020001G	100	20
E150002001G	150	2
E150003001G	150	3
E150004001G	150	4
E150005001G	150	5
E150006001G	150	6
E150008001G	150	8
E150010001G	150	10
E150020001G	150	20
E200002001G	200	2
E200003001G	200	3
E200004001G	200	4
E200005001G	200	5
E200006001G	200	6
E200008001G	200	8
E200010001G	200	10
E200020001G	200	20
E250002001G	250	2
E250003001G	250	3





Bomba de Infusão Intravenosa

Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
E250004001G	250	4
E250005001G	250	5
E250006001G	250	6
E250008001G	250	8
E250010001G	250	10
E250020001G	250	20
E275002001G	275	2
E275003001G	275	3
E275004001G	275	4
E275005001G	275	5
E275006001G	275	6
E275008001G	275	8
E275010001G	275	10
E275020001G	275	20





Conector para transferência

de medicamentos com dispensador em sistema fechado
Andemed

Informações técnicas:

Indicado para a preparação, reconstituição e combinação de medicamentos, incluindo fármacos antineoplásicos e outras drogas classificadas como perigosas, o Conector para Transferência de Medicamentos com Dispensador integra o Sistema Fechado de Transferência de Medicamentos (CSTD). Os conectores são herméticos, à prova de vazamentos, disponíveis em versões com ou sem membrana impermeável interna.

O dispensador conta com anel de vedação de aerossóis e está disponível nos volumes de 20 mL e 60 mL, garantindo controle e segurança durante a manipulação e transferência de medicamentos.





Conector para transferência

de medicamentos com dispensador em sistema fechado
Andemed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DC1002	01 Conector com tampa de proteção, componente de vedação, agulha interna, plug de borracha sintética e dispensador de 20 ml para transferência de medicamentos;
DC1003	01 Conector com tampa de proteção, componente de vedação, agulha interna, plug de borracha sintética, membrana impermeável interna com vedação e dispensador de 20 ml para transferência de medicamentos;
DC3002	01 Conector com tampa de proteção, componente de vedação, agulha interna, plug de borracha sintética e dispensador de 60 ml para transferência de medicamentos;
DC3003	01 Conector com tampa de proteção, componente de vedação, agulha interna, plug de borracha sintética, membrana impermeável interna com vedação e dispensador de 60 ml para transferência de medicamentos;






Adaptador de frascos para

sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

Informações técnicas:

Projetado para conexão segura a frascos de 13 mm, 20 mm, 28 mm e 32 mm de diâmetro, o adaptador para frascos integra o sistema CSTD, garantindo transferência segura durante a reconstituição e manipulação de medicamentos perigosos. Hermético, à prova de vazamentos, contribui para a proteção do profissional e do ambiente.

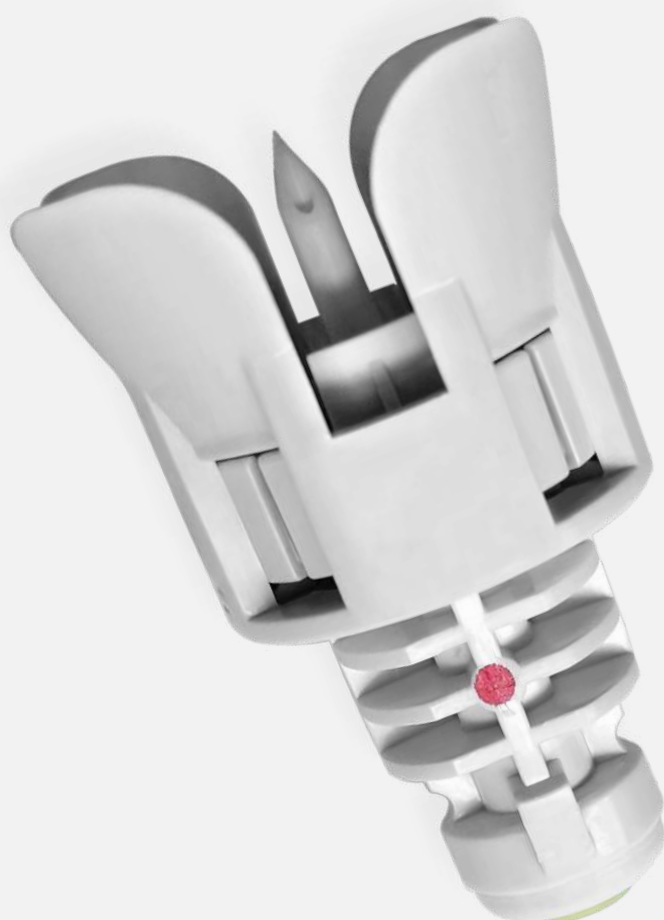



Adaptador de frascos para

sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VA1301	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 13 mm;
VA2001	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 20 mm;
VA2801	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 28 mm;
VA3201	01 Adaptador de frascos com componente de vedação e tampa de proteção para frascos de 32 mm;





Adaptador luer lock

para sistema fechado de transferência de medicamentos Andemed


Informações técnicas:

Os adaptadores Luer Lock são indicados para conexão segura durante a preparação e administração de medicamentos no sistema fechado CSTD.

São herméticos e resistentes a vazamentos, proporcionando redução significativa da exposição ocupacional a agentes citotóxicos e outros medicamentos perigosos.

Disponíveis em diferentes configurações:

- Com ou sem tampa de proteção;
- Com componente de vedação ou conector valvulado;
- Conexão padrão Luer Lock.

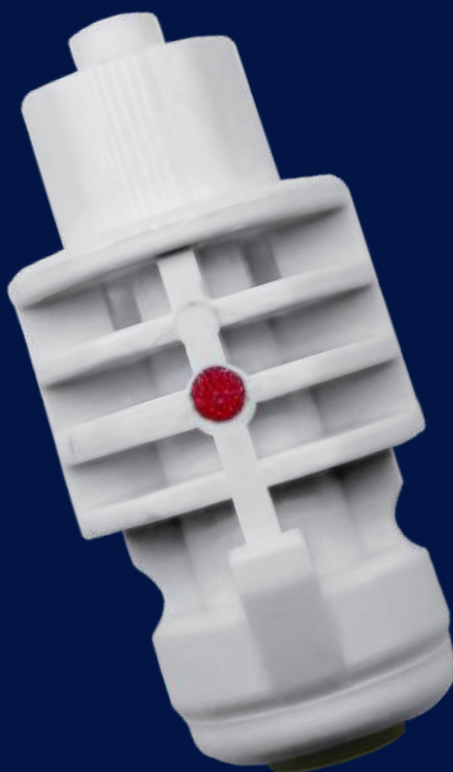



Adaptador luer lock

para sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LL0101	Adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos com tampa de proteção e componente de vedação, conexão luer lock
LL0102	Adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos com tampa de proteção; componente de vedação externo e interno, conexão luer lock
LL0103	Adaptador luer lock para sistema fechado de transferência de medicamentos com conector valvulado e conexão luer lock





Adaptador spike para

sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

Informações técnicas:

Indicado como acessório do sistema fechado CSTD, o adaptador spike é utilizado na preparação e transferência segura de medicamentos para bolsas de solução.

Compatível com bolsas de soro, o dispositivo é hermético, à prova de vazamentos, reduzindo a exposição a vapores e aerossóis.

Disponível em versões com ou sem elemento de vedação no plug.





Adaptador de frascos para

sistema fechado de transferência de medicamentos
Andemed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SA0201	01 Adaptador spike com tampa de proteção, componente de vedação e plug de borracha sintética;
SA0205	01 Adaptador spike com tampa de proteção, componente de vedação e plug de borracha sintética com componente de vedação.





www.medika.com.br