



Cateter Totalmente Implantável


IN PORT

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular de longa permanência para uso em pacientes que necessitam administração intravenosa de fluidos, drogas e soluções para nutrição parenteral, assim como em oncologia, para administração de quimioterápicos. Os vasos sanguíneos para implantação do cateter são: veias jugular interna e externa, subclávia, braquial, cefálica e axilar. Com permanência superior a 30 dias.

Fabricado em silicone biocompatível, radiopaco e graduado para identificação do local de implantação, o cateter permite a comunicação entre o reservatório e o sistema vascular. Possui um único lúmen disponível em diâmetros de 6, 7, 7,8 Fr. O reservatório é fabricado em polioximetileno, também radiopaco, e possui três orifícios de fixação subcutânea em sua base. Além disso, apresenta um septo facilmente identificado sob a pele, fabricado em silicone autocicatrizante, localizado na porção superior do reservatório. Disponível em dois tamanhos: perfil normal (VSP) e baixo (VPP).

O sistema de junção é feito por meio de uma conexão que permite o tensionamento do cateter para os lados, evitando dobras ou bloqueios no fluxo. O cateter é fixado por um anel em forma de oliva, que é colocado sobre uma conexão e rosqueado, garantindo que não causem desconexões indesejadas entre o sistema reservatório e o cateter. Acompanha um introdutor peel away de 3,6 mm x 14,2 cm, um dilatador inserido no introdutor peel away 3,05 mm x 18,5 cm, um guia metálico de 0.035" x 45 cm, uma agulha introdutora de 18G x 7,5 cm, um trocarte tunelizador de 3 mm x 24 cm, uma cânula de punção de reservatório Huber reta de 22G x 25 mm, uma cânula de punção de reservatório Huber curva de 22G x 25 mm, um levantador de veia e um conector.

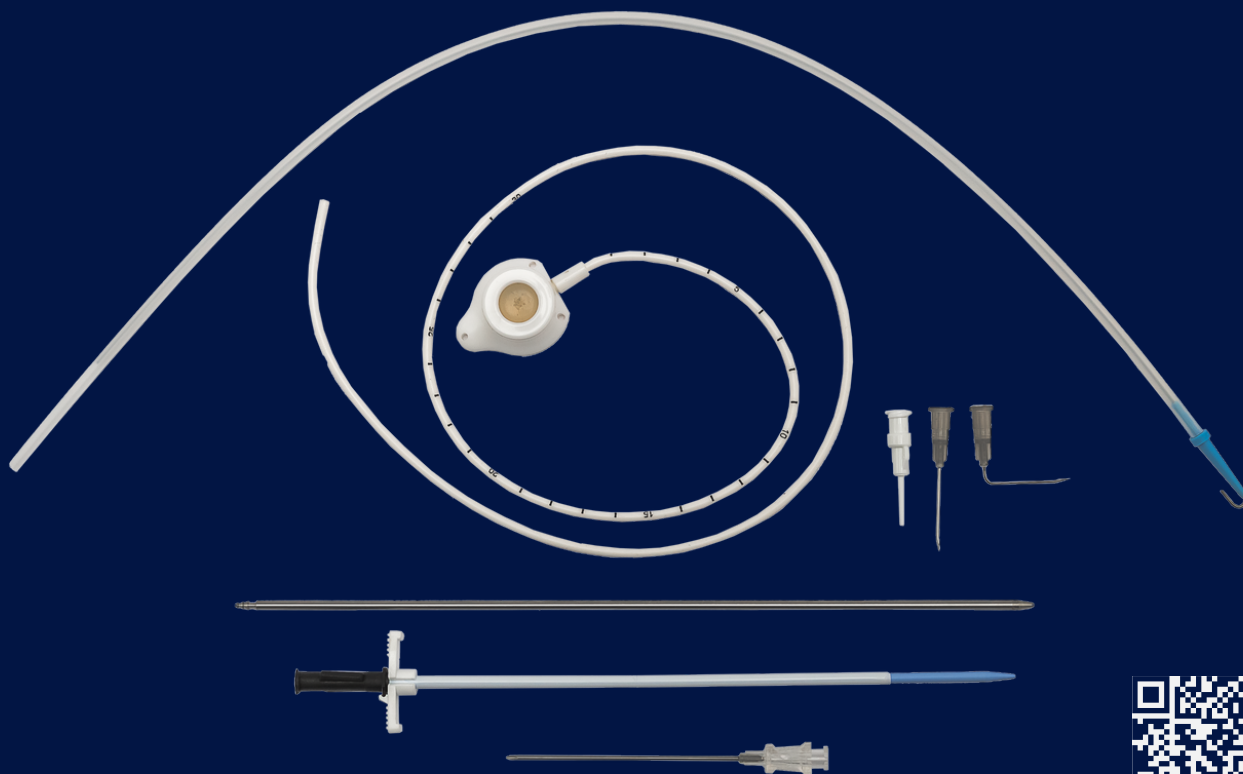

Cateter Totalmente Implantável

IN PORT

DIMENSÕES

RESERVATÓRIO	BASE	ALTURA	DIÂMETRO DO SEPTO	ALTURA DO SEPTO	VOLUME INTERNO
NORMAL	33,4 X 29,5 MM	14,8 MM	11,8 MM	5,9 MM	0,70 ML
BAIXO PERFIL	29 X 25,4 MM	12,4 MM	9,8 MM	5,0 MM	0,42 MM

TAMANHOS

CÓDIGO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO EM FR.	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO	VOLUME INTERNO POR 10 CM
VSPI022KT	70 cm	6	2,0 mm	1,0 mm	0,08 ml
VPPI022KT	70 cm	6	2,0 mm	1,0 mm	0,08 ml
VSPI023KT	70 cm	7	2,3 mm	1,0 mm	0,08 ml
VPPI023KT	70 cm	7	2,3 mm	1,0 mm	0,08 ml
VSPI026KT	70 cm	7,8	2,6 mm	1,1 mm	0,09 ml
VPPI026KT	70 cm	7,8	2,6 mm	1,1 mm	0,09 ml

