



Cateter Totalmente Implantável

INFU-KT


Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular de longa permanência para uso em pacientes que necessitam administração intravenosa de fluidos, drogas e soluções para nutrição parenteral, assim como em oncologia, para administração de quimioterápicos. Os vasos sanguíneos para implantação do cateter são: veias jugular interna e externa, subclávia, braquial, cefálica e axilar. Com permanência superior a 30 dias.

Fabricado em silicone biocompatível, radiopaco e graduado para identificação do local de implantação, o cateter permite a comunicação entre o reservatório e o sistema vascular. Possui um único lúmen disponível em diâmetros de 6, 7, 7,8 e 9,6 Fr. O reservatório é fabricado em uma liga de titânio TA6V, também radiopaco, e possui três orifícios de fixação subcutânea em sua base. Além disso, apresenta um septo facilmente identificado sob a pele, fabricado em silicone autocicatrizante, localizado na porção superior do reservatório. Disponível em dois tamanhos: perfil normal (IVT) e baixo (IVP).

O sistema de junção é feito por meio de uma conexão que permite o tensionamento do cateter para os lados, evitando dobras ou bloqueios no fluxo. O cateter é fixado por um anel em forma de oliva, que é colocado sobre uma conexão e rosqueado, garantindo que não causem desconexões indesejadas entre o sistema reservatório e o cateter.

Acompanha um introdutor peel away de 3,6 mm x 14,2 cm, um dilatador inserido no introdutor peel away 3,05 mm x 18,5 cm, um guia metálico de 0.035" x 45 cm, uma agulha introdutora de 18G x 7,5 cm, um trocarte tunelizador de 3 mm x 24 cm, uma cânula de punção de reservatório Huber reta de 22G x 25 mm, uma cânula de punção de reservatório Huber curva de 22G x 25 mm, um levantador de veia e um conector.

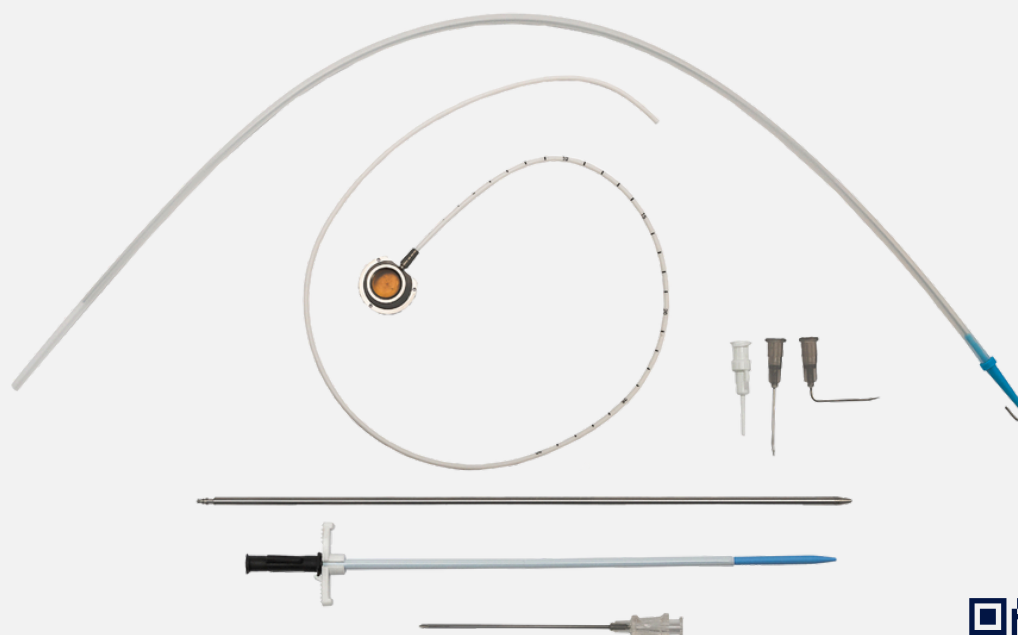

medika[®]
www.medika.com.br

Cateter Totalmente Implantável

INFU-KT

DIMENSÕES

RESERVATÓRIO	BASE	ALTURA	DIÂMETRO DO SEPTO	ALTURA DO SEPTO	VOLUME INTERNO
NORMAL	29,5 MM	12,2 MM	14,0 MM	6,1 MM	1,26 ML
BAIXO PERFIL	24,75 MM	9,8 MM	10,2 MM	5,0 MM	0,58 MM

TAMANHOS

CÓDIGO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO EM FR.	DIÂMETRO EXTERNO	DIÂMETRO INTERNO	VOLUME INTERNO POR 10 CM
IVT1020KT	70 cm	6	2,0 mm	1,0 mm	0,08 ml
IVP1020KT	70 cm	6	2,0 mm	1,0 mm	0,08 ml
IVT1023KT	70 cm	7	2,3 mm	1,0 mm	0,08 ml
IVP1023KT	70 cm	7	2,3 mm	1,0 mm	0,08 ml
IVT1026KT	70 cm	7,8	2,6 mm	1,1 mm	0,09 ml
IVP1026KT	70 cm	7,8	2,6 mm	1,1 mm	0,09 ml
IVT1632KT	70 cm	9,6	3,2 mm	1,6 mm	0,20 ml
IVP1632KT	70 cm	9,6	3,2 mm	1,6 mm	0,20 ml