




Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de quimioterápicos, anestésicos, analgésicos e antibióticos com uma taxa de fluxo constante de baixa pressão. Projetada para uso ambulatorial, descartável, intravenosa, com um reservatório balão em silicone, uma capa protetora amarela ou âmbar, com proteção UV fotossensível, que reveste o balão e uma extensão com conexão luer lock com proteção UV fotossensível que se liga a um cateter. A taxa de fluxo é pré-determinada pelo fabricante, possui uma válvula de fluxo único que impede o refluxo da solução quando o balão da bomba de infusão é preenchido e filtro de partículas de e 5 μ . Os volumes da bomba são 50, 60, 100, 150, 200, 250 e 275 ml e o fluxo de infusão da solução de 2,3,4, 5, 6, 8, 10 e 20 ml/h.

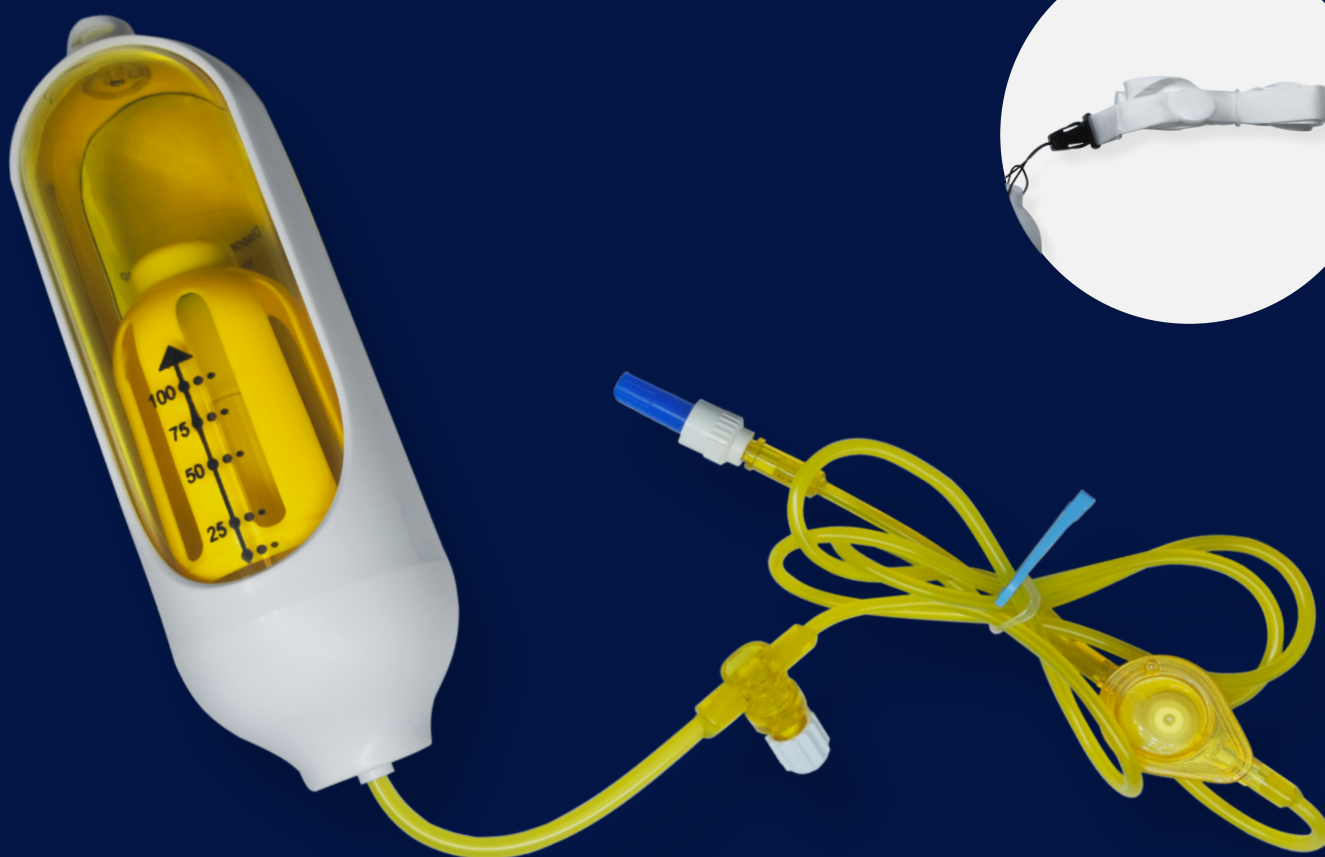

Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

MODELO COM CAPA PROTETORA AMBAR

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F060002001	60	2
F060003001	60	3
F060004001	60	4
F060005001	60	5
F060006001	60	6
F060008001	60	8
F060010001	60	10
F060020001	60	20
F100002001	100	2
F100003001	100	3
F100004001	100	4
F100005001	100	5
F100006001	100	6
F100008001	100	8
F100010001	100	10
F100020001	100	20
F150002001	150	2
F150003001	150	3
F150004001	150	4
F150005001	150	5
F150006001	150	6



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F150008001	150	8
F150010001	150	10
F150020001	150	20
F200002001	200	2
F200003001	200	3
F200004001	200	4
F200005001	200	5
F200006001	200	6
F200008001	200	8
F200010001	200	10
F200020001	200	20
F250002001	250	2
F250003001	250	3
F250004001	250	4
F250005001	250	5
F250006001	250	6
F250008001	250	8
F250010001	250	10
F250020001	250	20
F275002001	275	2
F275003001	275	3
F275004001	275	4



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F275005001	275	5
F275006001	275	6
F275008001	275	8
F275010001	275	10
F275020001	275	20

MODELO COM CAPA PROTETORA AMARELA

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F060002001Y	60	2
F060003001Y	60	3
F060004001Y	60	4
F060005001Y	60	5
F060006001Y	60	6
F060008001Y	60	8
F060010001Y	60	10
F060020001Y	60	20
F100002001Y	100	2
F100003001Y	100	3
F100004001Y	100	4
F100005001Y	100	5
F100006001Y	100	6



Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F100008001Y	100	8
F100010001Y	100	10
F100020001Y	100	20
F150002001Y	150	2
F150003001Y	150	3
F150004001Y	150	4
F150005001Y	150	5
F150006001Y	150	6
F150008001Y	150	8
F150010001Y	150	10
F150020001Y	150	20
F200002001Y	200	2
F200003001Y	200	3
F200004001Y	200	4
F200005001Y	200	5
F200006001Y	200	6
F200008001Y	200	8
F200010001Y	200	10
F200020001Y	200	20
F250002001Y	250	2
F250003001Y	250	3





Bomba de Infusão Intravenosa

UV Fert Medical

CÓDIGO	VOLUME TOTAL (ML)	FLUXO (ML/H)
F250004001Y	250	4
F250005001Y	250	5
F250006001Y	250	6
F250008001Y	250	8
F250010001Y	250	10
F250020001Y	250	20
F275002001Y	275	2
F275003001Y	275	3
F275004001Y	275	4
F275005001Y	275	5
F275006001Y	275	6
F275008001Y	275	8
F275010001Y	275	10
F275020001Y	275	20

