



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE **DIAGNÓSTICO**



Cânula Dirigível de Morrison

Informações técnicas:

Indicada para injeção, aspiração e coleta de amostras por punção percutânea musculoesquelética.

A cânula consiste em um estilete interno, com empunhadura e alavanca, em aço inoxidável AISI 304. Sua cânula externa é fabricada em aço inoxidável. Capaz de fazer uma deflexão de até 10 mm de angulação, proporcionando uma maior dirigibilidade.

- Extremidade distal dirigível e identificada sob orientação de imagem;
- Curva em torno de estruturas sensíveis e áreas perigosas;
- Facilita a colocação precisa da cânula;
- Favorece grandes ajustes em torno de ossos, órgãos ou estruturas neurovasculares;
- Permite pequenos ajustes perto do alvo;
- Possibilita vários ajustes à medida que a cânula está avançando;
- Ponta em estilete que facilita a sua introdução e proporciona suavidade durante o seu avanço.





Cânula Dirigível de Morrison

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
13500	01 Cânula dirigível composta de cânula 21G x 170 mm de comprimento, com 40 mm de extremidade distal flexível. 01 Estilete com alavanca e empunhadura, com 0,68 mm de diâmetro, com 40 mm de extremidade distal flexível.





Cânula para Biópsia de Medula Óssea


com Sistema de Travamento Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia e aspiração de medula óssea, para citologia, infusão de medicamentos e amostra de medula para histologia.

Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade para eficiência no corte. A extremidade distal cônica é especialmente projetada para controlar o fragmento de medula óssea coletado e evitar sua perda acidental (dispositivo automático de controle do fragmento). A empunhadura anatômica desta cânula é resistente e confortável para o operador, além disso, possui uma conexão luer lock para o encaixe de seringas. Acompanha um mandril para a transmissão do fragmento, uma tampa de fechamento, um protetor de segurança e um mandril com sistema de travamento para potencializar a fixação da amostra dentro da cânula.

- Empunhadura anatômica e leve, manipulação confortável e segura;
- O mandril de travamento potencializa a fixação da amostra dentro da cânula, garantindo assim, menor perda na amostragem retirada da cânula do paciente.

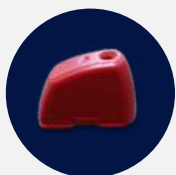

Dispositivo de segurança para descarte da cânula





Cânula para Biópsia de Medula Óssea

com Sistema de Travamento Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBLT0810	08G	10cm
OBLT0815	08G	15cm
OBLT0910	09G	10cm
OBLT0915	09G	15cm
OBLT1110	11G	10cm
OBLT1115	11G	15cm
OBLT1310	13G	10cm







Cânula para Aspiração de Medula Óssea

com Empunhadura Anatômica Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia e aspiração de medula óssea para citologia infusão de medicamentos e amostra de medula para histologia.

Cânula para biópsia esterno-iliaca, com extremidade distal da cânula trifacetada, mandril, dispositivo para regulagem da extensão da cânula, empunhadura anatômica, bloqueio de mandril e conector luer lock para aspiração. Disponível nas versões com ou sem orifícios na extremidade distal e capacidade de regular o comprimento da agulha, permitindo que a agulha seja personalizada de acordo com as necessidades específicas de cada paciente.

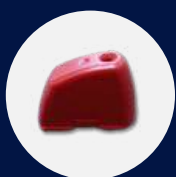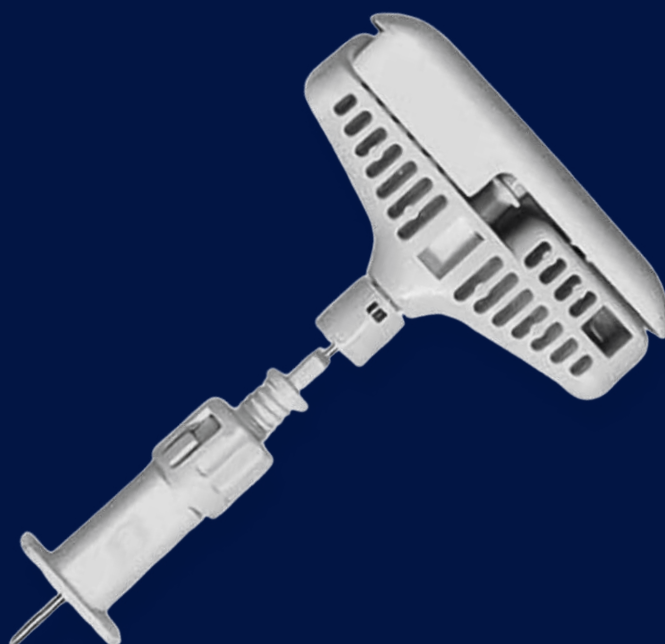

Dispositivo de segurança
para descarte da cânula



Cânula para Aspiração de Medula Óssea

com Empunhadura Anatômica Biomedical

MODELO: SEM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBIL1417/080	14 G	de 17 a 80 mm
OBIL1432/095	14 G	de 32 a 95 mm
OBIL1517/080	15 G	de 17 a 80 mm
OBIL1532/095	15 G	de 32 a 95 mm
OBIL1617/080	16 G	de 17 a 80 mm
OBIL1632/095	16 G	de 32 a 95 mm
OBIL1817/080	18 G	de 17 a 80 mm
OBIL1832/095	18 G	de 32 a 95 mm

MODELO: COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBILE1417/080	14 G	de 17 a 80 mm
OBILE1432/095	14 G	de 32 a 95 mm
OBILE1517/080	15 G	de 17 a 80 mm
OBILE1532/095	15 G	de 32 a 95 mm
OBILE1617/080	16 G	de 17 a 80 mm
OBILE1632/095	16 G	de 32 a 95 mm
OBILE1817/080	18 G	de 17 a 80 mm
OBILE1832/095	18 G	de 32 a 95 mm






Cânula para Aspiração de Medula Óssea

com Empunhadura Ergônômica Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia e aspiração de medula óssea, para citologia, infusão de medicamentos e amostra de medula para histologia.

Cânula para biópsia esterno-iliaca, com extremidade distal da cânula trifacetada, mandril, dispositivo para regulação da extensão da cânula, empunhadura ergonômica, bloqueio de mandril e conector luer lock para aspiração. Disponível nos modelos com orifícios ou sem orifícios na extremidade distal e capacidade de regular o comprimento da agulha, permitindo que a agulha seja personalizada de acordo com as necessidades específicas de cada paciente.

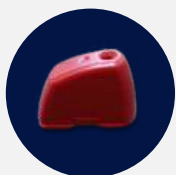

Dispositivo de segurança para descarte da cânula





Cânula para Aspiração de Medula Óssea

com Empunhadura Ergônômica Biomedical

MODELO: SEM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OB1410/075	14 G	de 10 a 75 mm
OB1425/090	14 G	de 25 a 90 mm
OB1510/075	15 G	de 10 a 75 mm
OB1525/090	15 G	de 25 a 90 mm
OB1610/075	16 G	de 10 a 75 mm
OB1625/090	16 G	de 25 a 90 mm
OB1810/075	18 G	de 10 a 75 mm
OB1825/090	18 G	de 25 a 90 mm

MODELO: COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBIE1410/075	14 G	de 10 a 75 mm
OBIE1425/090	14 G	de 25 a 90 mm
OBIE1510/075	15 G	de 10 a 75 mm
OBIE1525/090	15 G	de 25 a 90 mm
OBIE1610/075	16 G	de 10 a 75 mm
OBIE1625/090	16 G	de 25 a 90 mm
OBIE1810/075	18 G	de 10 a 75 mm
OBIE1825/090	18 G	de 25 a 90 mm





Cânula para Biópsia Óssea


Bonopty

Informações técnicas:


Indicada para biópsia óssea coaxial.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade para resistência e eficiência no corte mesmo em ossos muito rígidos e radiopaca. O sistema coaxial da cânula de penetração óssea auxilia a passagem da cânula para biópsia óssea, permitindo múltiplas coletas de fragmentos. A extremidade distal cônica proporciona um controle, não permitindo que o fragmento de medula óssea seja descartado acidentalmente (dispositivo automático de controle do fragmento). Acompanha um mandril, pino e ejedor para expulsão do fragmento. A empunhadura anatômica é resistente, projetada para o conforto do operador, além de possuir conexão luer lock para o encaixe de seringas. Possui um marcador de profundidade com escala a cada 5 mm. A cânula de penetração óssea (citada acima e vendida separadamente), serve como introdutor para esta cânula de biópsia óssea.

- Otimiza o acesso ao osso, mesmo através de ossos espessos;
- Facilita a coleta múltipla de amostras;
- Favorece a obtenção de amostras centrais, com traumas mínimos;
- Extrai amostras com êxito de algumas lesões escleróticas.

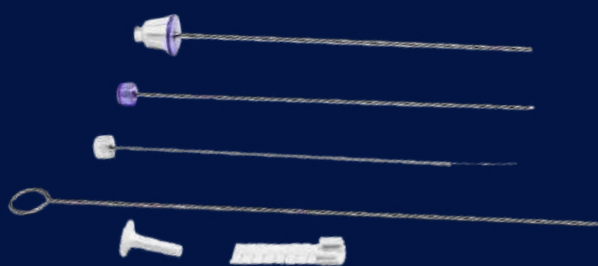

13G

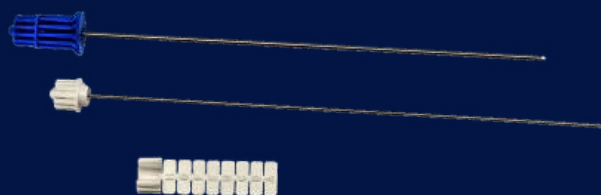

15G





Cânula para Biópsia Óssea

Bonopty

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
10-1063	01 Cânula para Biópsia óssea 15G x 13cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,7mm x 13cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1073	01 Cânula para Biópsia óssea 15G x 16cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,7mm x 16cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1083	01 Cânula para Biópsia óssea 15G x 19,5cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,7mm x 19,5cm; 01 Marcador de profundidade.
12-1273	01 Cânula para Biópsia óssea 13G x 16,5cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,9mm x 16,5cm; 01 Marcador de profundidade.





Cânula para Penetração Óssea

Bonopty

Informações técnicas:

Indicada para biópsia óssea coaxial.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade, para resistência e eficiência no corte mesmo em ossos muito rígidos e radiopaca. O sistema coaxial auxilia a passagem da cânula para biópsia óssea (vendida separadamente), permitindo múltiplas coletas de fragmentos.

Acompanha um estilete e uma cânula auxiliar, ambos em aço inoxidável AISI 420, com ponta em broca para perfuração e marcador de profundidade.

- Otimiza o acesso ao osso, mesmo através de ossos espessos;
- Facilita a coleta múltipla de amostras;
- Favorece a obtenção de amostras centrais, com traumas mínimos;
- Extrai amostras com êxito de algumas lesões escleróticas.



12G



14G





Cânula para Penetração Óssea

Bonopty

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
10-1062	01 Cânula para Penetração óssea 14G x 6,5cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7mm x 9,2cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1072	01 Cânula para Penetração óssea 14G x 9,5cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7mm x 12,2cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1082	01 Cânula para Penetração óssea 14G x 13cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 1,7mm x 16cm; 01 Marcador de profundidade.
12-1272	01 Cânula para Penetração óssea 12G x 10cm Bonopty com estilete; 01 Cânula com ponta em broca para perfuração 2,45mm x 12,7cm; 01 Marcador de profundidade.





Cânula para Biópsia e Aspiração

de Medula Óssea Biomedical

Informações técnicas:


Indicada para biópsia e aspiração de medula óssea para citologia, histologia e infusão de medicamentos.

Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade para eficiência no corte. A extremidade distal cônica é especialmente projetada para controlar o fragmento de medula óssea coletado e evitar sua perda acidental (dispositivo automático de controle do fragmento). A empunhadura anatômica é altamente resistente e confortável para o operador. Além disso, possui conexão luer lock para o encaixe de seringas. Acompanha um mandril para a transmissão do fragmento, uma tampa de fechamento e um protetor de segurança para facilitar a retirada da amostra.

- Empunhadura anatômica e leve, permitindo ao operador manipulação confortável e segura;
- Disponível nos modelos com ou sem orifícios laterais.


OBL

Sem orifícios laterais

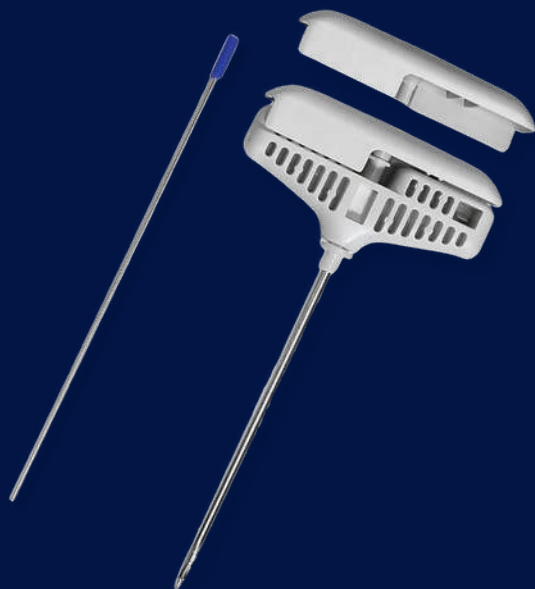

OBLE

Com orifícios laterais

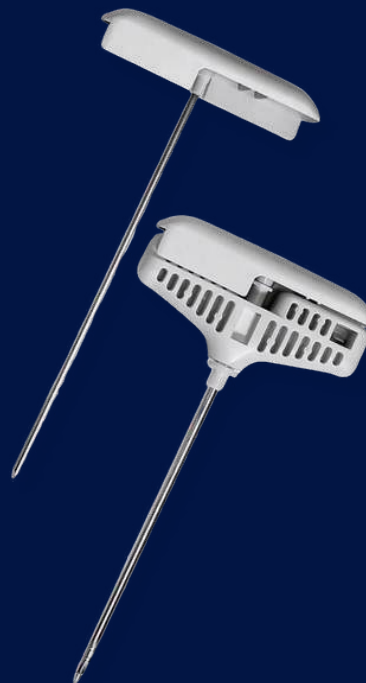

Dispositivo de segurança
para descarte da cânula



Cânula para Biópsia e Aspiração

de Medula Óssea Biomedical

MODELO SEM ORIFÍCIOS LATERAIS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBL0810	08 G	10 cm
OBL0815	08 G	15 cm
OBL0910	09 G	10 cm
OBL0915	09 G	15 cm
OBL1110	11 G	10 cm
OBL1115	11 G	15 cm
OBL1310	13 G	10 cm
OBL1832/095	18 G	de 32 a 95 mm

MODELO COM ORIFÍCIOS LATERAIS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBLE0810	08 G	10 cm
OBLE0815	08 G	15 cm
OBLE0910	09 G	10 cm
OBLE0915	09 G	15 cm
OBLE1110	11 G	10 cm
OBLE1115	11 G	15 cm
OBLE1310	13 G	10 cm





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles


Bioshot Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável e empunhadura em policarbonato, descartável, com limitador de profundidade, graduada e radiopaca. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na lateral da empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento. A empunhadura possui também uma trava de segurança para evitar o disparo acidental.

- Disparo automático por impulsão à mola;
- Material descartável, proporciona maior segurança ao paciente;
- Cânula leve e de fácil manuseio.

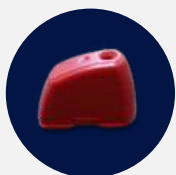

Dispositivo de segurança para descarte da cânula





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Bioshot Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBS1410	14G	10 cm
OBS1415	14G	15 cm
OBS1420	14G	20 cm
OBS1610	16G	10 cm
OBS1615	16G	15 cm
OBS1620	16G	20 cm
OBS1625	16G	25 cm
OBS1810	18G	10 cm
OBS1815	18G	15 cm
OBS1820	18G	20 cm
OBS1825	18G	25 cm





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

para Pistola Automática Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável, para encaixe em pistola automática Biocut C ou Promag 2.2 sem modificação. A cânula possui um ponto biótico, graduado em centímetros, com um limitador de profundidade. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento, com disparo automático, por impulsão à mola.

- Material possibilita duas opções de corte do fragmento.



Dispositivo de segurança
para descarte da cânula



Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

para Pistola Automática Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBE1410	14G	10 cm
OBE1415	14G	15 cm
OBE1420	14G	20 cm
OBE1610	16G	10 cm
OBE1615	16G	15 cm
OBE1620	16G	20 cm
OBE1625	16G	25 cm
OBE1810	18G	10 cm
OBE1815	18G	15 cm
OBE1820	18G	20 cm
OBE1825	18G	25 cm
OBE2015	20G	15 cm
OBE2020	20G	20 cm
OBE2025	20G	25 cm





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles


Semiautomática Coaxial Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável e empunhadura em policarbonato resistente, garantindo segurança e eficiência no procedimento. Descartável e radiopaca, a cânula em formato de guilhotina possui um dispositivo que permite duplo disparo para um corte preciso do fragmento de tecido, empunhadura ergonômica, mandril interno e ranhura, que fornece maior precisão na coleta da amostra. O mecanismo de ação da cânula consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo localizado na empunhadura. Com a opção de selecionar um ou dois centímetros de fragmento, o disparo é feito de forma semiautomática, através de uma impulsão à mola.

- Possibilita a coleta de múltiplos fragmentos de maneira mais eficiente, sem a necessidade de múltiplas punções;
- Dispensa o uso do disparador;
- Material descartável, maior segurança ao paciente por minimizar infecção cruzada;
- Cânula leve e de fácil manuseio.

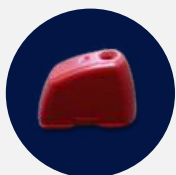

Dispositivo de segurança para descarte da cânula





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Semiautomática Coaxial Biomedical

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
OBDPS1410	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 14G x 10cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 07cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1415	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 14G x 15cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 12cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1420	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 14G x 20cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 17cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1425	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 14G x 25cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 22cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1610	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 16G x 10cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 07cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1615	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 16G x 15cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 12 cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1620	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 16G x 20cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 17cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1810	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 18G x 10cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 07cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1815	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 18G x 15cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 12cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS1820	01 Cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 18G x 20cm; 01 Introduutor em aço inoxidável com 17cm; 01 Dispositivo de segurança para descarte da cânula.





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Semiautomática Coaxial Biomedical

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
OBDPS2015	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 20G x 15 cm; 01 introdutor em aço inoxidável com 12 cm; 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.
OBDPS2020	01 cânula para biópsia de tecidos moles em aço inoxidável 20G x 20 cm; 01 introdutor em aço inoxidável com 17 cm; 01 dispositivo de segurança para descarte da cânula.





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles


Semiautomática Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável e empunhadura em policarbonato resistente, descartável e radiopaca, a cânula em formato de guilhotina possui um dispositivo que permite duplo disparo para um corte preciso do fragmento de tecido, empunhadura ergonômica, mandril interno e uma ranhura que fornece maior precisão na coleta da amostra. Com um ponto biótico graduado em centímetros com um limitador de profundidade. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento, com disparo semiautomático, por impulsão à mola.

- Material descartável, maior segurança ao paciente por minimizar infecção cruzada;
- Cânula leve e de fácil manuseio.

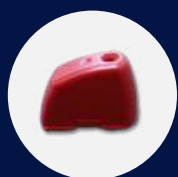

Dispositivo de segurança para descarte da cânula



Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Semiautomática Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBDS1410	14G	10 cm
OBDS1415	14G	15 cm
OBDS1420	14G	20 cm
OBDS1610	16G	10 cm
OBDS1615	16G	15 cm
OBDS1620	16G	20 cm
OBDS1810	18G	10 cm
OBDS1815	18G	15 cm
OBDS1820	18G	20 cm
OBDS1825	18G	25 cm
OBDS2010	20G	10 cm
OBDS2015	20G	15 cm





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles


Manual Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável e empunhadura em policarbonato resistente, descartável e radiopaca, a cânula em formato de guilhotina, empunhadura ergonômica, mandril interno e uma ranhura que fornece maior precisão na coleta da amostra. Com um ponto biótico graduada em centímetros, e com limitador de profundidade em lesões que necessitam penetrações inferiores a 2 cm. Após a coleta, é possível retirar o mandril com o fragmento e utilizar a cânula como um introdutor para aspirar ou infundir líquidos, aumentando a versatilidade do produto. A conexão luer lock, garante uma conexão segura com outros equipamentos médicos.

- Dispositivo que permite duplo disparo para um corte preciso do fragmento de tecido;
- Material descartável, maior segurança ao paciente por minimizar infecção cruzada;
- Cânula leve e de fácil manuseio.

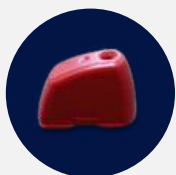

Dispositivo de segurança para descarte da cânula





Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Manual Biomedical

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
OBM1410	14G x 10 cm
OBM1415	14G x 15 cm
OBM1420	14G x 20 cm
OBM1610	16G x 10 cm
OBM1615	16G x 15 cm
OBM1620	16G x 20 cm
OBM1810	18G x 10 cm
OBM1815	18G x 15 cm
OBM1820	18G x 20 cm
OBM1825	18G x 25 cm





Cânula para Dispositivo


para Biópsia de Tecidos Moles Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável para encaixe em dispositivo automático de biópsia (vendido separadamente). A cânula possui um ponto biótico, graduado em centímetros, com um limitador de profundidade. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento, com disparo automático, por impulsão à mola.

- Material possibilita duas opções de corte do fragmento.

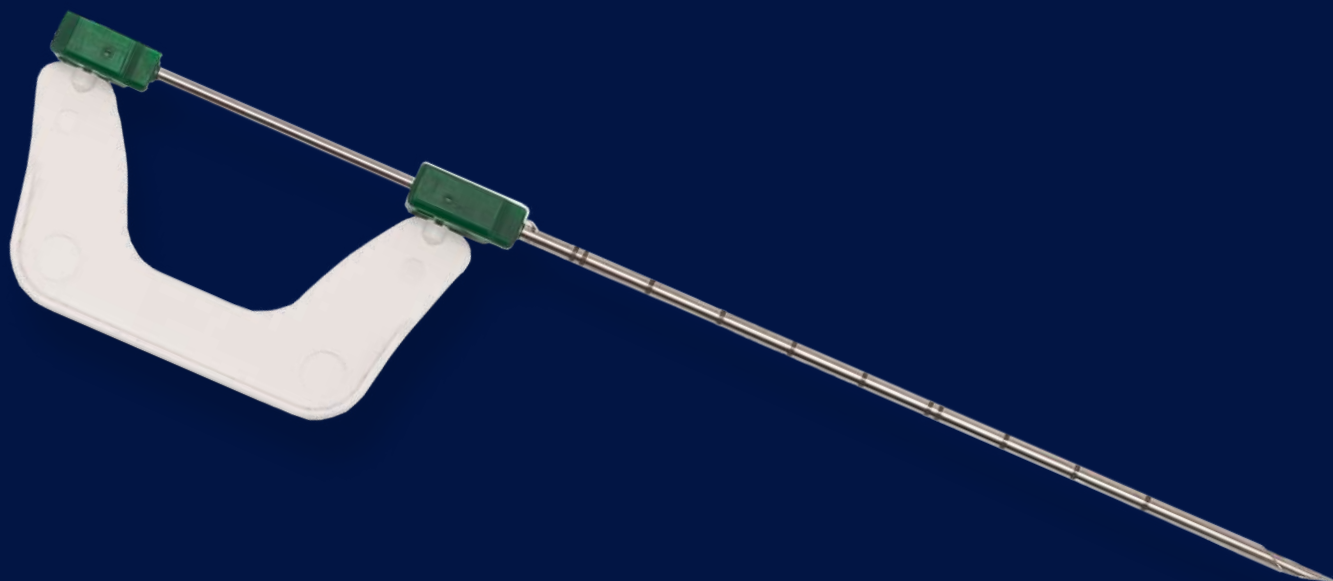

Dispositivo de segurança
para descarte da cânula





Cânula para Dispositivo

para Biópsia de Tecidos Moles Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OPG1410	14G	10 cm
OPG1415	14G	15 cm
OPG1420	14G	20 cm
OPG1610	16G	10 cm
OPG1615	16G	15 cm
OPG1620	16G	20 cm
OPG1625	16G	25 cm
OPG1810	18G	10 cm
OPG1815	18G	15 cm
OPG1820	18G	20 cm
OPG1825	18G	25 cm
OPG2015	20G	15 cm
OPG2020	20G	20 cm
OPG2025	20G	25 cm






Cateter para Histerossalpingografia

Panpac

Informações técnicas:

Indicado para infusão de contraste radiológico no colo uterino, com o objetivo de opacificar o útero e as trompas uterinas. Dessa forma, é possível avaliar a arquitetura interna do trato reprodutivo feminino e obter informações valiosas sobre anormalidades tubárias e uterinas em pacientes que apresentam infertilidade primária ou secundária, abortos recorrentes ou monitorização de cirurgias tubárias.

Fabricado em poliuretano com ponta atraumática fechada com orifício lateral. Possui balão em silicone, que favorece uma posição correta do cateter e haste rígida, para facilitar a introdução do cateter. Possui uma via com válvula e torneira para insuflar o balão, e outra via com conector luer lock na extremidade proximal para infusão de contraste e seringa para insuflação do balão.

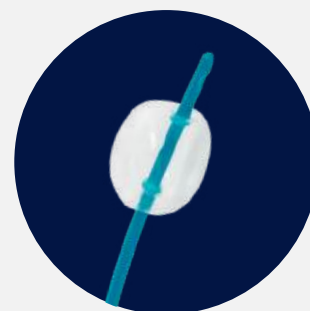



Cateter para Histerossalpingografia

Panpac

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BA05F	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia em poliuretano, com balão em silicone de 2ml, 5Fr. x 30cm; 01 Seringa de 3ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.
BA07F	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia em poliuretano, com balão em silicone de 3,5ml, 7Fr. x 30cm; 01 Seringa de 5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.





Cateter para Histerossalpingografia


Softinjector Rimos

Informações técnicas:

Indicado para infusão de contraste radiológico no colo uterino, com o objetivo de opacificar o útero e as trompas uterinas, avaliando, com isso, a arquitetura interna do trato reprodutivo feminino e fornecendo valiosas informações em relação a anormalidades tubárias e uterinas em pacientes com infertilidade primária ou secundária, abortos recorrentes ou monitorização de cirurgia tubária.

Fabricado em poliamida, radiopaco, graduado, ponta atraumática, com balão oval que garante uma posição correta do cateter, introdutor rígido com um posicionador móvel, válvula com torneira para insuflar o balão, conector luer lock na extremidade proximal para infusão de contraste e seringa para insuflação do balão.

- Possui o tamanho intermediário de 6Fr, sendo mais assertivo nas diferentes possibilidades de dimensões do colo do útero.

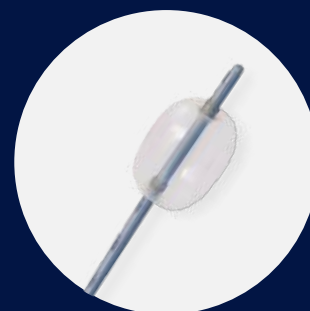



Cateter para Histerossalpingografia

Softinjector Rimos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
720250	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 7Fr. 01 Seringa de 2,5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.
720226	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 6Fr. 01 Seringa de 2,5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.
720240	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 5Fr. 01 Seringa de 2,5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.





Cânula para Biópsia Hepática


Modificada Segundo Menghini Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia hepática, segundo técnica de Menghini modificada, por meio de aspiração do tecido.

Fabricada em aço inoxidável, possui uma seringa de 10 ml equipada com uma trava metálica, sendo possível manter a pressão negativa dentro do cilindro para facilitar a aspiração do material. O mandril de alta penetração é acoplado ao êmbolo e possui uma ranhura interna radiopaca para maior segurança ao paciente. Cânula graduada em centímetros com um limitador de profundidade, permitindo um controle mais preciso da inserção durante a coleta da amostra. Na técnica de Menghini modificada, a cânula é inserida por perfuração até o fígado e, em seguida, o êmbolo é puxado para realizar a aspiração do tecido. Acompanha dispositivo de segurança para descarte da cânula.

- Dispensa o uso de bisturi, pois possui mandril com ponta perfurante;
- A técnica Menghini é mais simples, rápida e permite um corte preciso em tecidos mais fragilizados.

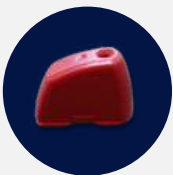

Dispositivo de segurança
para descarte da cânula





Cânula para Biópsia Hepática

Modificada Segundo Menghini Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBC1610	16 G	10 cm
OBC1615	16 G	15 cm
OBC1620	16 G	20 cm
OBC1625	16 G	25 cm
OBC1710	17 G	10 cm
OBC1715	17 G	15 cm
OBC1720	17 G	20 cm
OBC1725	17 G	25 cm
OBC1810	18 G	10 cm
OBC1815	18 G	15 cm
OBC1820	18 G	20 cm
OBC1825	18 G	25 cm
OBC1910	19 G	10 cm
OBC1915	19 G	15 cm
OBC1920	19 G	20 cm
OBC1925	19 G	25 cm
OBC2010	20 G	10 cm
OBC2015	20 G	15 cm
OBC2020	20 G	20 cm
OBC2025	20 G	25 cm
OBC2110	21 G	10 cm
OBC2115	21 G	15 cm





Cânula para Biópsia Hepática

Modificada Segundo Menghini Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBC2120	21 G	20 cm
OBC2125	21 G	25 cm
OBC2210	22 G	10 cm
OBC2215	22 G	15 cm
OBC2220	22 G	20 cm
OBC2225	22 G	25 cm





Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical


Informações técnicas:

Indicada para biópsia aspirativa de amostras citológicas e histológicas.

Fabricada em aço inoxidável, graduada em centímetros e com conexão luer lock. O mandril possui uma ranhura interna radiopaca, garantindo maior segurança para o paciente. Disponível em vários diâmetros e comprimentos, que incluem modelos de pontas Chiba, Wescott e Franseen para maior possibilidade de escolha do profissional, de acordo com a especificação do local, e material a ser coletado.



Ponta Chiba (OME)

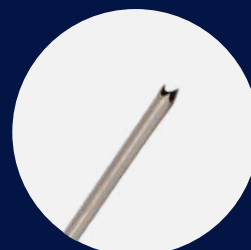

Ponta Franseen (OMEF)



Ponta Westcott (OMEW)



Dispositivo de segurança
para descarte da cânula



Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA CHIBA		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OME1805	18 G	05 cm
OME1810	18 G	10 cm
OME1815	18 G	15 cm
OME1820	18 G	20 cm
OME1830	18 G	30 cm
OME1910	19 G	10 cm
OME1915	19 G	15 cm
OME1920	19 G	20 cm
OME1930	19 G	30 cm
OME2005	20 G	05 cm
OME2010	20 G	10 cm
OME2015	20 G	15 cm
OME2020	20 G	20 cm
OME2030	20 G	30 cm
OME2110	21 G	10 cm
OME2115	21 G	15 cm
OME2120	21 G	20 cm
OME2130	21 G	30 cm
OME2205	22 G	05 cm



Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA CHIBA		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OME2210	22 G	10 cm
OME2215	22 G	15 cm
OME2220	22 G	20 cm
OME2305	23 G	05 cm
OME2310	23 G	10 cm
OME2315	23 G	15 cm
OME2320	23 G	20 cm
OME2505	25 G	05 cm
OME2510	25 G	10 cm





Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA WESCOTT

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OMEW1810	18 G	10 cm
OMEW1815	18 G	15 cm
OMEW1820	18 G	20 cm
OMEW2010	20 G	10 cm
OMEW2015	20 G	15 cm
OMEW2020	20 G	20 cm
OMEW2110	21 G	10 cm
OMEW2115	21 G	15 cm
OMEW2120	21 G	20 cm
OMEW2210	22 G	10 cm
OMEW2215	22 G	15 cm
OMEW2220	22 G	20 cm





Cânula para Biópsia Citológica

Biomedical

MODELO COM PONTA FRANSEEN

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OMEF1810	18 G	10 cm
OMEF1815	18 G	15 cm
OMEF1820	18 G	20 cm
OMEF2010	20 G	10 cm
OMEF2015	20 G	15 cm
OMEF2020	20 G	20 cm
OMEF2110	21 G	10 cm
OMEF2115	21 G	15 cm
OMEF2120	21 G	20 cm
OMEF2210	22 G	10 cm
OMEF2215	22 G	15 cm
OMEF2220	22 G	20 cm
OMEF2310	23 G	10 cm
OMEF2315	23 G	15 cm
OMEF2320	23 G	20 cm







Cânula para Marcação de Nódulo Mamário

Informações técnicas:

Indicada para localização de nódulos mamários não palpáveis no pré-operatório ou apenas para visualização.

Fabricada em aço inoxidável, graduada, possui um fio metálico com gancho, limitador de profundidade e indicador de posicionamento para o gancho. A cânula é implantada por meio do método invasivo estudado por Kopans, que consiste em posicionar um gancho metálico na lesão mamária. O gancho metálico permanece no parênquima mamário e permite verificar a localização. Esse método apresenta a vantagem de reduzir a quantidade de tecido mamário retirado em comparação com outros métodos tradicionais, permitindo um procedimento mais preciso e menos invasivo.

- Permite acesso ao nódulo mamário de forma mais assertiva, com menor perda de tecido mamário.

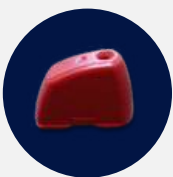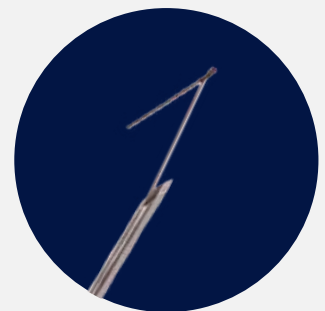

Dispositivo de segurança
para descarte da cânula





Cânula para Marcação

de Nódulo Mamário

MODELO OIM: CÂNULA COM FIO METÁLICO COM 01 GANCHO

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OIM1810	18 G	10 cm
OIM2007	20 G	07 cm
OIM2010	20 G	10 cm
OIM2107	21 G	07 cm
OIM2110	21 G	10 cm

MODELO OIMX: CÂNULA COM FIO METÁLICO COM 02 GANCHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OIMX1807	18 G	07 cm
OIMX1810	18 G	10 cm
OIMX2007	20 G	07 cm
OIMX2010	20 G	10 cm





www.medika.com.br