



Cânula para Biópsia Óssea


Bonopty

Informações técnicas:


Indicada para biópsia óssea coaxial.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade para resistência e eficiência no corte mesmo em ossos muito rígidos e radiopaca. O sistema coaxial da cânula de penetração óssea auxilia a passagem da cânula para biópsia óssea, permitindo múltiplas coletas de fragmentos. A extremidade distal cônica proporciona um controle, não permitindo que o fragmento de medula óssea seja descartado acidentalmente (dispositivo automático de controle do fragmento). Acompanha um mandril, pino e ejeter para expulsão do fragmento. A empunhadura anatômica é resistente, projetada para o conforto do operador, além de possuir conexão luer lock para o encaixe de seringas. Possui um marcador de profundidade com escala a cada 5 mm. A cânula de penetração óssea (citada acima e vendida separadamente), serve como introdutor para esta cânula de biópsia óssea.

- Otimiza o acesso ao osso, mesmo através de ossos espessos;
- Facilita a coleta múltipla de amostras;
- Favorece a obtenção de amostras centrais, com traumas mínimos;
- Extrai amostras com êxito de algumas lesões escleróticas.

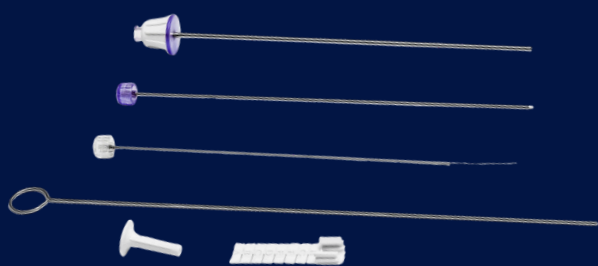

13G

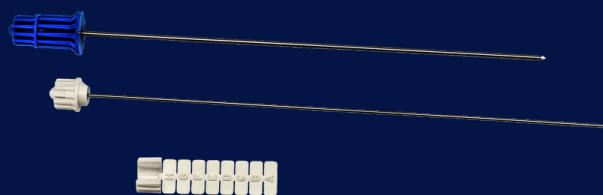

15G





Cânula para Biópsia Óssea

Bonopty

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
10-1063	01 Cânula para Biópsia óssea 15G x 13cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,7mm x 13cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1073	01 Cânula para Biópsia óssea 15G x 16cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,7mm x 16cm; 01 Marcador de profundidade.
10-1083	01 Cânula para Biópsia óssea 15G x 19,5cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,7mm x 19,5cm; 01 Marcador de profundidade.
12-1273	01 Cânula para Biópsia óssea 13G x 16,5cm Bonopty com estilete; 01 Mandril 1,9mm x 16,5cm; 01 Marcador de profundidade.

