



Cânula para Biópsia Hepática


Modificada Segundo Menghini Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia hepática, segundo técnica de Menghini modificada, por meio de aspiração do tecido.

Fabricada em aço inoxidável, possui uma seringa de 10 ml equipada com uma trava metálica, sendo possível manter a pressão negativa dentro do cilindro para facilitar a aspiração do material. O mandril de alta penetração é acoplado ao êmbolo e possui uma ranhura interna radiopaca para maior segurança ao paciente. Cânula graduada em centímetros com um limitador de profundidade, permitindo um controle mais preciso da inserção durante a coleta da amostra. Na técnica de Menghini modificada, a cânula é inserida por perfuração até o fígado e, em seguida, o êmbolo é puxado para realizar a aspiração do tecido. Acompanha dispositivo de segurança para descarte da cânula.

- Dispensa o uso de bisturi, pois possui mandril com ponta perfurante;
- A técnica Menghini é mais simples, rápida e permite um corte preciso em tecidos mais fragilizados.

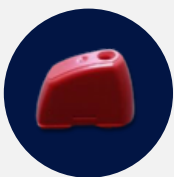

Dispositivo de segurança
para descarte da cânula





Cânula para Biópsia Hepática

Modificada Segundo Menghini Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBC1610	16 G	10 cm
OBC1615	16 G	15 cm
OBC1620	16 G	20 cm
OBC1625	16 G	25 cm
OBC1710	17 G	10 cm
OBC1715	17 G	15 cm
OBC1720	17 G	20 cm
OBC1725	17 G	25 cm
OBC1810	18 G	10 cm
OBC1815	18 G	15 cm
OBC1820	18 G	20 cm
OBC1825	18 G	25 cm
OBC1910	19 G	10 cm
OBC1915	19 G	15 cm
OBC1920	19 G	20 cm
OBC1925	19 G	25 cm
OBC2010	20 G	10 cm
OBC2015	20 G	15 cm
OBC2020	20 G	20 cm
OBC2025	20 G	25 cm
OBC2110	21 G	10 cm
OBC2115	21 G	15 cm





Cânula para Biópsia Hepática

Modificada Segundo Menghini Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBC2120	21 G	20 cm
OBC2125	21 G	25 cm
OBC2210	22 G	10 cm
OBC2215	22 G	15 cm
OBC2220	22 G	20 cm
OBC2225	22 G	25 cm

