



## Cânula para Biópsia de Tecidos Moles



Semiautomática Biomedical

### Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável e empunhadura em policarbonato resistente, descartável e radiopaca, a cânula em formato de guilhotina possui um dispositivo que permite duplo disparo para um corte preciso do fragmento de tecido, empunhadura ergonômica, mandril interno e uma ranhura que fornece maior precisão na coleta da amostra. Com um ponto biótico graduado em centímetros com um limitador de profundidade. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento, com disparo semiautomático, por impulsão à mola.

- Material descartável, maior segurança ao paciente por minimizar infecção cruzada;
- Cânula leve e de fácil manuseio.

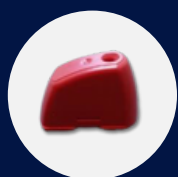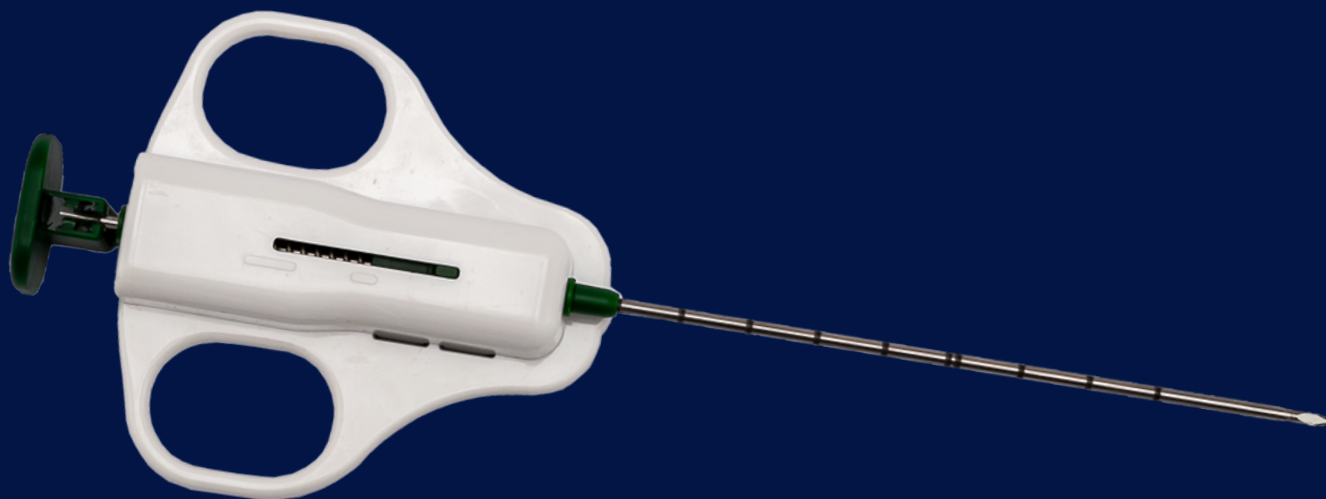

Dispositivo de segurança para descarte da cânula





# Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Semiautomática Biomedical

| CÓDIGO   | DIÂMETRO EXTERNO | COMPRIMENTO |
|----------|------------------|-------------|
| OBDS1410 | 14G              | 10 cm       |
| OBDS1415 | 14G              | 15 cm       |
| OBDS1420 | 14G              | 20 cm       |
| OBDS1610 | 16G              | 10 cm       |
| OBDS1615 | 16G              | 15 cm       |
| OBDS1620 | 16G              | 20 cm       |
| OBDS1810 | 18G              | 10 cm       |
| OBDS1815 | 18G              | 15 cm       |
| OBDS1820 | 18G              | 20 cm       |
| OBDS1825 | 18G              | 25 cm       |
| OBDS2010 | 20G              | 10 cm       |
| OBDS2015 | 20G              | 15 cm       |

