



Cânula para Biópsia de Tecidos Moles



Manual Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável e empunhadura em policarbonato resistente, descartável e radiopaca, a cânula em formato de guilhotina, empunhadura ergonômica, mandril interno e uma ranhura que fornece maior precisão na coleta da amostra. Com um ponto biótico graduada em centímetros, e com limitador de profundidade em lesões que necessitam penetrações inferiores a 2 cm. Após a coleta, é possível retirar o mandril com o fragmento e utilizar a cânula como um introdutor para aspirar ou infundir líquidos, aumentando a versatilidade do produto. A conexão luer lock, garante uma conexão segura com outros equipamentos médicos.

- Dispositivo que permite duplo disparo para um corte preciso do fragmento de tecido;
- Material descartável, maior segurança ao paciente por minimizar infecção cruzada;
- Cânula leve e de fácil manuseio.

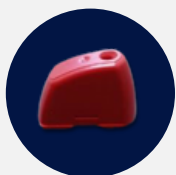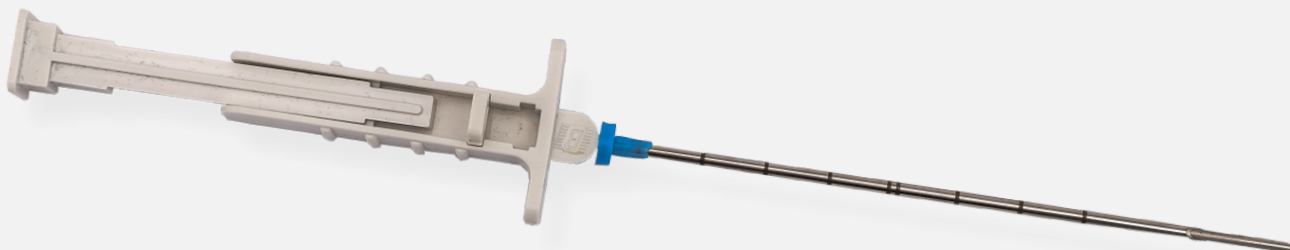

Dispositivo de segurança para descarte da cânula



Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Manual Biomedical

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
OBM1410	14G x 10 cm
OBM1415	14G x 15 cm
OBM1420	14G x 20 cm
OBM1610	16G x 10 cm
OBM1615	16G x 15 cm
OBM1620	16G x 20 cm
OBM1810	18G x 10 cm
OBM1815	18G x 15 cm
OBM1820	18G x 20 cm
OBM1825	18G x 25 cm

