



Cânula para Biópsia de Tecidos Moles


Bioshot Biomedical

Informações técnicas:

Indicada para biópsia de tecidos moles, para análise histológica das amostras.

Fabricada em aço inoxidável e empunhadura em policarbonato, descartável, com limitador de profundidade, graduada e radiopaca. Seu mecanismo de ação consiste em um corte de fragmento regulado por um dispositivo na lateral da empunhadura, com seleção para um ou dois centímetros de fragmento. A empunhadura possui também uma trava de segurança para evitar o disparo acidental.

- Disparo automático por impulsão à mola;
- Material descartável, proporciona maior segurança ao paciente;
- Cânula leve e de fácil manuseio.

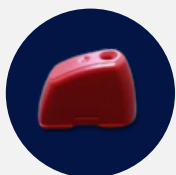

Dispositivo de segurança para descarte da cânula



Cânula para Biópsia de Tecidos Moles

Bioshot Biomedical

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
OBS1410	14G	10 cm
OBS1415	14G	15 cm
OBS1420	14G	20 cm
OBS1610	16G	10 cm
OBS1615	16G	15 cm
OBS1620	16G	20 cm
OBS1625	16G	25 cm
OBS1810	18G	10 cm
OBS1815	18G	15 cm
OBS1820	18G	20 cm
OBS1825	18G	25 cm

