




Cateter para Histerossalpingografia

Panpac

Informações técnicas:

Indicado para infusão de contraste radiológico no colo uterino, com o objetivo de opacificar o útero e as trompas uterinas. Dessa forma, é possível avaliar a arquitetura interna do trato reprodutivo feminino e obter informações valiosas sobre anormalidades tubárias e uterinas em pacientes que apresentam infertilidade primária ou secundária, abortos recorrentes ou monitorização de cirurgias tubárias.

Fabricado em poliuretano com ponta atraumática fechada com orifício lateral. Possui balão em silicone, que favorece uma posição correta do cateter e haste rígida, para facilitar a introdução do cateter. Possui uma via com válvula e torneira para insuflar o balão, e outra via com conector luer lock na extremidade proximal para infusão de contraste e seringa para insuflação do balão.

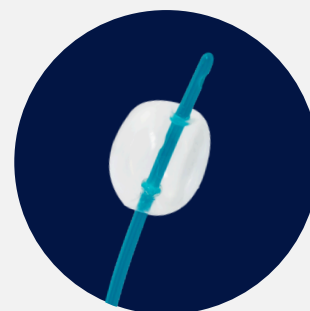



Cateter para Histerossalpingografia

Panpac

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BA05F	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia em poliuretano, com balão em silicone de 2ml, 5Fr. x 30cm;
	01 Seringa de 3ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.
BA07F	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia em poliuretano, com balão em silicone de 3,5ml, 7Fr. x 30cm;
	01 Seringa de 5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.

