

Vedtome Esfincterótomo





Descartável

Informações técnicas:


Indicado para acessar o esfíncter duodenal por meio de um endoscópio, permitindo a incisão no esfíncter com o uso de corrente elétrica de alta frequência e a tração do fio de corte.

Composto por empunhadura, conector do eletrodo, conector de injeção de líquido, conector de fio-guia, tubo externo, fio de corte, tubo de fixação e fio de sustentação.

Disponível em duas versões: ponta tipo arco e tipo agulha. Ambas as versões possuem comprimentos de 700, 1100, 1900 e 2000 mm, com comprimento da ponta tipo agulha de 5 mm e da ponta tipo arco de 3, 7, 15 e 30 mm. O comprimento do fio de corte é de 2 mm na versão tipo agulha e de 20, 25, 30 e 35 mm na versão tipo arco. Compatível com canais de endoscópios com diâmetro igual ou superior a 2,8 mm.

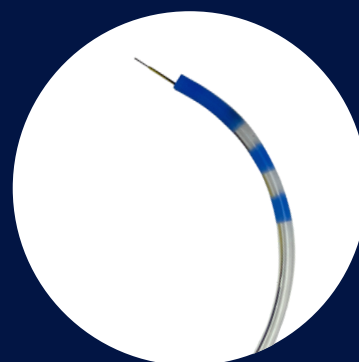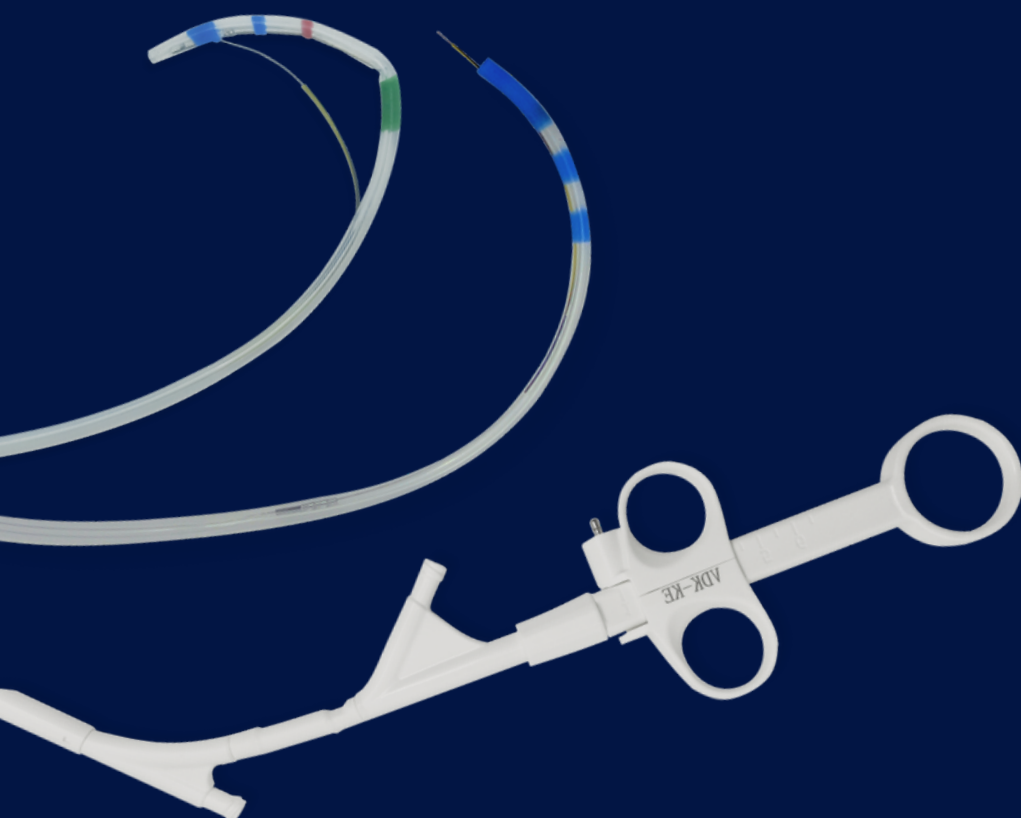

MODELO AGULHA

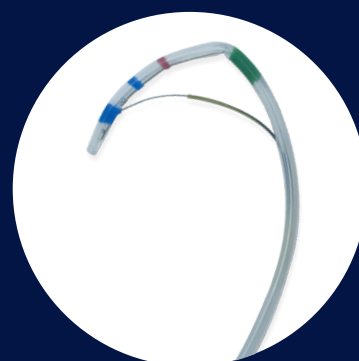

MODELO ARCO



Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO

CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-0320070-A	3	20	700
VDK-KE-0325070-A	3	25	700
VDK-KE-0330070-A	3	30	700
VDK-KE-0335070-A	3	35	700
VDK-KE-0720070-A	7	20	700
VDK-KE-0725070-A	7	25	700
VDK-KE-0730070-A	7	30	700
VDK-KE-0735070-A	7	35	700
VDK-KE-1520070-A	15	20	700
VDK-KE-1525070-A	15	25	700
VDK-KE-1530070-A	15	30	700
VDK-KE-1535070-A	15	35	700
VDK-KE-3020070-A	30	20	700
VDK-KE-3025070-A	30	25	700
VDK-KE-3030070-A	30	30	700
VDK-KE-3035070-A	30	35	700
VDK-KE-0320110-A	3	20	1100
VDK-KE-0325110-A	3	25	1100
VDK-KE-0330110-A	3	30	1100
VDK-KE-0335110-A	3	35	1100



Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO

CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-0720110-A	7	20	1100
VDK-KE-0725110-A	7	25	1100
VDK-KE-0730110-A	7	30	1100
VDK-KE-0735110-A	7	35	1100
VDK-KE-1520110-A	15	20	1100
VDK-KE-1525110-A	15	25	1100
VDK-KE-1530110-A	15	30	1100
VDK-KE-1535110-A	15	35	1100
VDK-KE-3020110-A	30	20	1100
VDK-KE-3025110-A	30	25	1100
VDK-KE-3030110-A	30	30	1100
VDK-KE-3035110-A	30	35	1100
VDK-KE-0320190-A	3	20	1900
VDK-KE-0325190-A	3	25	1900
VDK-KE-0330190-A	3	30	1900
VDK-KE-0335190-A	3	35	1900
VDK-KE-0720190-A	7	20	1900
VDK-KE-0725190-A	7	25	1900
VDK-KE-0730190-A	7	30	1900
VDK-KE-0735190-A	7	35	1900



Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO

CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-1520190-A	15	20	1900
VDK-KE-1525190-A	15	25	1900
VDK-KE-1530190-A	15	30	1900
VDK-KE-1535190-A	15	35	1900
VDK-KE-3020190-A	30	20	1900
VDK-KE-3025190-A	30	25	1900
VDK-KE-3030190-A	30	30	1900
VDK-KE-3035190-A	30	35	1900
VDK-KE-0320200-A	3	20	2000
VDK-KE-0325200-A	3	25	2000
VDK-KE-0330200-A	3	30	2000
VDK-KE-0335200-A	3	35	2000
VDK-KE-0720200-A	7	20	2000
VDK-KE-0725200-A	7	25	2000
VDK-KE-0730200-A	7	30	2000
VDK-KE-0735200-A	7	35	2000
VDK-KE-1520200-A	15	20	2000
VDK-KE-1525200-A	15	25	2000
VDK-KE-1530200-A	15	30	2000
VDK-KE-1535200-A	15	35	2000



Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO

CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-3020200-A	30	20	2000
VDK-KE-3025200-A	30	25	2000
VDK-KE-3030200-A	30	30	2000
VDK-KE-3035200-A	30	35	2000

MODELO: PONTA TIPO AGULHA

CÓDIGO	COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DA FACA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-0002070-B	5	2	700
VDK-KE-0002110-B	5	2	1100
VDK-KE-0002190-B	5	2	1900
VDK-KE-0002200-B	5	2	2000

