




Cesto Endoscópico

para Remoção de Cálculos Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicado para remoção de cálculos no ducto biliar, ou remoção de corpos estranhos no trato digestivo alto e baixo, com o auxílio de um endoscópio.

O tubo do cesto é fabricado em aço inoxidável 316, com 2.3 mm de diâmetro externo e 2000 mm de comprimento, sendo muito flexível e revestido em PTFE para reduzir a fricção do aço inoxidável no canal de trabalho do endoscópio. O cesto possui 16 cm de fio em nitinol que antecede o cesto. Na extremidade distal, é composto de fios de nitinol, disponível nos formatos diamante ou espiral, composto de 4, 6 e 8 fios. A empunhadura é fabricada de ABS Lustran, fácil de manusear, e possui um injetor lateral para infusão de contraste.

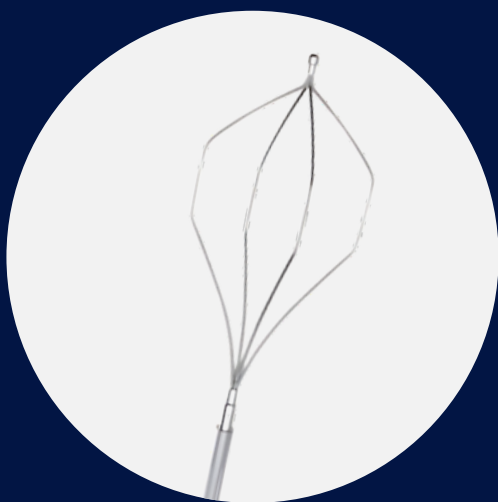

CESTO EM FORMATO DIAMANTE



CESTO EM FORMATO ESPIRAL



Cesto Endoscópico

para Remoção de Cálculos Jiuhong Medical

MODELO NO FORMATO DE DIAMANTE COM 4 FIOS

CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-22-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	22 mm
JHY-BAS-23-200-25-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	25 mm
JHY-BAS-23-200-30-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm
JHY-BAS-23-200-35-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	35 mm

MODELO NO FORMATO DE DIAMANTE COM 8 FIOS

CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-S8-A-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-30-S8-A-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm

MODELO NO FORMATO DE ESPIRAL COM 6 FIOS

CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO DO TUBO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-N6-C-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-30-N6-C-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm

MODELO: CESTO EM FORMATO DE ESPIRAL COM 08 FIOS

CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO DO TUBO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-N8-C-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-30-N8-C-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm

