


Cânula Fina para Biópsia

Ecoendoscópica Medika

Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostras da mucosa do trato gastrointestinal, por meio do canal de trabalho de um ecoendoscópio. O uso de uma cânula fina para biópsia citológica por aspiração melhora a escolha do local da punção, tornando-a mais precisa.

Adequada para uso em ecoendoscópios rígidos e flexíveis, que possuam um canal de trabalho igual ou superior a 2.0 mm. Cânula ecogênica disponível nos diâmetros 19, 20, 22 e 25 G, com comprimento de 0 a 8 cm, bainha 1,7 mm de diâmetro externo por 70 e 140 cm de comprimento. Possui uma empunhadura ergonômica graduada, permitindo ajustar o comprimento da cânula e da bainha conforme necessário. Possui um mandril pré-inserido em nitinol, proporcionando maior flexibilidade durante o procedimento.

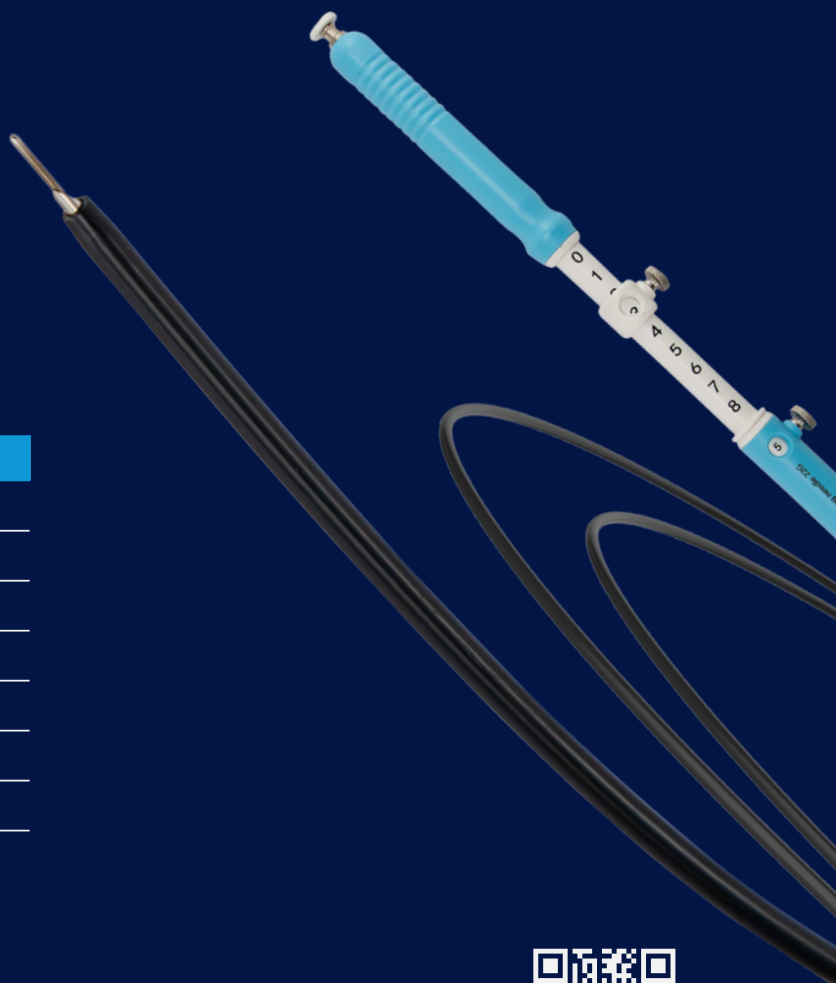

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
UN18-19/70	19 G	70 cm
UN18-20/70	20 G	70 cm
UN18-22/70	22 G	70 cm
UN18-25/70	25 G	70 cm
UN18-19/140	19 G	140 cm
UN18-20/140	20 G	140 cm
UN18-22/140	22 G	140 cm
UN18-25/140	25 G	140 cm



medika[®]