


Pinça Endoscópica

para Apreensão com Rede JiuHong Medical

Informações técnicas:

Indicada para a remoção de corpos estranhos no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, flexível e revestido em PTFE, para reduzir a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos tamanhos 1,8mm e 2,5 mm de diâmetro externo por 1600 e 2300 mm de comprimento. O laço em sua extremidade distal é fabricado em aço inoxidável e possui uma rede em nylon que facilita a captação do corpo estranho. Empunhadura de fácil manipulação, giratória, em ABS Lustran, que permite a rotação do laço.

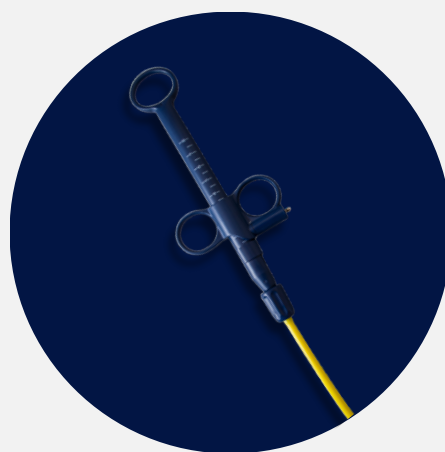

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	TAMANHO DO LAÇO	CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO
JHY-FG-18-160-C1	1,8 mm	1600 mm	20 x 50 mm	2 mm
JHY-FG-18-160-C2	1,8 mm	1600 mm	25 x 55 mm	2 mm
JHY-FG-18-160-C3	1,8 mm	1600 mm	30 x 60 mm	2 mm
JHY-FG-18-160-C4	1,8 mm	1600 mm	40 x 75 mm	2 mm
JHY-FG-25-230-C1	2,5 mm	2300 mm	20 x 50 mm	2,8 mm
JHY-FG-25-230-C2	2,5 mm	2300 mm	25 x 55 mm	2,8 mm
JHY-FG-25-230-C3	2,5 mm	2300 mm	30 x 60 mm	2,8 mm
JHY-FG-25-230-C4	2,5 mm	2300 mm	40 x 75 mm	2,8 mm

