

Cateter de Duplo Lúmen

para Hemodiálise D-Line

Informações técnicas:

Indicado para acesso vascular de curta permanência para a hemodiálise, hemoperfusão e aférese. Os vasos sanguíneos de implantação do cateter são: veia jugular interna, veia subclávia e veia femoral. Com permanência de até 29 dias de implantação.

Fabricado com Poliuretano termossensível, radiopaco e com diâmetro externo de 11 Fr. Possui um lúmen contínuo, com três orifícios laterais na extremidade distal na via arterial, anel de sutura rotatório, com extensões Same Side (curvas para o mesmo lado) e retas. Além disso, possui pinças com informações sobre o volume de cada lúmen e conectores Luer lock em cada via do cateter. Acompanha um dilatador de veia 11 Fr x 150 mm, um guia metálico em Nitinol 0.97mm x 700 mm em jota, uma agulha introdutora (apenas para uso na introdução do fio guia) de 18G x 7 cm e duas tampinhas de injeção.




Cateter de Duplo Lúmen


para Hemodiálise D-Line

Informações técnicas:

Componentes do Kit

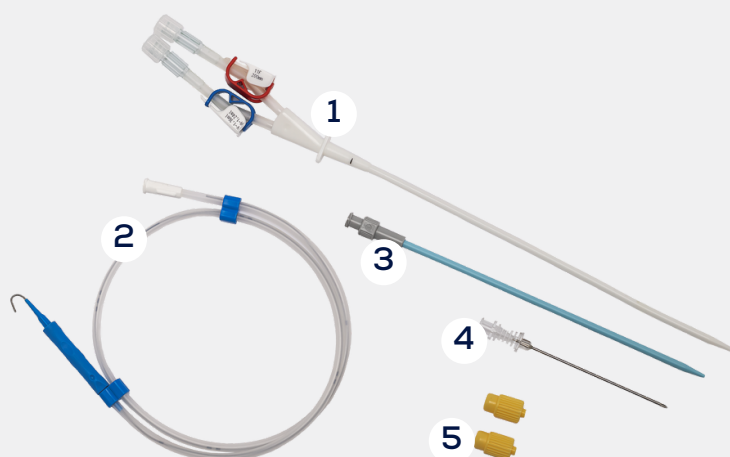

- 1 Cateter
- 2 Fio guia em Nitinol, resistente a dobras
- 3 Dilatador
- 4 Agulha introdutora
- 5 Tampas de injeção com sistema de travamento Luer Lock

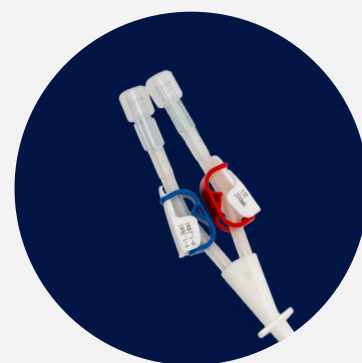

Extensões retas



Extensões curvas



Cateter de Duplo Lúmen

para Hemodiálise D-Line

Gráfico de Fluxo

Cateter de Duplo Lúmen Extra Fluxo 6,5 Fr


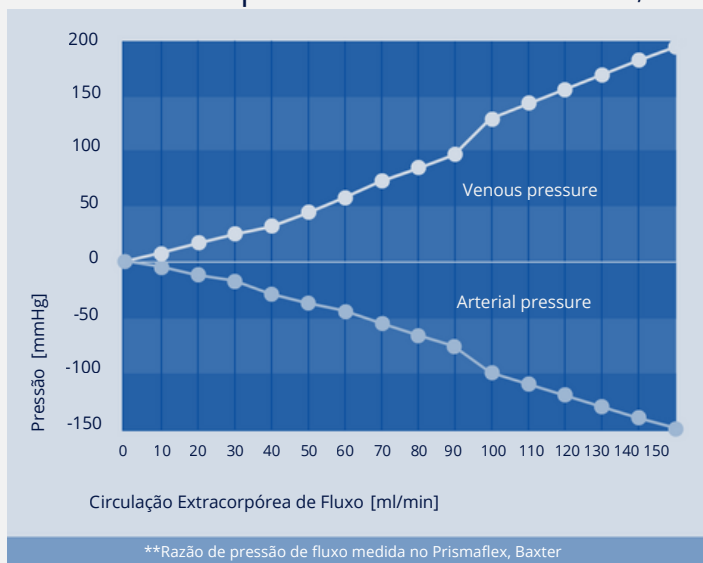


Gráfico de Fluxo

Cateter de Duplo Lúmen Extra Fluxo 8 Fr

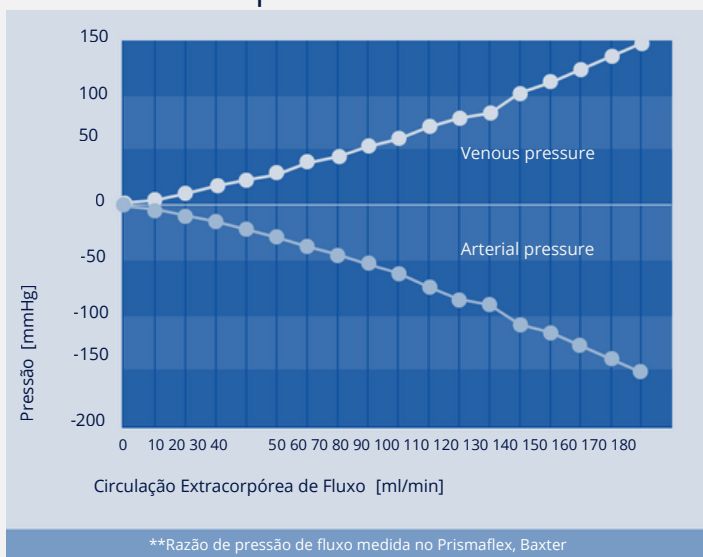

Cateter de Duplo Lúmen

para Hemodiálise D-Line

EXTENSÕES RETAS		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
PKDL11P125	11 Fr	12,5 cm
PKDL11P150	11 Fr	15 cm
PKDL11P175	11 Fr	17,5 cm
PKDL11P200	11 Fr	20 cm
PKDL11P250	11 Fr	25 cm

EXTENSÕES CURVAS (SAME SIDE)		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
PKDL11P125R	11 Fr	12,5 cm
PKDL11P150R	11 Fr	15 cm
PKDL11P175R	11 Fr	17,5 cm
PKDL11P200R	11 Fr	20 cm
PKDL11P250R	11 Fr	25 cm

