

Cateter de Duplo Lúmen

para Hemodiálise High Flow

Informações técnicas:

Indicado para acesso vascular de curta permanência para hemodiálise, hemoperfusão e aférese. Os vasos sanguíneos para implantação do cateter são: veia jugular interna, veia subclávia e veia femoral. Com permanência de até 29 dias de implantação.

Fabricado em poliuretano termossensível, radiopaco e com diâmetro externo de 11 e 13 Fr. Possui um lúmen contínuo, sem orifícios laterais, que otimiza o fluxo sanguíneo e reduz a formação de coágulos. A extremidade distal tem um formato hemodinâmico, com extensões Same Side (curvas para o mesmo lado) e retas. Além disso, possui pinças com informações sobre o volume de cada lúmen e conectores luer lock em cada via do cateter. Acompanha um mandril já inserido no lúmen venoso, para facilitar a introdução do cateter, um dilatador de veia 12 ou 13 Fr x 150 mm, um guia metálico em nitinol 0.035" x 70 cm em jota, uma agulha introdutora (apenas para uso na introdução do fio guia) de 18G x 7 cm e duas tampinhas de injeção.

Cateterização por meio da Técnica Seldinger.




Cateter de Duplo Lúmen

para Hemodiálise High Flow

Informações técnicas:

Componentes do Kit

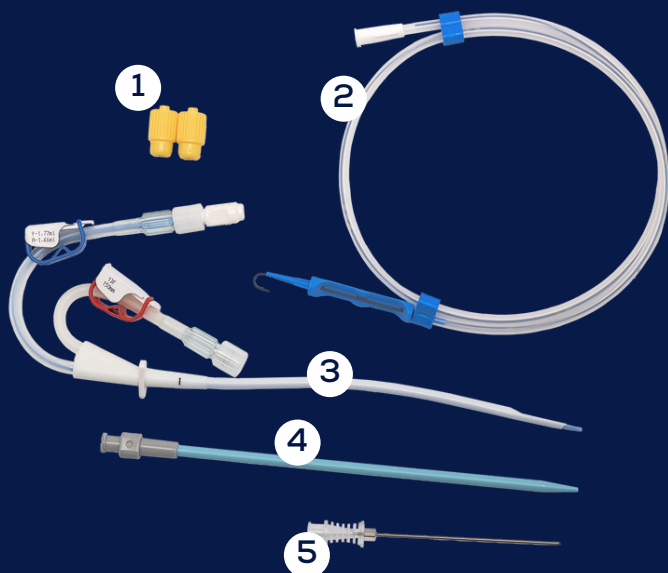

- 1 Tampas de injeção com sistema de travamento Luer Lock
- 2 Fio guia em Nitinol, resistente a dobras
- 3 Cateter
- 4 Dilatador
- 5 Agulha introdutora



Extensões retas



Extensões curvas




Cateter de Duplo Lúmen

para Hemodiálise High Flow

Gráfico de Fluxo

High Flow Duplo Lúmen 13 Fr**

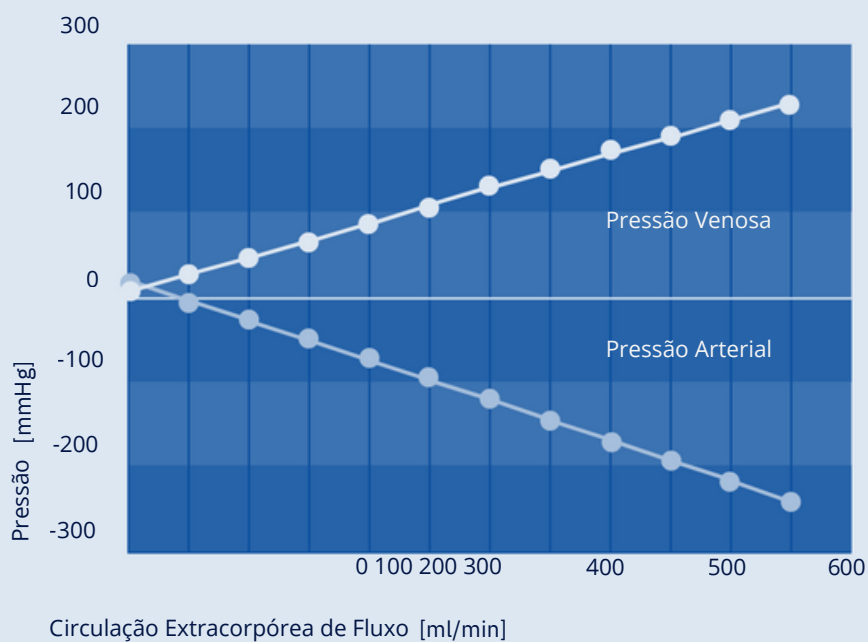

** PKHF13PH300 / valor médio do cateter I-10, cada medição I-3 (fluxo da veia cava: 1,7 L/min)



Cateter de Duplo Lúmen

para Hemodiálise High Flow

EXTENSÕES RETAS

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
PKHF11P150	11 Fr	15 cm
PKHF11P175	11 Fr	17,5 cm
PKHF11P200	11 Fr	20 cm
PKHF11P250	11 Fr	25 cm
PKHF13PH150	13 Fr	15 cm
PKHF13PH175	13 Fr	17,5 cm
PKHF13PH200	13 Fr	20 cm
PKHF13PH250	13 Fr	25 cm

EXTENSÕES SAME SIDE (CURVA PARA O MESMO LADO)

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
PKHF11P150R	11 Fr	15 cm
PKHF11P175R	11 Fr	17,5 cm
PKHF11P200R	11 Fr	20 cm
PKHF11P250R	11 Fr	25 cm
PKHF13PH150R	13 Fr	15 cm
PKHF13PH175R	13 Fr	17,5 cm
PKHF13PH200R	13 Fr	20 cm
PKHF13PH250R	13 Fr	25 cm

