


Cateter de Duplo Lúmen

Alto Fluxo Reto Medika

Informações técnicas:

Indicado como acesso vascular venoso de curta duração, destinado à realização de sessões de hemodiálise. O cateter é fabricado em poliuretano termossensível e radiopaco, disponível nos diâmetros 11 Fr e 13 Fr. e com 15; 17,5; 20 e 25 cm de comprimento. Possui lúmen contínuo sem orifícios laterais, favorecendo o fluxo sanguíneo e reduzindo a formação de coágulos. A extremidade distal apresenta formato hemodinâmico, com extensões retas, clamps identificadores e conectores luer lock com volumes impressos.

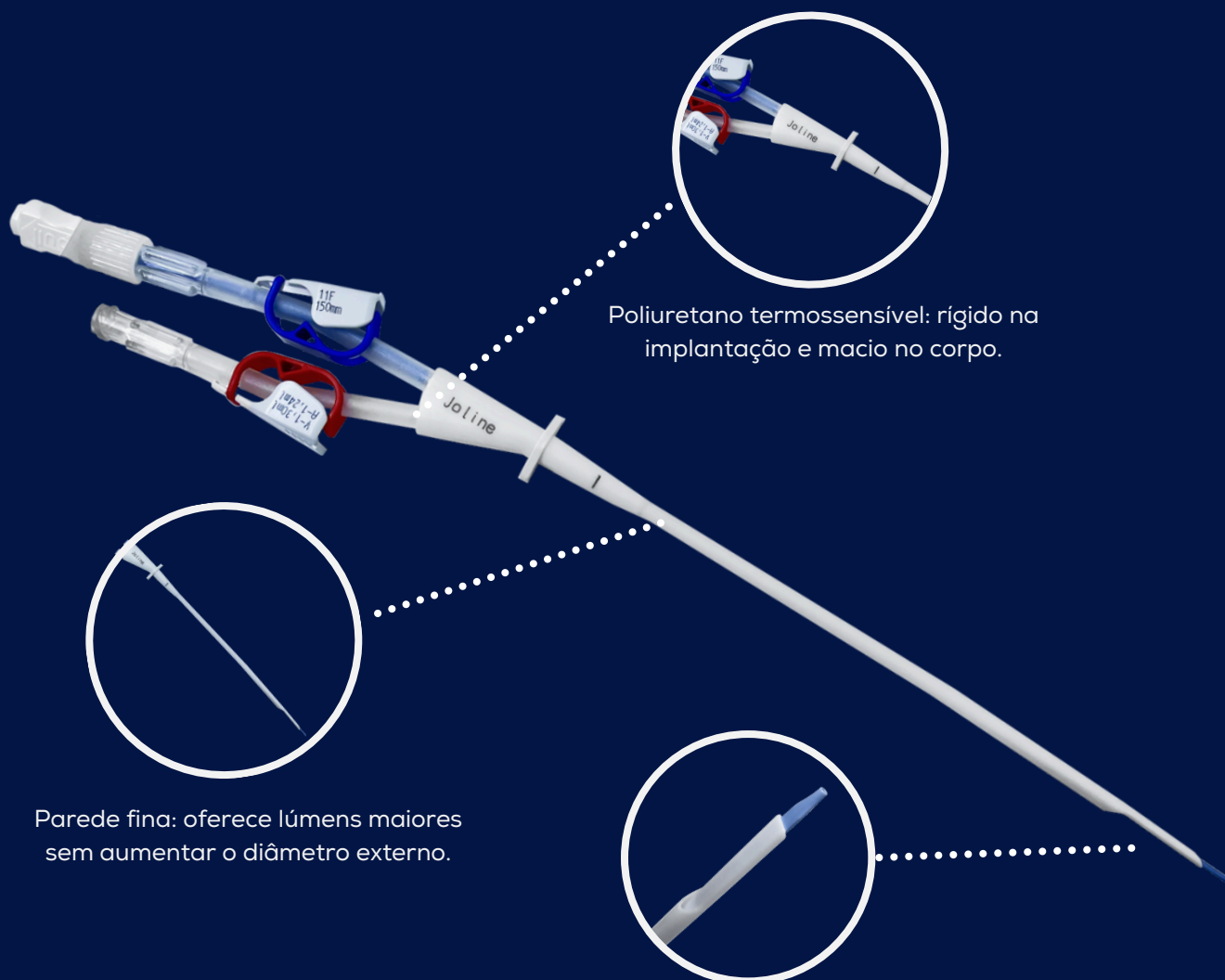


Cateter de Duplo Lúmen

Alto Fluxo Reto Medika

Informações técnicas:

O conjunto acompanha:

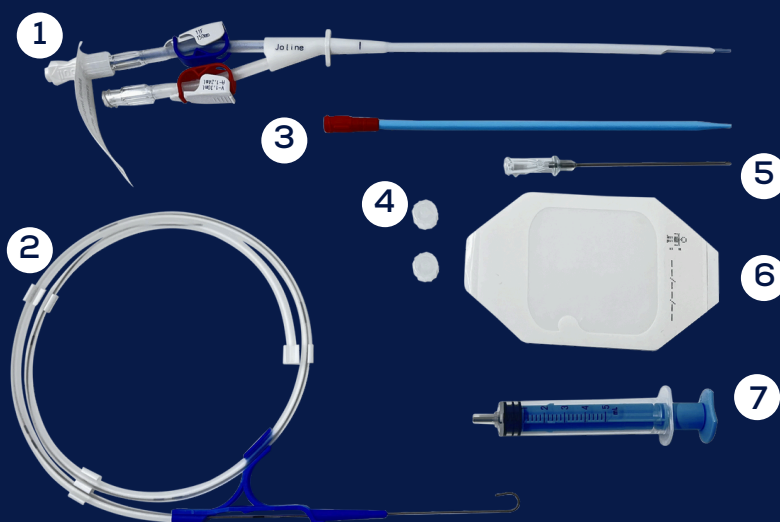

- 1 Mandril pré-inserido no lúmen venoso para facilitar a introdução do cateter;
- 2 Fio guia metálico em nitinol
- 3 Dilatador de veia
- 4 Duas tampas de injeção
- 5 Agulha introdutora
- 6 Curativo transparente em filme de poliuretano
- 7 Seringa de Raulerson 5 ml, fenestrada e com êmbolo vazado, permitindo a passagem do fio guia sem desconexão do conjunto, reduzindo risco de embolia gasosa e contaminação.




Cateter de Duplo Lúmen

Alto Fluxo Reto Medika

Informações técnicas:

Relação Fluxo/Pressão com fluxo sanguíneo de 0 a 550 ml/min²

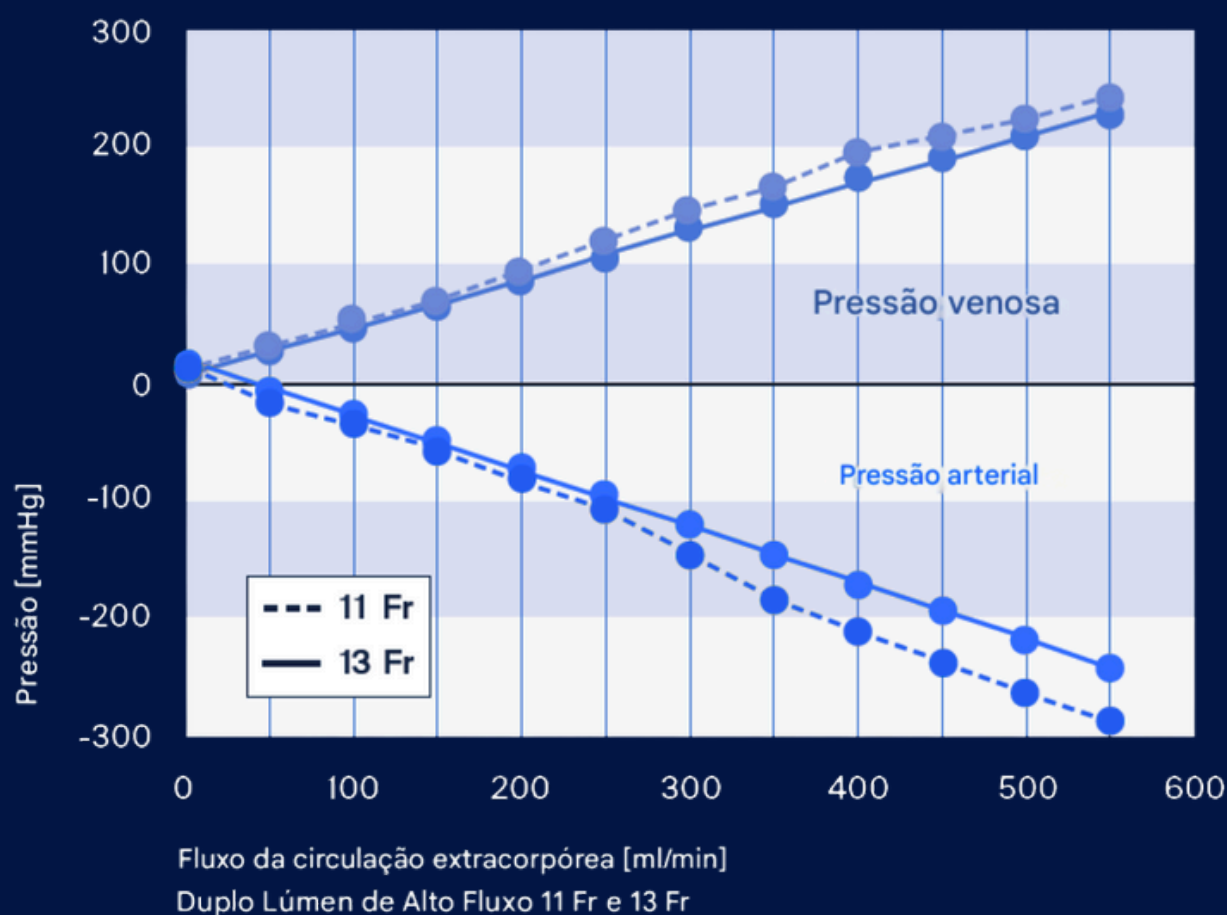

CLINICAL RESEARCH LABORATORY – CRO LS MEDCAP GMBH.

Avaliação ex vivo de cateteres: média de 10 unidades, com 3 medições por cateter (fluxo na veia cava: 1,7 L/min). Alemanha, s.d.



Cateter de Duplo Lúmen

Alto Fluxo Reto Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MCDAF1115R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 11 Fr x 15 cm 01 mandril em poliuretano 16 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 12 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock
MCDAF1117R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 11 Fr x 17,5 cm 01 mandril em poliuretano 18,5 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 12 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock
MCDAF1120R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 11 Fr x 20 cm 01 mandril em poliuretano 21 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 12 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock
MCDAF1125R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 11 Fr x 25 cm 01 mandril em poliuretano 26 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 12 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MCDAF1315R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 13 Fr x 15 cm 01 mandril em poliuretano 16 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.038" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 13 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock
MCDAF1317R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 13 Fr x 17,5 cm 01 mandril em poliuretano 18,5 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.038" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 13 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock
MCDAF1320R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 13 Fr x 20 cm 01 mandril em poliuretano 21 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.038" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 13 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock
MCDAF1325R	01 cateter em poliuretano duplo lúmen reto alto fluxo 13 Fr x 25 cm 01 mandril em poliuretano 26 cm 01 agulha introdutora 18G x 07 cm 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.038" x 70 cm com ponta macia em jota 01 dilatador de veia 13 Fr x 15 cm 01 seringa de Raulerson 01 curativo transparente filme em poliuretano 02 tampas de injeção luer lock 02 tampas protetoras luer lock

