



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS

2023



medika

CATÁLOGO DE **NEONATOLOGIA**




Cateter Central de Inserção

Periférica PICC-Nate

Informações técnicas:

Indicado para acesso ao sistema venoso central neonatal por inserção periférica, o PICC (Cateter Central de Inserção Periférica) é utilizado principalmente quando há necessidade de acesso venoso por um período superior a três dias. É recomendado nos casos de: Antibioticoterapia, hidratação venosa, nutrição parenteral, infusões de concentrações de glicose acima de 12,5% e infusões de medicamentos vasoativos.

A versão Teco Flex é fabricada em poliuretano Tecoflex de lúmen único, radiopaco, graduado, ponta atraumática, com anel de fixação em poliuretano. A versão Silicone PICC - NATE é fabricada em silicone, também radiopaco e graduado, com uma ponta atraumática e um anel de fixação em silicone. O Cateter PICC - NATE com hub estendido elimina a necessidade de extensão, proporcionando um distanciamento entre o cateter e a pele do bebê, minimizando a irritação da pele e o risco de infecção.

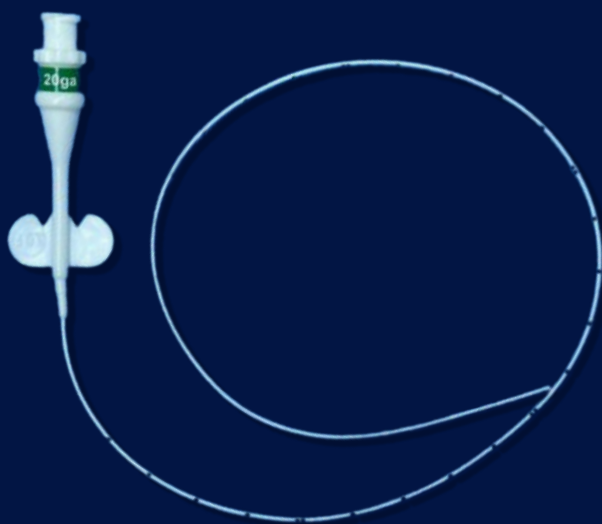

Cateter Central de Inserção

Periférica PICC-Nate

COMPONENTES DO KIT

DESCRIÇÃO

- 01 Cateter central de inserção periférica Picc-Nate® (em poliuretano Tecoflex ou silicone);
- 01 Introdutor **peelaway**;
- 01 Seringa com agulha (material: aço inoxidável ASTM 304 e policarbonato);
- 01 Curativo transparente (Material: filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico hipoalergênico);
- 08 Gases de material 100% algodão (4,0 x 4,0);
- 08 Gases de material 100% algodão (2,0 x 2,0);
- 01 Campo fenestrado (Material: polipropileno);
- 01 Campo simples (Material: polipropileno);
- 02 réguas (Material: papel número 60 off-set, tinta - PMS541 - Azul);
- 01 Pinça de ponta curva (Material: aço inoxidável 420);
- 01 Tesoura (Material: aço inoxidável 420);
- 01 Garrote (Material: algodão + Fio de poliéster);
- 01 Pacote com swab alcoólico (Material: álcool a 70% e água);
- 01 pacote com povidine iodado (Material: ácido cítrico, fosfato dissodium, óxido hidrid de sódio, água, monoxinol-9);
- 03 Tiras adesivas (Material: poliéster elastodieno).

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM POLIURETANO TECOFLEX PICC-NATE

CÓDIGO	TAMANHO X COMPRIMENTO	GA	DIÂMETRO DO LÚMEN	VOLUME DO PRIME	VELOCIDADE PICC (ML/HR)	INTRODUTOR PEEL AWAY	
				PICC	PICC	GA	COMP.
PC-2PP	1,9Fr x 35 cm	23	0,36 mm	0,10 ml	>30	22	25 mm
PC-3PP	3Fr x 35 cm	20	0,51 mm	0,10 ml	>30	19	35 mm

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM SILICONE PICC-NATE®

CÓDIGO	TAMANHO X COMPRIMENTO	GA	DIÂMETRO DO LÚMEN	VOLUME DO PRIME	VELOCIDADE PICC (ML/HR)	INTRODUTOR PEEL AWAY	
				PICC	PICC	GA	COMP.
PC-2PS	1,9Fr x 35 cm	24	0,36 mm	0,10 ml	>30	22	25 mm
PC-2LPS*	1,9Fr x 35 cm	24	0,36 mm	0,10 ml	>30	22	25 mm
PC-3PS	3Fr x 35 cm	20	0,51 mm	0,43 ml	>30	19	35 mm
PC-3LPS*	3Fr x 35 cm	20	0,51 mm	0,43 ml	>30	19	35 mm





Introdutor Peel Away

Informações técnicas:

Indicado para acessar o sistema venoso central através de inserção periférica em neonatos, permitindo a inserção do cateter.

O Introdutor peel away é um dispositivo composto por um tubo de aço inoxidável, cuja extremidade é levemente assimétrica para facilitar a fixação de uma manopla. É compatível exclusivamente com os cateteres PICC-Nate® de poliuretano e silicone (vendidos separadamente). Disponível em dois tamanhos (25 mm e 35 mm). A camisa introdutora, fabricada em polietileno, serve como apoio para a mão do profissional durante a inserção do tubo de aço no espaço subcutâneo.



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	MODELO
PEEL 2	22G	25 mm	Para cateteres 1,9 Fr
PEEL 3	19G	35 mm	Para cateteres 3,0 Fr





Cateter Umbilical

em Poliuretano Pergo

Informações técnicas:

Indicado para a cateterização de veias e artérias do cordão umbilical em recém-nascidos, permite a administração de fluidos, medicamentos e soluções de nutrição parenteral, além de possibilitar a coleta de amostra de sangue para análise laboratorial. Essa abordagem evita a necessidade de múltiplas punções em vasos periféricos, minimizando a dor e o estresse para o bebê.

Fabricado em poliuretano termossensível, radiopaco, disponível em diâmetros externos de 3,5, 5,0 e 7 Fr. Possui marcação centimetrada, abrangendo comprimentos de 4 cm até 25 cm, 30 cm ou 40 cm. A extremidade distal é arredondada e atraumática, enquanto a extremidade proximal com um conector luer lock.



CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
05TD0225	3,5 Fr	30 cm
05TD1721	3,5 Fr	40 cm
05TD0268	5,0 Fr	30 cm
05TD1722	5,0 Fr	40 cm
05TD0269	7,0 Fr	30 cm
05TD1723	7,0 Fr	40 cm





www.medika.com.br