



Seringa Aspirativa de Válvula


Dupla para Cânulas de Karman GTSC

Informações técnicas:

Indicada para aspiração intra uterina através da conexão às cânulas de Karman (vendidas separadamente) nos casos de evacuação do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo, entre 4 a 12 semanas de gestação, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorreia, indicados por um médico.

Seu funcionamento baseia-se na aspiração manual do conteúdo do endométrio, utilizando uma cânula de Karman (vendida separadamente) conectada a uma seringa de válvula dupla não estéril, que gera pressão negativa para o processo.

A seringa acompanha um frasco de 5 ml de silicone médico líquido para lubrificação do anel de vedação, além de um anel de vedação sobressalente em polietileno de baixa densidade e uma presilha plástica extra, garantindo maior durabilidade e praticidade no uso.

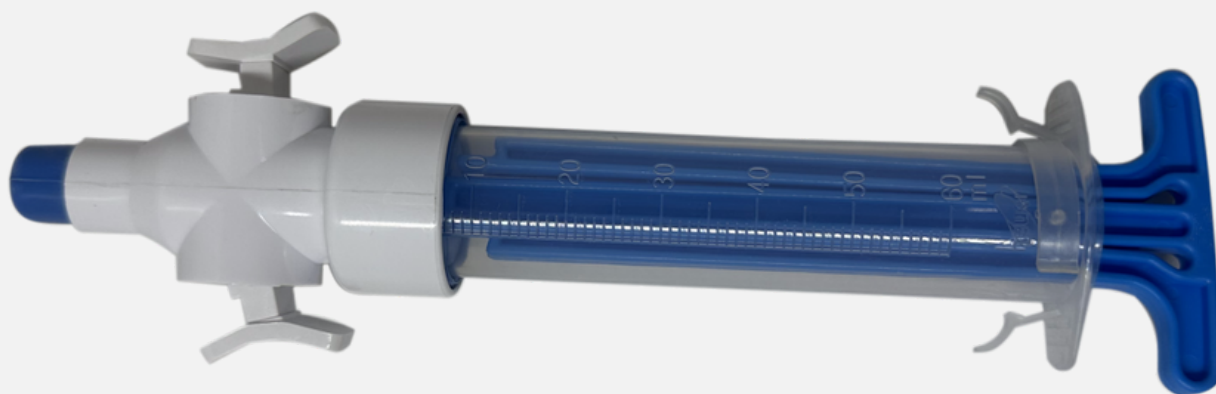

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MVA	Seringa aspirativa para cânulas de Karman, com válvula dupla

