



Compartilhando Soluções que

Preservam Vidas



Conheça a Medika

Desde a nossa fundação, **há mais de 32 anos**, trilhamos um caminho sólido, baseado em compromisso e excelência, com conquistas notáveis ao oferecer soluções inovadoras que transformam o cuidado ao paciente. Com uma fábrica própria e parcerias estratégicas, garantimos a qualidade e agilidade na produção e fornecimento de produtos que preservam vidas, impactando **mais de 16 milhões de pessoas**.

Essa trajetória é marcada pela dedicação à **qualidade, inovação e compromisso com a saúde e o bem-estar**. Estamos comprometidos com uma missão que transcende os negócios: **preservar vidas**. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de cuidado e dedicação!



Linha completa de
Endoscopia




Endoscopia

Clip Endoscópico

Hemoclip Medika

Indicado para posicionamento de clipe endoscópico em tecidos do trato gastrointestinal, em casos diversos.

- Corpo do clipe revestido em polietileno (PE), com diâmetro de 2.5 mm;
- Extremidade distal possui um clipe com abertura de 11, 13 e 16 mm, que possibilita abertura quantas vezes forem necessárias para posicionamento adequado na lesão;
- Capacidade de rotação 360°, facilita o manuseio e proporciona maior segurança no posicionamento do clipe;
- Comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

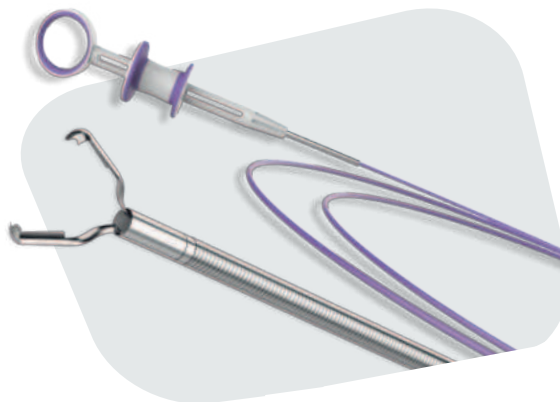

Vedtome Esfincterótomo



Descartável

Indicado para acessar o esfíncter duodenal por meio de um endoscópio, permitindo a incisão no esfíncter com o uso de corrente elétrica de alta frequência e a tração do fio de corte.

- Comprimento da ponta tipo agulha de 5 mm e da ponta tipo arco de 3, 7, 15 e 30 mm;
- Disponível em duas versões: ponta tipo arco e tipo agulha. Comprimentos de 700, 1100, 1900 e 2000 mm;
- O comprimento do fio de corte é de 2 mm na versão tipo agulha e de 20, 25, 30 e 35 mm na versão tipo arco;
- Compatível com canais de endoscópios com diâmetro igual ou superior a 2,8 mm.



Cateter Balão

Endoscópico Biliar JiuHong Medical




Indicado para remoção de cálculos no ducto biliar com um balão e infusão de meio de contraste, com o auxílio de um endoscópio.

- Fabricado em Pebax;
- O corpo do cateter possui diâmetro de 7.5 Fr. e comprimento de 2000 mm;
- Compatível com canal de trabalho igual ou maior que 2.8 mm;
- Balão com marcadores radiopacos disponível em diversos tamanhos, com diâmetros progressivos variando entre 8.5 a 16 mm;
- Possui três vias de acesso: um para o fio guia, outro para a infusão de contraste e o terceiro para insuflar o balão.

Cesto Endoscópico

para Remoção de Cálculos JiuHong Medical

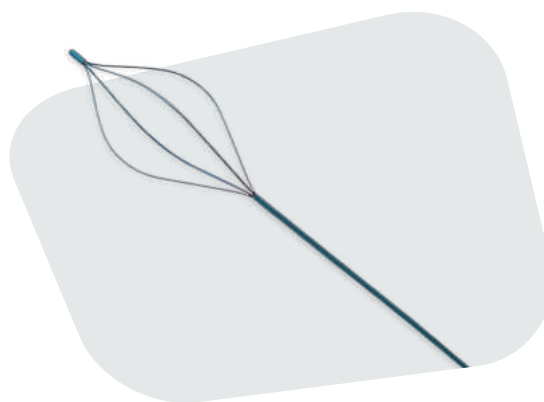

Indicado para remoção de cálculos no ducto biliar, ou remoção de corpos estranhos no trato digestivo alto e baixo, com o auxílio de um endoscópio.

- O tubo do cesto flexível com 2.3 mm de diâmetro, revestido em PTFE;
- Possui 16 cm de fio em nitinol, que antecede o cesto;
- Cesto composto por 4, 6 ou 8 fios de nitinol, disponível nos formatos diamante ou espiral;
- Possui injetor lateral para infusão de contraste.

Guia Hidrofílico

em Nitinol JiuHong Medical




Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos urológicos e gastroenterológicos.

- Fabricado em nitinol, revestido em PTFE;
- Ponta em jota ou reta, radiopaca, com presença de tungstênio;
- O revestimento hidrofílico permite deslizar-se com facilidade através de instrumentos e cateteres de uso não vascular;
- Diâmetros 0.80 e 0.88 mm e comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

Cateter Balão

de Dilatação 3 Estágios Medika

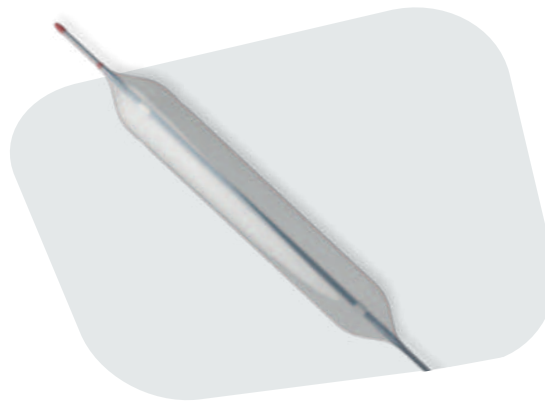


Indicado para dilatação de estruturas do trato digestivo, sob endoscopia.

- Fabricado em Pebax;
- O cateter possui 2.4 mm de diâmetro por 1800, 2000 e 2300 mm de comprimento;
- Balão hidrostático de alta patência, fabricado em Pebax, disponível em diferentes diâmetros progressivos com 55 mm de comprimento;
- Possui 02 marcadores radiopacos em liga de platina;
- Conexão luer lock para insuflação do balão e conexão para o fio guia metálico.

Endoscopia

Endoloop

Medika

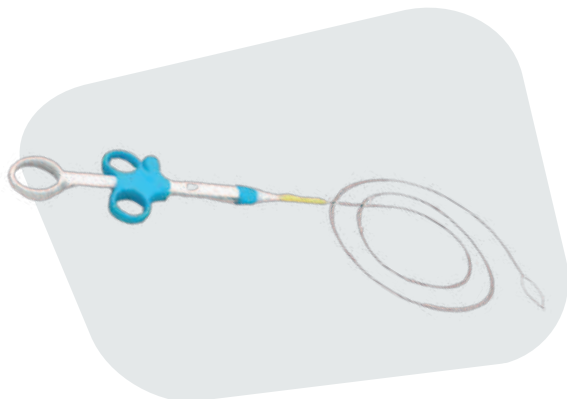


Indicado para inserção de um anel de ligadura para prevenir ou controlar o sangramento após a remoção de um pólipó pediculado do trato digestivo com auxílio de um endoscópio.

- Corpo do cateter helicoidal em aço inoxidável envolvido por uma bainha de revestimento em PTFE;
- Diâmetro externo de 2.5 mm e 165, 195 e 230 cm de comprimento;
- Extremidade distal com um gancho de tração, que estende e retrai o anel de ligadura;
- Acompanha 3 anéis de ligadura, fabricados em Poliamida, com abertura de 15, 20, 30 e 40 mm de diâmetro externo.

Cânula com Alça

para Polipectomia Medika

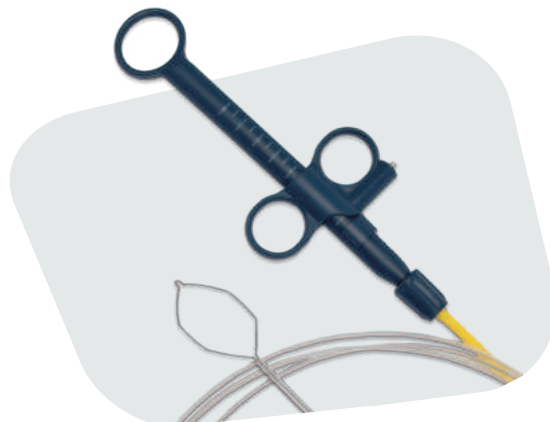

Indicada para remoção de pólipos ou tecido no trato gastrointestinal por meio de corrente elétrica de alta frequência.

- O corpo da cânula é flexível e revestido em PTFE;
- Alça fabricada em aço inoxidável, disponível em diversos tamanhos, nos formatos crescente, hexagonal e oval;
- Empunhadura com design anatômico, que proporciona manuseio fácil e seguro;
- Diâmetro de 2.3 mm, para canais de trabalho de 2.8 mm;
- Comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

Dispositivo para Ligadura

Elástica por Endoscopia com Conector de Irrigação Medika

NOVO



Indicado para procedimentos de hemostasia de varizes esofágicas por via endoscópica, seja na junção gastroesofágica ou acima deste local, também para o laqueamento de hemorroidas internas.

- Oclui as varizes com bandas elásticas, que interrompem o sangramento;
- Penúltima banda possui cor diferente para auxiliar a identificação do último disparo;
- Variedade de bandas para atender diferentes demandas de cada procedimento;
- Tambor com presilha de velcro que proporciona estabilidade do material no canal de trabalho;
- Dispositivo que possibilita irrigação diretamente na manopla, facilitando a realização do procedimento.

Dispositivo para Ligadura

Elástica por Endoscopia Medika



Indicado para procedimentos de hemostasia de varizes esofágicas por via endoscópica, seja na junção gastroesofágica ou acima deste local, também para o laqueamento de hemorroidas internas.

- Oclui as varizes com bandas elásticas, que interrompem o sangramento;
- Ligadura de alta precisão;
- O design da manopla contribui para tornar o procedimento mais fácil, confortável e preciso;
- Penúltima banda tem cor diferente para auxiliar a identificação do último disparo;
- Variedade de bandas para atender diferentes demandas de cada procedimento.

Cânula Endoscópica

para Injeção JiuHong Medical




Indicada para administração de medicamentos injetáveis no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

- O corpo da cânula é um tubo interno em polioximetileno e externo fabricado em PTFE, nos diâmetros 1.8 e 2.3 mm;
- Comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia;
- A cânula possui uma bainha proximal responsável pelo acionamento da agulha;
- Cânula disponível em vários tamanhos com reservatório de proteção.

Cânula Endoscópica

para Injeção Medika

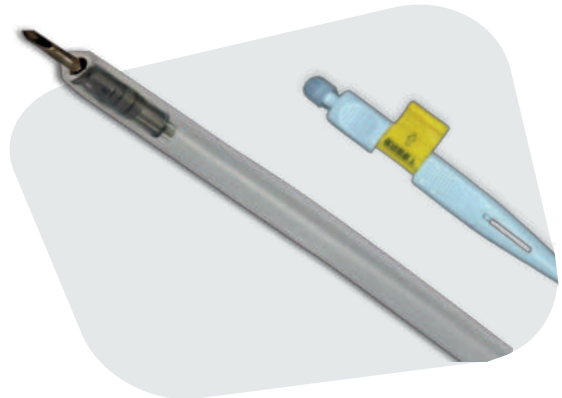

Indicada para administrar medicamentos injetáveis no trato gastrointestinal com o auxílio de um endoscópio.

- O corpo da cânula é um tubo interno em polioximetileno e externo fabricado em PTFE, com 2.4 mm de diâmetro;
- A cânula possui uma bainha proximal responsável pelo acionamento da agulha e uma trava de segurança, que impede o acionamento acidental;
- Cânula disponível nos tamanhos 0.5, 0.6, 0.7 e 0.9 mm e 5 mm de comprimento com reservatório de proteção;
- Comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

Cânula Fina

para Biópsia Ecoendoscópica Medika




Indicada para coleta de amostras da mucosa do trato gastrointestinal, por meio do canal de trabalho de um ecoendoscópio.

- Adequada para uso em ecoendoscópios rígidos e flexíveis com canal de trabalho igual ou superior a 2.0 mm;
- Empunhadura ergonômica graduada, ajusta o comprimento da cânula e da bainha conforme necessário;
- Cânula ecogênica disponível em diversos diâmetros com comprimento de 0 a 8 cm;
- Bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 70 e 140 cm de comprimento;
- Mandril pré-inserido em nitinol, maior flexibilidade durante o procedimento.

Pinça Endoscópica

para Biópsia JiuHong Medical

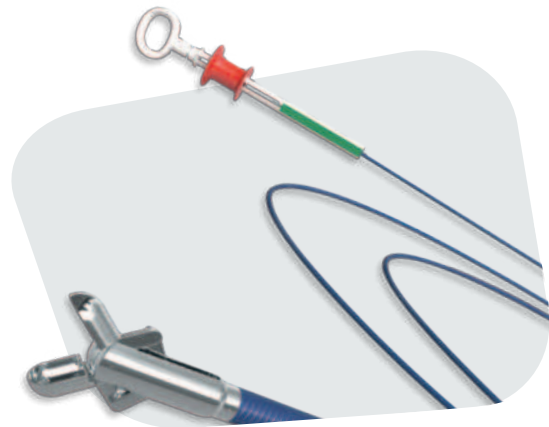


Indicada para realizar coleta de amostras do trato digestivo e respiratório por meio do canal de trabalho endoscópico.

- O corpo da pinça é flexível e revestido em polietileno;
- Garra distal em aço inoxidável com ou sem espícula;
- Empunhadura fácil de manusear;
- Disponível nos diâmetros: 1.8 mm e 2.3 mm, para se adequar aos canais de trabalho endoscópicos;
- Comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

Endoscopia

Pinça Endoscópica

para Apreensão JiuHong Medical

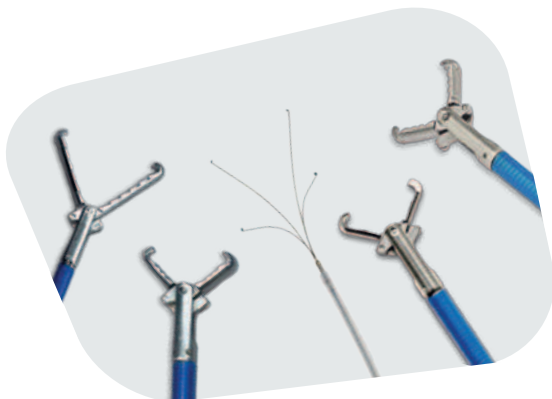

Indicada para a remoção de corpos estranhos no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

- O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, flexível e possui revestimento em PTFE;
- Garra em diversos modelos de apreensão, tais como dente de rato, jacaré, jacaré com dente de rato, pelicano, três pontas, quatro pontas e cinco pontas;
- Empunhadura fácil de manusear;
- Diâmetro de 2.3 mm, e comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

Pinça Endoscópica

para Apreensão com Rede JiuHong Medical



Indicada para remoção de corpo estranho no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

- O corpo da pinça é flexível e revestido em PTFE;
- O laço é fabricado em aço inoxidável e possui uma rede em nylon para captação do corpo estranho;
- Empunhadura giratória, que permite a rotação do laço;
- Disponível nos diâmetros: 1.8 mm e 2.5 mm, para se adequar aos canais de trabalho endoscópicos;
- Comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

Cateter Balão

Endoscópico JiuHong Medical



Indicado para dilatação hidrostática de alta patência do trato digestivo por meio do canal de trabalho de um endoscópio.

- Fabricado em nylon;
- O cateter possui diâmetros de 2, 3.5 ou 4 mm, e comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia;
- Balão disponível em diversos tamanhos, incluindo diâmetros progressivos, com comprimentos variando entre 40, 60 e 80 mm;
- Disponível no comprimento para tratamento de Acalasia;
- Possui 2 marcadores radiopacos em platina;
- Conexão luer lock para insuflação do balão e conexão para o fio guia metálico.

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika




Indicada para coleta de amostras do trato digestivo por meio do canal de trabalho endoscópico.

- O corpo da pinça é flexível e revestido em polietileno;
- Garra distal em aço inoxidável com ou sem espícula;
- Empunhadura fácil de manusear;
- Disponível nos diâmetros: 1.8 mm e 2.3 mm, para se adequar aos canais de trabalho endoscópicos;
- Comprimentos adequados para procedimentos de endoscopia e colonoscopia.

Bocal para Endoscopia

com Presilha Medika

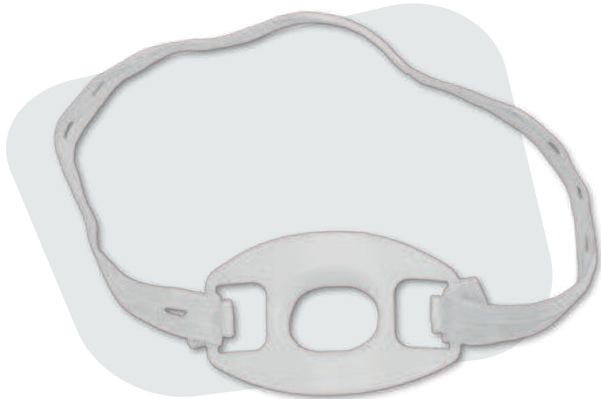


Indicado para proteger a cavidade oral do paciente e o endoscópio durante procedimentos gastroendoscópicos.

- Fabricado em polipropileno com fita elástica sintética de 34 cm de comprimento e orifícios para encaixe na presilha;
- Abertura com 2.5 cm de largura x 2.0 cm de altura e 2.6 cm de comprimento.

Bocal para Endoscopia

com Presilha JiuHong Medical

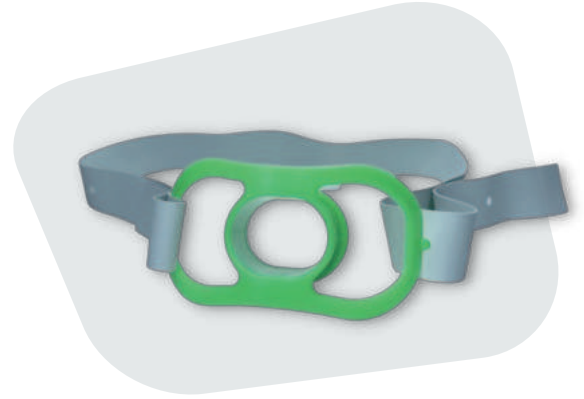

Indicado para proteger a cavidade oral do paciente e o endoscópio durante procedimentos gastroendoscópicos.

- Fabricado em polipropileno com fita elástica em borracha sintética de 55 cm de comprimento e orifícios para encaixe na presilha;
- Abertura com 2.5 cm de largura x 2.0 cm de altura.

Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio
JiuHong Medical



Indicada para limpeza do canal de trabalho de endoscópios.

- O corpo da escova é fabricado em poliacetal (POM), com cerdas em nylon;
- Diâmetros 2.0, 2.8 e 3.2 mm por 1200, 1800, 2300 mm de comprimento;
- Disponível nas versões de escova dupla e tripla.

Endoscopia

Sonda para Nutrição Enteral

em Silicone por Gastrostomia Endoscópica Percutânea Medika



Indicada para administração de suporte nutricional enteral em pacientes que estão impossibilitados de ingestão oral, por meio de gastrostomia endoscópica percutânea.

- Radiopaca e graduada a cada centímetro para facilitar a medição;
- Possui um tubo PEG em silicone em diversos diâmetros por 60 cm de comprimento;
- Cúpula em silicone em uma extremidade e um fio metálico na outra;
- Acompanha todos os materiais necessários para a realização da gastrostomia.

Sonda para Nutrição

Enteral em Silicone Baixo Perfil por Gastrostomia com Acessórios EN FIT Medika




Indicada para administração de suporte nutricional enteral em pacientes que estão impossibilitados de ingestão oral, após a realização de gastrostomia.

- Fabricada em silicone médico transparente e radiopaco;
- Possui balão em silicone com volumes de 5 e 10 ml, revestindo a extremidade distal da sonda, flexível e confortável para o paciente;
- Possui membrana interna anti-refluxo;
- As extensões para sonda em silicone possuem trava de segurança, que diminui a possibilidade de desconexão e conexão EN FIT na extremidade;
- Disponível em vários diâmetros e comprimentos.

Sonda de Gastrostomia

para Nutrição Enteral com Balão Fortune

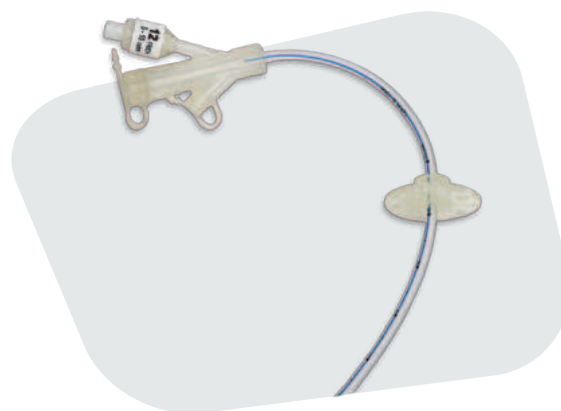

Indicada para administração de suporte nutricional enteral em pacientes que estão impossibilitados de realizar ingestão oral.

- Fabricada em silicone médico transparente e radiopaco;
- Possui balão em sua extremidade distal com volumes de 5 a 20 ml;
- Conexão universal, disco de retenção externo, em silicone, flexível e confortável para o paciente;
- Disponível em vários diâmetros por 255 mm de comprimento.

Conheça Nossas Linhas



Anestesiologia



Diagnóstico



Endoscopia



Hemodiálise



Neonatologia



Nutrição



Obstetrícia e Ginecologia



Ortopedia



Quimioterapia



Terapia Intensiva



Urologia



Videocirurgia



Canais de Comunicação

-  medikasaude
-  medika
-  MedikaQualidadeemSaude
-  medikasaude

Entre em Contato

-  (31) 99103-0144 /  (31) 3688-1901
-  www.medika.com.br
- Rua Aleomar Baleeiro, nº 15, Centro
Lagoa Santa/ MG. CEP: 33.230-124.